



Control Bar Web Benutzerhandbuch

Version 5.0

10/3/2025

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

Inhaltsverzeichnis

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Web starten	3
1.2 Benutzeranmeldung	4
1.2.1 Automatische Anmeldung	6
1.2.2 Abmelden und bleiben	7
1.3 Arbeitsbereich	8
1.3.1 Auswahl eines Moduls	8
1.4 Control Bar.....	9
1.5 Hauptmenü.....	10
1.5.1 Passwort ändern.....	11
1.5.2 Benutzerprobleme melden	12
1.6 Zusätzliche Submodule.....	13
1.6.1 CDSS-KONFIGURATOR	13
1.6.2 Identity	15

1. Control Bar Web



Zu Informationen über die Produktumgebung, Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen und der Zweckbestimmung siehe USR DEU Digistat Care und/oder USR DEU Digistat Docs (abhängig von den installierten Modulen - für die Digistat Suite EU) oder USR ENG Digistat Suite NA (für die Digistat Suite NA). Die Kenntnis und das Verständnis des entsprechenden Dokuments sind für eine korrekte und sichere Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Control Bar Web zwingend erforderlich.

1.1 Control Bar Web starten

So starten Sie die Control Bar Web:

- Geben Sie zum Aufrufen der Control Bar Web die entsprechende Adresse in die Browsers Adressleiste ein.

Folgende Seite erscheint:

Abb. 1

1.2 Benutzeranmeldung

Eine Benutzeranmeldung ist erforderlich, um die Funktionen des Systems zu nutzen.

login

 Username

 Password

 login

Abb. 2

So melden Sie sich an:

- Geben Sie Ihren Benutzernamen in das Feld „Benutzername“ (Abb. 2 **A**) ein.
- Geben Sie Ihr Passwort in das Feld „Passwort“ (Abb. 2 **B**) ein.
- Klicken Sie auf die Taste **Anmelden** (Abb. 2 **C**).

Der Benutzer ist angemeldet.



Benutzername und Passwort werden vom Systemadministrator vergeben. Wenn Sie keinen Benutzernamen und kein Passwort haben, sind Sie nicht berechtigt, das Produkt zu verwenden.

Nach der Anmeldung an das System wird auf der Taste **Benutzer** in der Steuerleiste dem angemeldeten Benutzer sein Kürzel angezeigt (in Abb. 3 **A** ist dies ADMIN).



Abb. 3

*Der Benutzer, dessen Anmeldeinformationen auf der Taste **Benutzer** angezeigt werden, ist für alle mit dem Produkt durchgeführten Aktionen verantwortlich.*



Hinweis: Einige Ausnahmen sind je nach Konfiguration Ihrer Installation möglich (z. B. Autologin oder „Abmelden und bleiben“-Funktionalitäten – Absätze 1.2.1 e1.2.2).

Es wird dringend empfohlen, sich vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes abzumelden, um eine unsachgemäße Verwendung des Systems zu vermeiden.



Es ist möglich, das Produkt so zu konfigurieren, dass die Anmeldung über ein externes System möglich ist (Single Sign-On). In diesen Fällen wird eine spezielle Taste auf dem Anmeldebildschirm angezeigt.

Um sich abzumelden, klicken Sie während der Arbeitssitzung auf die Taste **Benutzer**. Das folgende Menü erscheint (Abb. 4).



Abb. 4

- Klicken Sie auf **ABMELDEN** (Abb. 4 **A**).

Zum Abmelden ist eine Bestätigung erforderlich. Nach der Bestätigung wird der Benutzer abgemeldet. Für eine erneute Anmeldung klicken Sie erneut auf die Taste **Benutzer**. Der in Abb. 2 gezeigte Bildschirm erscheint erneut.

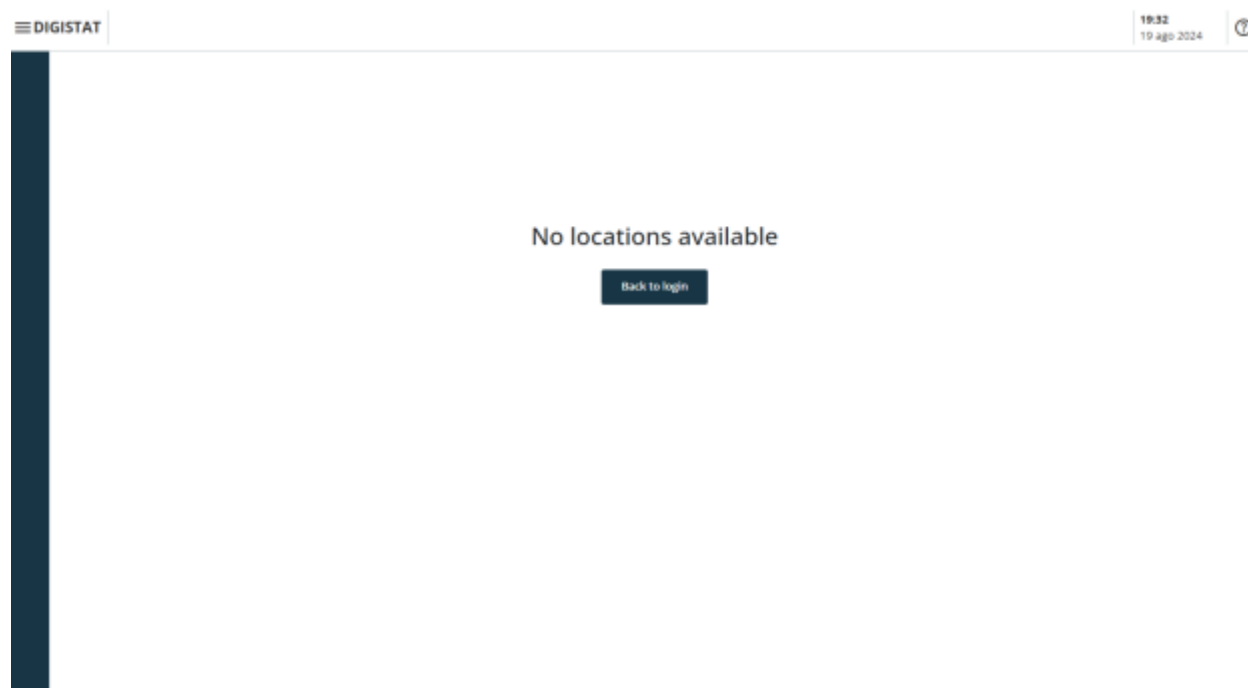


Abb. 5

Wenn der Benutzer keinen zuvor zugeordneten Standort hat (siehe Handbuch *CGF ENG Digistat Suite MDR* für die Konfiguration der Benutzerstandortzuordnung), ist es nicht möglich, sich am Modul anzumelden. In diesem Fall wird die Meldung „Kein Standort verfügbar“ angezeigt (Abb. 5). Darüber hinaus wird die Taste **Back to login** (Zurück zum

Login) bereitgestellt, um zur Anmeldeseite zurückzukehren und erneut zu versuchen, sich als neuer Benutzer oder als derselbe Benutzer nach der Zuordnung des Standorts anzumelden.



Ein „Standort“ ist eine Digistat-Konfigurationseinheit, die einem bestimmten Bereich der Gesundheitseinrichtung entspricht. Es kann sich beispielsweise um eine Abteilung, eine Station, einen Operationsblock usw. handeln, abhängig von den Anforderungen der Gesundheitseinrichtung. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die Systemadministratoren.

1.2.1 Automatische Anmeldung

Es ist möglich, Digistat Web so zu konfigurieren, dass eine automatische Benutzeranmeldung ermöglicht wird. Das bedeutet, dass beim Start von Digistat Web bereits ein konfigurierter Benutzer angemeldet ist. Wenn dies der Fall ist, sind einige konfigurierte Funktionalitäten sofort verfügbar, bevor ein Anmeldeverfahren durchgeführt wird.

Um die automatische Anmeldung zu aktivieren, ist es erforderlich, die Systemoption „AutoLoginUsername“ zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Dokument DSO ENG System Options.

Wenn die automatische Anmeldung aktiv ist, ist es für einen Benutzer weiterhin möglich, sich mit seinen persönlichen Anmeldedaten anzumelden. Um das zu tun.

- Klicken Sie auf die **Benutzer**-Schaltfläche (Abb. 6 A).

DIGISTAT Select Patient



Abb. 6

Das folgende Menü wird sich öffnen (Abb. 7).

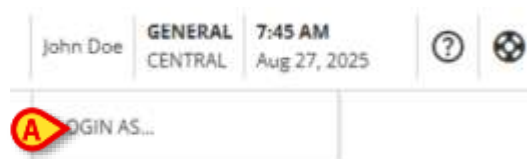


Abb. 7

- Klicken Sie auf **ANMELDEN ALS...** (Abb. 7 A).

Der Anmeldebildschirm wird angezeigt (Abb. 2). Melden Sie sich an, wie in Absatz 1.2 beschrieben.



Wenn die Systemoption „AutoLoginUsername“ konfiguriert ist, wird die Funktion „Aktuellen Benutzer abmelden“ (beschrieben in Absatz 1.2.2) deaktiviert.



Die Funktionen „Automatische Anmeldung“ und „Abmelden und bleiben“ sind nur verfügbar, wenn die Anwendung im „Digistat Web Browser“ ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für Digistat Suite (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Abmelden und bleiben

Diese Funktionalität ermöglicht es dem Benutzer, sich abzumelden, während er mit einem während der Konfiguration angegebenen Benutzernamen angemeldet bleibt. Das bedeutet, dass nach der Benutzerabmeldung ein herkömmlicher Benutzer angemeldet bleibt. Um diese Funktion zu aktivieren, ist es erforderlich, die Systemoption „LogoutAndRemainUsername“ zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Dokument DSO ENG System Options. Wenn diese Funktion verfügbar ist, wird die Option **Aktuellen Benutzer abmelden** im Menü „Benutzer“ (Abb. 9 A) angezeigt.

Zum „Abmelden und bleiben“

- Klicken Sie auf die **Benutzer**-Schaltfläche (Abb. 8 A).

DIGISTAT Select Patient



Abb. 8

Das folgende Menü wird sich öffnen (Abb. 9).



Abb. 9

- Klicken Sie auf **AKTUELLEN BENUTZER ABMELDEN** (Abb. 9 A).

Die Anmeldedaten des aktuellen Benutzers verschwinden aus der **Benutzer**-Schaltfläche, während die Anmeldedaten des herkömmlich konfigurierten Benutzers angezeigt werden.

1.3 Arbeitsbereich

Nach der Benutzeranmeldung werden die verfügbaren Digistat Web Module in der seitlichen Symbolleiste angezeigt. (Abb. 5 **A**) Der Arbeitsbereich (Abb. 10 **B**) zeigt die Fenster und die Funktionen des Moduls an, das auf der seitlichen Leiste ausgewählt wurde.



Abb. 10

Die Control Bar (Steuerleiste) (Abb. 10 **C**) wird in Kapitel 1.4 und den folgenden Abschnitten beschrieben.

Das aktuell ausgewählte Modul ist hervorgehoben.

1.3.1 Auswahl eines Moduls

So wählen Sie ein Modul aus:

- Klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der seitlichen Leiste.

Das Symbol wird hervorgehoben und die Funktionen des Moduls werden im Arbeitsbereich angezeigt.

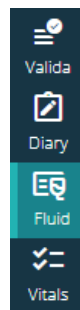


Abb. 11

1.4 Control Bar

Die Control Bar, welche im oberen Teil des Bildschirms angezeigt wird, ist allen Modulen gemeinsam. Ihre wichtigsten Eigenschaften sind nachstehend aufgeführt.



Abb. 12

- Die Taste **Menü** (Abb. 12 **A**) öffnet das Hauptmenü von Control Bar Web. Siehe Abschnitt 1.5.
- Die **Patiententaste** (Abb. 12 **B**). Wenn kein Patient ausgewählt ist, kann diese Taste angeklickt werden, um das Patientenauswahlverfahren zu starten. Nach der Patientenauswahl werden der Name und die Hauptdaten des Patienten angezeigt. Bei aufgenommenen Patienten werden zusätzlich Bettnummer und Abteilungsname angezeigt. Wenn für den ausgewählten Patienten bestimmte zusätzliche Control Bar Web-Funktionen verfügbar sind, kann die Taste „Patient“ angeklickt werden, um ein Dropdown-Menü anzuzeigen, das den Zugriff auf diese Funktionen ermöglicht (siehe Abschnitt 1.6 für weitere Informationen). Wenn neben dem Namen des Patienten ein Vorhängeschloss-Symbol -  - angezeigt wird, bedeutet dies, dass einige Patientendaten/-funktionalitäten für diesen Patienten gesperrt sind.



Das Patientenauswahlverfahren wird normalerweise auf dem Digistat-Patienten-Explorer-Webmodul durchgeführt. Anweisungen zu den Patientenverwaltungsfunktionen finden Sie im USR DEU Patient Explorer Web-Benutzerhandbuch (Dokument USR DEU Patient Explorer Web). Anstelle des Patient Explorer Web können andere Module für die Patientenauswahl konfiguriert werden. In diesen Fällen finden Sie Erläuterungen und Anleitungen in der spezifischen Dokumentation.

- Der in Abb. 12 **C** angezeigte Bereich kann verwendet werden, um zu signalisieren, dass es Benachrichtigungen für den Benutzer gibt.
- Die Taste **Benutzer** ermöglicht den Zugriff auf die Funktionen An- und Abmelden sowie Ändern des Passworts (Abb. 12 **D**).
- Anzeige von Datum und Uhrzeit (Abb. 12 **E**).
- Verwenden Sie die Taste **Hilfe** (Abb. 12 **F**), um auf die Online-Hilfe zuzugreifen.
- Klicken Sie auf das Symbol  (Abb. 12 **G**), um einen Problembericht zu erstellen, der zur Unterstützung an den technischen Support gesendet werden soll. Siehe Abschnitt 1.5.2.

1.5 Hauptmenü

Die Taste **Menü** (Abb. 12 **A**) öffnet das folgende Menü (Abb. 13).

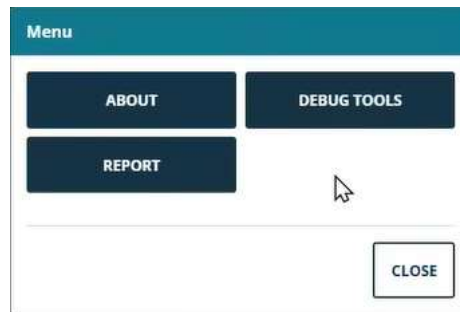


Abb. 13

Die Taste **Info** zeigt ein Fenster mit Informationen zur installierten Version der Digistat Suite und den zugehörigen Lizenzen an (weitere Informationen finden Sie in der spezifischen Dokumentation).

Die tatsächliche Kennzeichnung des Produkts steht in der Info-Box, die auf den Client-Arbeitsplätzen, mobilen Geräten und Webmodulen angezeigt wird, auf denen die Digistat Suite installiert ist.

Die Taste **Debug-Tools** ist Systemadministratoren vorbehalten.

Die Schaltfläche **Report** („Bericht“) öffnet ein Fenster mit einer Liste der verfügbaren Berichte (Abb. 14). Die Schaltfläche **Report** („Bericht“) ist sowohl bei ausgewählter als auch bei nicht ausgewählter Patientendatei verfügbar. Wenn ein Patient ausgewählt ist, werden die Berichte angezeigt, die sich auf die Krankenhaus-Unit des Patienten beziehen (mit „Patient“ gekennzeichnet). Wenn kein Patient ausgewählt ist, sind die verfügbaren Berichte diejenigen, die sich auf die Krankenhaus-Unit des angemeldeten Benutzers beziehen (mit „Allgemein“ gekennzeichnet).



Jeder Benutzer wird während der Konfiguration einer oder mehrerer Krankenhaus-Units zugeordnet.

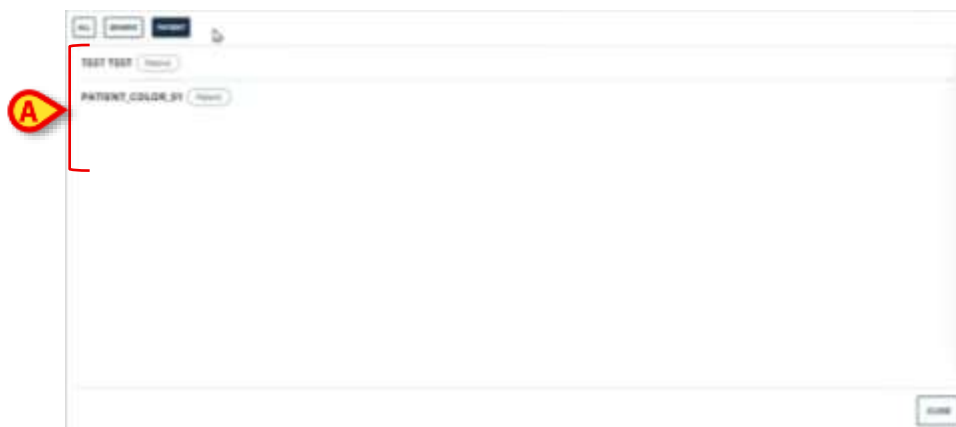


Abb. 14

Jede Zeile im Fenster bezieht sich auf einen Druckbericht.

- Klicken Sie auf eine Zeile, um eine Druckvorschau anzuzeigen.

Jeder Bericht kann als „Patientenbericht“ oder „Allgemeiner Bericht“ (Abb. 15 **A**) gekennzeichnet werden.



Abb. 15

Die in Abb. 15 **B** angezeigten Schaltflächen ermöglichen es, die im Fenster angezeigten Berichte zu filtern (nur „Allgemeine Berichte“, nur „Patientenberichte“ oder alle verfügbaren Berichte).

1.5.1 Passwort ändern

So ändern Sie das Benutzerpasswort:

- Klicken Sie auf die Taste **Benutzer** in der Control Bar (Abb. 16 **A**).



Abb. 16

- Das folgende Menü erscheint (Abb. 17).



Abb. 17

- Klicken Sie auf **Passwort ändern** (Abb. 17 **A**). Das folgende Fenster erscheint (Abb. 18).

CHANGE PASSWORD



Abb. 18

- Geben Sie das aktuelle Passwort in das Feld „Altes Passwort“ (Abb. 18 **A**) ein.
- Geben Sie das neue Passwort in das Feld „Neues Passwort“ (Abb. 18 **B**) ein.
- Geben Sie das neue Passwort nochmals in das Feld „Neues Passwort bestätigen“ (Abb. 18 **C**) ein.
- Klicken Sie auf **Speichern** (Abb. 18 **D**).

1.5.2 Benutzerprobleme melden

Das Symbol  auf der Control Bar (Abb. 19 **A**) ermöglicht - wenn vorhanden - einen Bericht über ein „Problem“ zu erstellen und gegebenenfalls technischen Support zu erhalten.



Abb. 19

 Das Vorhandensein des Symbols  hängt von der Systemoption *EnableUserIssueReporting* ab. Weitere Informationen erhalten Sie von den Systemadministratoren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Klicken Sie auf das Symbol  (Abb. 19 **A**). Das folgende Fenster erscheint (Abb. 20).

Abb. 20

- Geben Sie eine Beschreibung des Problems in das Feld „Beschreibung“ ein (Abb. 20 **A**).
- Klicken Sie auf **Senden** (Abb. 20 **B**).

Die Aktion wird bestätigt und es wird eine Problem-ID-Nummer angegeben.

1.6 Zusätzliche Submodule

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Untermodule können je nach Konfiguration des Produkts in der Gesundheitsorganisation vorhanden sein oder nicht. Jedes Submodul kann durch Klicken auf einen bestimmten Menüpunkt in einem Dropdown-Menü geöffnet werden, das neben der Patiententaste angezeigt wird. Sie sind patientenbezogen, d.h. sie stehen nur zur Verfügung, wenn bereits ein Patient ausgewählt ist.

1.6.1 CDSS-KONFIGURATOR

Das CDSS-KONFIGURATOR-SUBMODUL kann durch Konfiguration als zusätzlicher Abschnitt des Control Bar Web aktiviert werden. So öffnen SIE das CDSS-Konfigurator-Submodul:

- Wählen Sie den entsprechenden Patienten aus.



Siehe USR DEU Patient Explorer Web-Benutzerhandbuch für das Patientenauswahlverfahren (Dokument USR DEU Patient Explorer Web).

Wenn nach der Patientenauswahl zusätzliche Control Bar-Submodule verfügbar sind, wird das Symbol auf der Patiententaste (Abb. 21 **A**) angezeigt.



Abb. 21

- Klicken Sie auf das Symbol .

Ein Dropdown-Fenster wird angezeigt, in dem die verfügbaren zusätzlichen Submodule aufgelistet sind (Abb. 22).

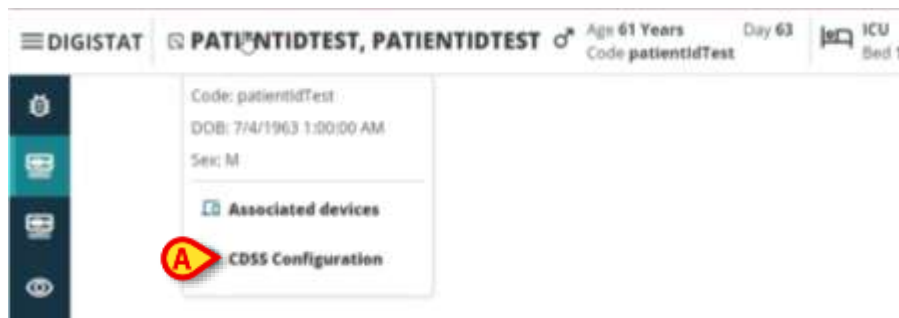


Abb. 22

- Klicken Sie auf „CDSS-Konfiguration“ (Abb. 22 **A**).

Das folgende Fenster wird angezeigt und enthält die Regeln, die dem aktuell ausgewählten Patienten zugeordnet sind (Abb. 23).

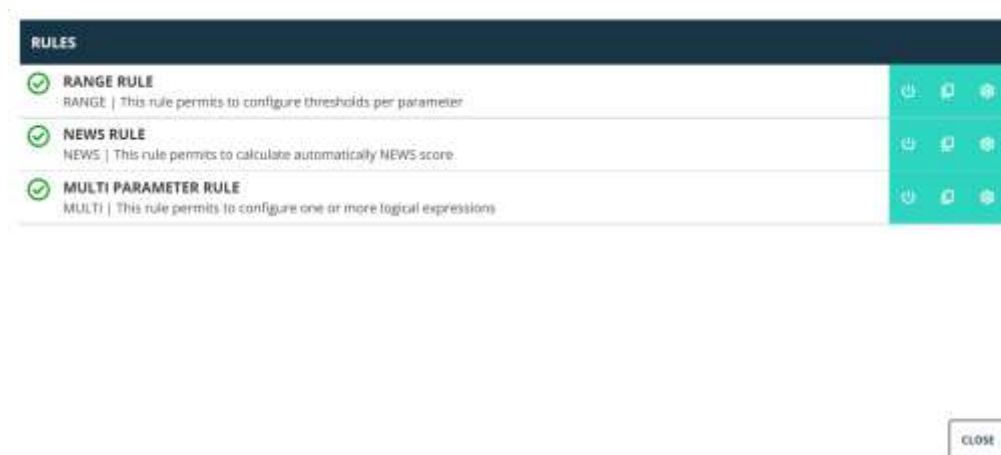


Abb. 23

Die vollständige Beschreibung und die Gebrauchsanweisung dieses Submoduls finden Sie im CDSS-Konfigurator-Benutzerhandbuch (Dokument USR DEU CDSS WEB).

1.6.2 Identity

Das Identity-Submodul kann durch Konfiguration als zusätzlicher Abschnitt des Control Bar Web aktiviert werden. So öffnen Sie das Identity-Submodul:

- Wählen Sie den entsprechenden Patienten aus.



Siehe *USR DEU Patient Explorer Web-Benutzerhandbuch für das Patientenauswahlverfahren (Dokument: USR DEU Patient Explorer Web)*.

Wenn nach der Patientenauswahl zusätzliche Control Bar-Submodule verfügbar sind, wird das Symbol auf der Patiententaste (Abb. 24 **A**) angezeigt.



Abb. 24

- Klicken Sie auf das Symbol .

Ein Dropdown-Fenster wird angezeigt, in dem die verfügbaren zusätzlichen Abschnitte aufgeführt sind (Abb. 25).

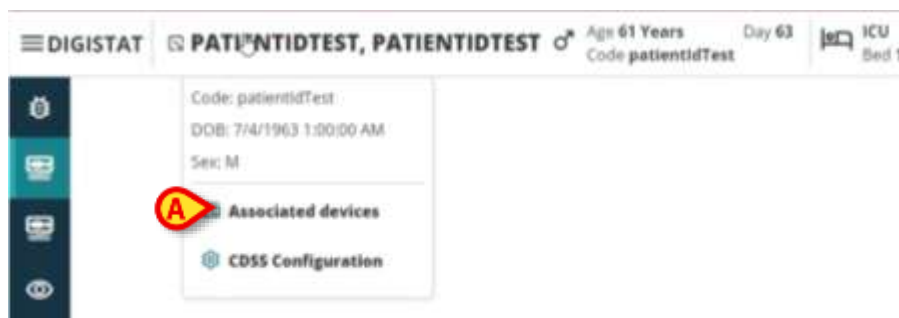


Abb. 25

- Klicken Sie auf „Zugehörige Geräte“ (Abb. 25 **A**).

Das folgende Fenster wird angezeigt, das die Geräte auflistet, die dem aktuell ausgewählten Patienten zugeordnet sind (Abb. 26).

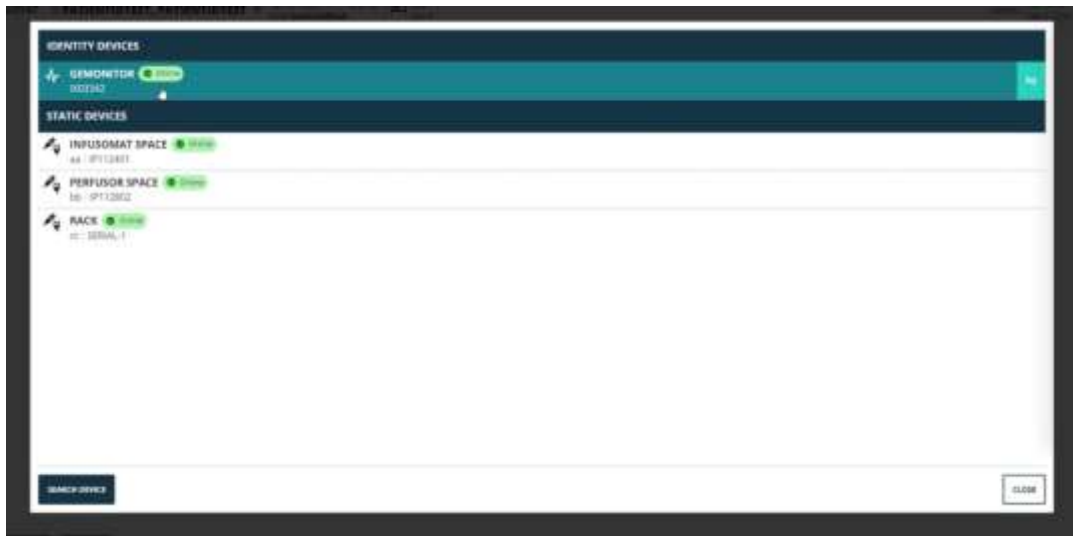


Abb. 26

Die vollständige Beschreibung und die Gebrauchsanweisung dieses Submoduls (Dokument USR DEU Identity Web) finden Sie im Identity-Benutzerhandbuch.