



# **Control Bar Web Brugermanual**

**Version 5.0**

**10/3/2025**

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale  
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy  
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030  
[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

# Indhold

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1. Control Bar Web .....</b>             | <b>3</b> |
| 1.1 Lancering Control Bar Web.....          | 3        |
| 1.2 Brugerlogin.....                        | 4        |
| 1.2.1 Automatisk login.....                 | 6        |
| 1.2.2 Log ud og forbliv .....               | 7        |
| 1.3 Arbejdsområde.....                      | 8        |
| 1.3.1 Valg af modul .....                   | 8        |
| 1.4 Control Bar (kontrollinje) .....        | 9        |
| 1.5 Hovedmenu.....                          | 10       |
| 1.5.1 Ændr adgangskode.....                 | 11       |
| 1.5.2 Rapportering af brugerproblemer ..... | 12       |
| 1.6 Yderligere undermoduler .....           | 13       |
| 1.6.1 CDSS-konfigurator .....               | 13       |
| 1.6.2 Identity .....                        | 15       |

# 1. Control Bar Web



*For information om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tilsigtet brug se USR DNK Digistat Care og/eller USR DNK Digistat Docs (afhængigt af de installerede moduler - til Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (for Digistat Suite NA) . Kendskab til og forståelse af det relevante dokument er obligatorisk for korrekt og sikker brug af Control Bar Web, beskrevet i dette dokument.*

## 1.1 Lancering Control Bar Web

Sådan starter du Control Bar Web:


- Indtast den specifikke adresse i browserens adresselinje.

Følgende side åbner:

**Fig 1**

## 1.2 Brugerlogin

Brugerlogin er påkrævet for at aktivere systemfunktionerne.

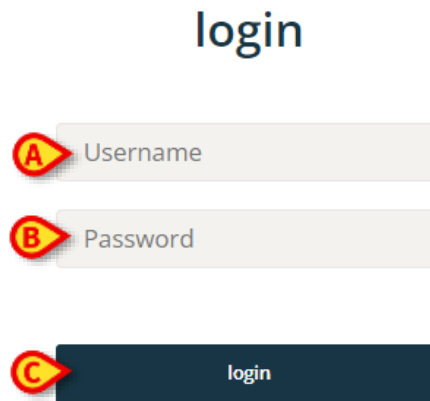

The login form consists of three elements: a text input field labeled 'Username' with a red circle 'A' pointing to it, a text input field labeled 'Password' with a red circle 'B' pointing to it, and a dark blue button labeled 'login' with a red circle 'C' pointing to it.

Fig 2

For at logge ind:

- Indtast dit brugernavn i feltet "Brugernavn" (Fig 2 **A**).
- Indtast din adgangskode i feltet "Adgangskode" (Fig 2 **B**).
- Klik på knappen **Log ind** (Fig 2 **C**).

Brugeren er på denne måde logget ind.

---

 *Brugernavn og adgangskode udstedes af systemadministratoren. Hvis du ikke har et brugernavn og en adgangskode, er du ikke autoriseret til at bruge produktet.*

---

Når du har fået adgang til systemet, vises et akronym svarende til den loggede bruger på knappen **Bruger** på kontrollinjen (akronymet er ADMIN i Fig 3 **A**).



Fig 3

---

*Brugeren, hvis legitimationsoplysninger vises på knappen Bruger, er ansvarlig for alle handlinger, der udføres på produktet.*

 *OBS: Nogle undtagelser er mulige afhængigt af konfigurationen af din installation (f.eks. funktionerne "Automatisk login" eller "Log ud og forbliv" – afsnit 1.2.1 e 1.2.2).*

*Det anbefales kraftigt at logge ud, før du forlader produktarbejdsstationen for at undgå upassende brug af systemet.*

---



Det er muligt at konfigurere produktet til at tillade login via et eksternt system (single sign on). I disse tilfælde vises en dedikeret knap på login-skærmen.


For at logge ud, klik på knappen **Bruger** under arbejds-sessionen. Følgende menu åbnes (Fig 4):



**Fig 4**

- Klik på **LOG UD** (Fig 4 **A**).

Brugerbekræftelse er påkrævet. Efter bekræftelse logges brugeren ud. For at logge ind igen, klik på knappen **Bruger** igen. Skærmen, der vises i Fig 2 vil blive vist igen.

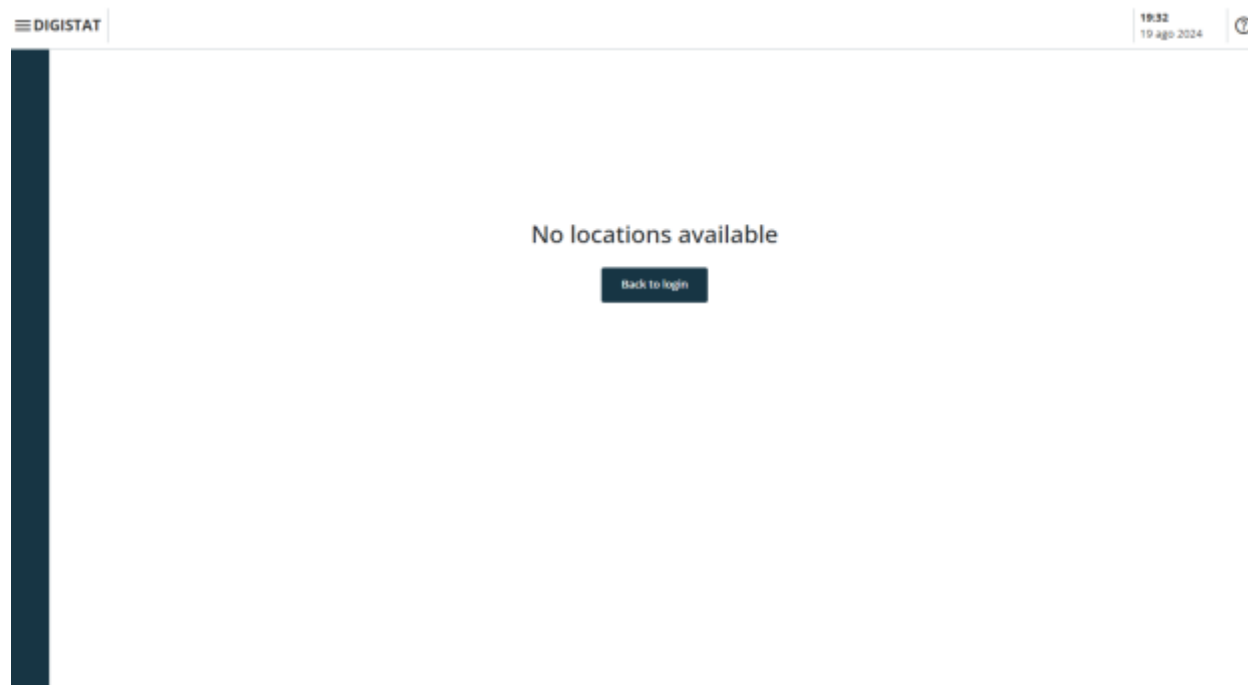

**Fig 5**

Hvis brugeren ikke har en tidligere tilknyttet lokation (se manualen *CGF ENG Digistat Suite MDR* for konfiguration af tilknytning af bruger-placering), er det ikke muligt at logge ind på modulet. I dette tilfælde vises meddelelsen "Ingen placering tilgængelig" (Fig 5). Derudover er der en **Tilbage til Login**-knap for at vende tilbage til login-siden og prøve at logge på igen med en ny bruger eller med den samme bruger efter tilknytning af bruger-placering.



En "Lokation" er en Digistat-konfigurationsenhed, der svarer til et specifikt område af sundhedsvæsenets struktur. Det kan for eksempel være en afdeling, en operationsblok etc. afhængig af sundhedsstrukturens krav. Se systemadministratorerne for mere information.

## 1.2.1 Automatisk login

Det er muligt at konfigurere Digistat Web til at tillade automatisk brugerlogin. Det betyder, at når Digistat Web startes, er en konfigureret bruger allerede logget ind. Når dette er tilfældet, er nogle konfigurerede funktioner tilgængelige med det samme, før der udføres nogen loginprocedure.

For at aktivere automatisk login er det nødvendigt at konfigurere "AutoLoginUsername"-systemindstillingen. Se dokumentet "DSO ENG System Options" for mere information.

Når automatisk login er aktiv, er det stadig muligt for en bruger at logge ind med sine personlige legitimationsoplysninger. For at gøre det,

- skal du klikke på **Bruger**-knappen (Fig 6 A).

DIGISTAT Select Patient



John Doe 12:48 PM  
Sep 4, 2025



Fig 6

Følgende menu åbnes (Fig 7).



Fig 7

- Klik på **LOG IND SOM...** (Fig 7 A).

Login-skærmen vises (Fig 2). Log ind som beskrevet i afsnit 1.2.



Når "AutoLoginUsername"-systemindstillingen er konfigureret, er funktionen "Log ud af nuværende bruger" (beskrevet i afsnit 1.2.2) deaktiveret.



Funktionerne "Automatisk login" og "Log ud og forbliv" er kun tilgængelige, når applikationen kører i Digistat webbrowser. Se installationsmanualen til Digistat Suite for yderligere oplysninger (INST ENG Digistat Suite).

## 1.2.2 Log ud og forbliv

Denne funktion giver brugeren mulighed for at logge ud, mens vedkommende forbliver logget ind med et brugernavn, der er angivet under konfigurationen. Det betyder, at en almindelig bruger forbliver logget ind efter brugerens udlogging. For at aktivere denne funktionalitet er det nødvendigt at konfigurere "*LogoutAndRemainUsername*"-systemindstillingen. Se dokumentet "DSO ENG System Options" for mere information. Når denne funktionalitet er tilgængelig, er "**Log ud af nuværende bruger**"-indstillingen tilgængelig i Bruger-menuen (Fig 9 A).

For at "logge ud og forblive"

- skal du klikke på **Bruger**-knappen (Fig 8 A).



Fig 8

Følgende menu åbnes (Fig 9).



Fig 9

- Klik på **LOGOUT CURRENT USER** (LOG UD NUVÆRENDE BRUGER - Fig 9 A).

Den aktuelle brugers legitimationsoplysninger forsvinder fra **Bruger**-knappen, mens legitimationsoplysningerne for den almindelige konfigurerede bruger vises.

## 1.3 Arbejdsområde

Efter brugerlogin vises ikonerne svarende til de tilgængelige Digistat Web-moduler på sidebjælken (Fig 10 **A**). Arbejdsområdet (Fig 10 **B**) viser skærbillederne og funktionaliteterne for det valgte modul på sidebjælken.

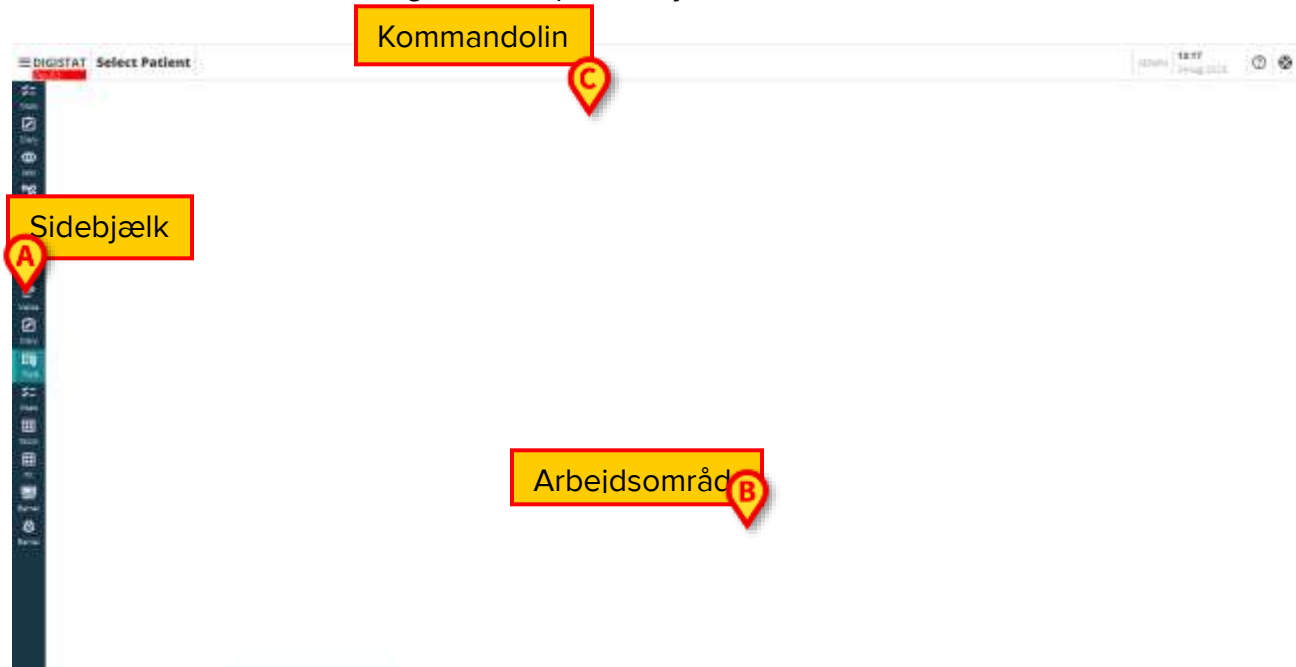


Fig 10

Control Bar (Fig 10 **C**) er beskrevet i afsnit 1.4 og efterfølgende. Det aktuelt valgte modul er fremhævet.

### 1.3.1 Valg af modul

For at vælge et modul:

- Klik på det tilsvarende ikon i sidebjælken.

Ikonet vil blive fremhævet, og modulets funktionaliteter vil blive vist i arbejdsområdet.

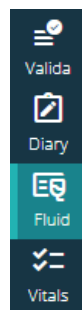


Fig 11

## 1.4 Control Bar (kontrollinje)

Control Bar (kontrollinjen), der vises i den øverste del af skærmen, er fælles for alle moduler. Dens vigtigste egenskaber er anført nedenfor:



Fig 12

- **Menu**-knappen (Fig 12 **A**) åbner Control Bar Webs hovedmenu. Se afsnit 1.5.
- **Patient**-knappen (Fig 12 **B**). Hvis ingen patient er valgt, kan du klikke på denne knap for at starte patientvalgsproceduren. Efter patientvalg vises patientens navn og hoveddata. For indlagte patienter vises også sengenummer og afdelingsnavn. Hvis specifikke yderligere Control Bar Web-funktioner er tilgængelige for den valgte patient, kan du klikke på patient-knappen for at få vist en rullemenu, der giver adgang til disse funktioner (se afsnit 1.6 for yderligere information). Hvis et hængelåsikone -  - vises ved siden af patientens navn, betyder det, at nogle patientdata/-funktioner er låst for den pågældende patient.




*Patientudvælgelsesproceduren udføres normalt på Digistat Patient Explorer Web-modulet. Se USR DNK Patient Explorer Web-brugervejledningen (dokument USR DNK Patient Explorer Web) for instruktioner om patientstyringsfunktioner. Andre moduler kan konfigureres til patientvalget i stedet for Patient Explorer Web. Hvis dette er tilfældet, se den specifikke dokumentation for instruktioner.*

- Området angivet i Fig 12 **C** kan bruges til at signalere, at der er notifikationer til brugeren.
- Bruger-knappen giver adgang til funktionerne log ind/log ud og ændring af adgangskode (Fig 12 **D**).
- Dato - tidsangivelse (Fig 12 **E**).
- Brug knappen **Hjælp** (Fig 12 **F**) for at få adgang til online hjælp.
- Klik på ikonet  (Fig 12 **G**) for at oprette en problemrapport, der skal sendes til teknisk assistance for support. Se afsnit 1.5.2.

## 1.5 Hovedmenu

**Menu**-knappen (Fig 12 **A**) åbner følgende menu (Fig 13).

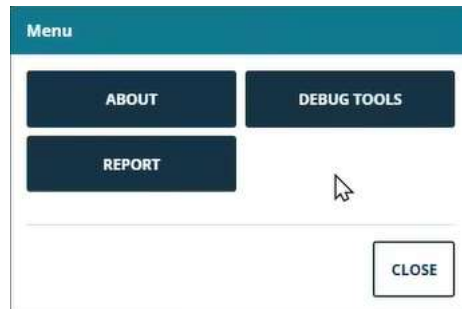

**Fig 13**

Knappen **Om** viser et vindue, der indeholder oplysninger om den installerede version af Digistat Suite og de relaterede licenser (se den specifikke dokumentation for mere information).

Selve mærkningen af produktet er Om-kassen, der vises på klientens arbejdsstationer, mobile enheder og webmoduler, hvor Digistat Suite er installeret.


Knappen **Fejlfindingsværktøjer** er forbeholdt systemadministratorer.

**Rapport** -knappen åbner et vindue med en liste over de tilgængelige rapporter (Fig 14).

**Rapport**-knappen findes både med og uden en valgt patient. Hvis en patient er valgt, er de tilgængelige rapporter dem, der er relateret til patientens hospitalsenhed (mærket som "Patient"). Hvis der ikke er valgt nogen patient, er de tilgængelige rapporter dem, der er relateret til den loggede brugers hospitalsenhed (mærket som "Generisk").



*Hver bruger er under konfigurationen tilknyttet en eller flere hospitalsenheder.*

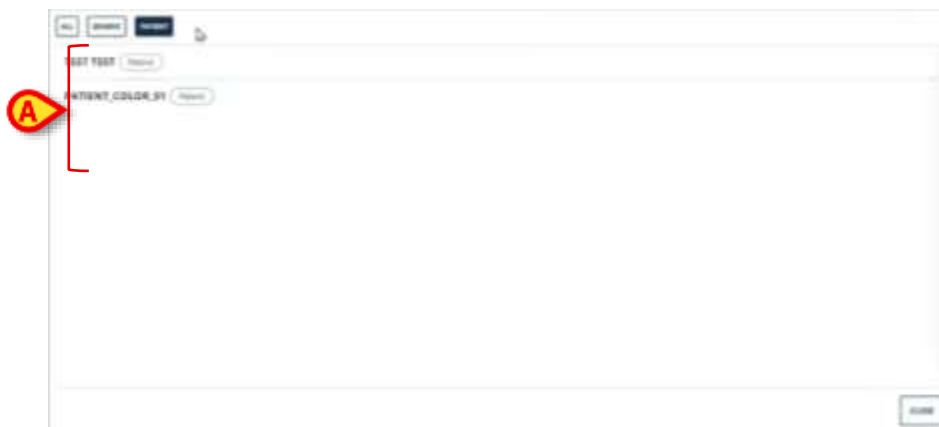

**Fig 14**

Hver række i vinduet refererer til en rapportudskrift.

- Klik på en række for at få vist et eksempel på udskriften.

Hver rapport kan mærkes som "Patientrapport" eller "Generisk rapport" (Fig 15 **A**).



Fig 15

Knapperne angivet i Fig 15 **B** gør det muligt at filtrere de rapporter, der vises i vinduet (kun "Generiske rapporter", kun "Patientrapporter" eller alle tilgængelige rapporter).

### 1.5.1 Ændr adgangskode

For at ændre brugeradgangskoden:

- Klik på knappen **Bruger** i Control Bar (Fig 16 **A**).



Fig 16

- Følgende menu åbnes (Fig 17).

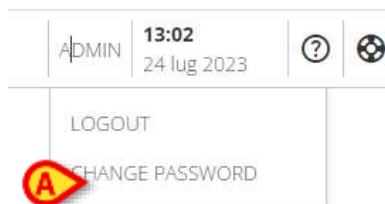


Fig 17

- Klik på **Skift adgangskode** (Fig 17 **A**). Følgende skærm åbnes (Fig 18).

## CHANGE PASSWORD



**Fig 18**

- Indtast den aktuelle adgangskode i feltet "GAMMEL adgangskode" (Fig 18 **A**)
- Indtast den nye adgangskode i feltet "Ny adgangskode" (Fig 18 **B**).
- Indtast den nye adgangskode igen i feltet "Bekræft ny adgangskode" (Fig 18 **C**).
- Klik på **Gem** (Fig 18 **D**).

### 1.5.2 Rapportering af brugerproblemer

Hvis den er til stede, giver ikonet  på Control Bar (Fig 19 **A**) mulighed for at oprette en "problem"-rapport og i dette tilfælde modtage teknisk support.



**Fig 19**



*Tilstedeværelsen af ikonet afhænger af systemindstillingen EnableUserIssueReporting. Der henvises til systemadministratorerne for mere information.*

For at gøre dette:

- Klik på  ikon (Fig 19 **A**). Følgende vindue åbnes (Fig 20).

Fig 20

- Indtast en beskrivelse af problemet i feltet "Beskrivelse" (Fig 20 **A**).
- Klik på **Send** (Fig 20 **B**).

Der gives en bekræftelse, inklusive et udstedelses-id-nummer.

## 1.6 Yderligere undermoduler

Undermodulerne beskrevet i dette afsnit kan være til stede eller ej, afhængigt af produktets konfiguration i sundhedsorganisationen. Hvert undermodul kan åbnes ved at klikke på et specifikt menupunkt i en rullemenu, der vises ved siden af patientknappen. De er patientrelaterede, dvs. de er kun tilgængelige, hvis en patient allerede er valgt.

### 1.6.1 CDSS-konfigurator

CDSS-konfigurator-undermodulet kan aktiveres ved konfiguration som en ekstra sektion af Control Bar Web. Sådan åbner du CDSS-konfigurator-undermodulet:

- Vælg den relevante patient.



*Se brugervejledningen til USR DNK Patient Explorer Web for patientvalgsproceduren (dokument USR DNK Patient Explorer Web).*

Efter patientvalg, hvis yderligere Control Bar-undermoduler er tilgængelige, vises ikonet



på patient-knappen (Fig 21 **A**).





Fig 21

- Klik på ikonet .

Et rullemenu vises med en liste over de tilgængelige yderligere undermoduler (Fig 22).

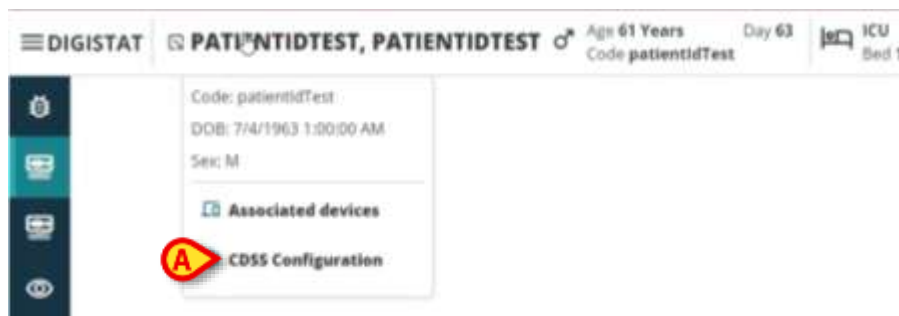


Fig 22

- Klik på "CDSS-konfiguration" (Fig 22 **A**).

Følgende vindue vises med en liste over de regler, der er knyttet til den aktuelt valgte patient (Fig 23).

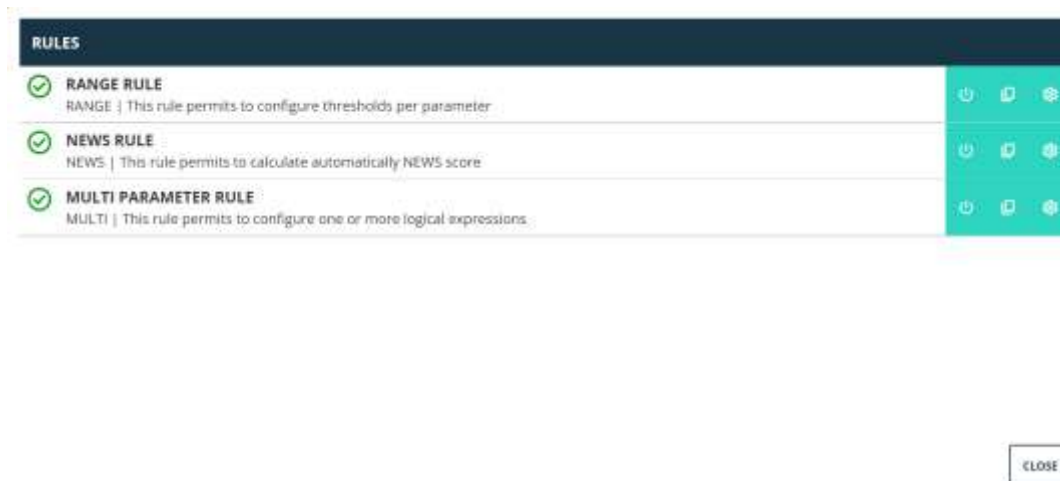


Fig 23

Se brugermanualen til CDSS Configurator for den komplette beskrivelse og instruktionerne til brug af dette undermodul (dokument USR DNK CDSS Web).

## 1.6.2 Identity

Identity-undermodulen kan aktiveres ved konfiguration som en ekstra sektion af Control Bar Web. Sådan åbner du Identity-undermodulen:

- Vælg den relevante patient.



*Se brugervejledningen til USR DNK Patient Explorer Web for patientvalgsproceduren (dokument: USR DNK Patient Explorer Web).*

Efter patientvalg, hvis yderligere Control Bar-undermoduler er tilgængelige, vises ikonet  på patient-knappen (Fig 24 **A**).



Fig 24

- Klik på ikonet .

Et rullemenu vises med en liste over de tilgængelige ekstra sektioner (Fig 25).


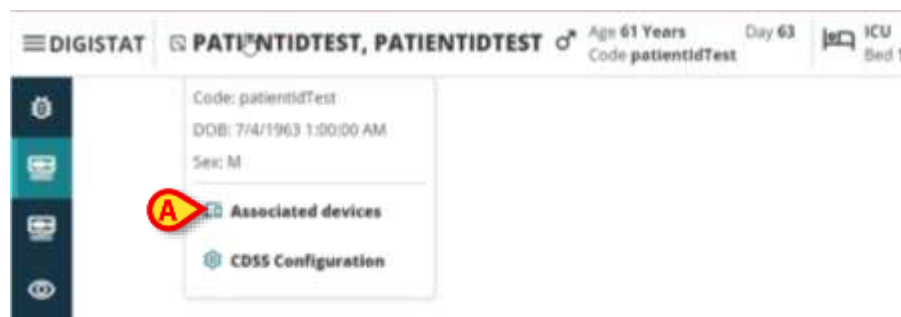


Fig 25

- Klik på "Tilknyttede enheder" (Fig 25 **A**).

Følgende vindue vises med en liste over de enheder, der er knyttet til den aktuelt valgte patient (Fig 26).

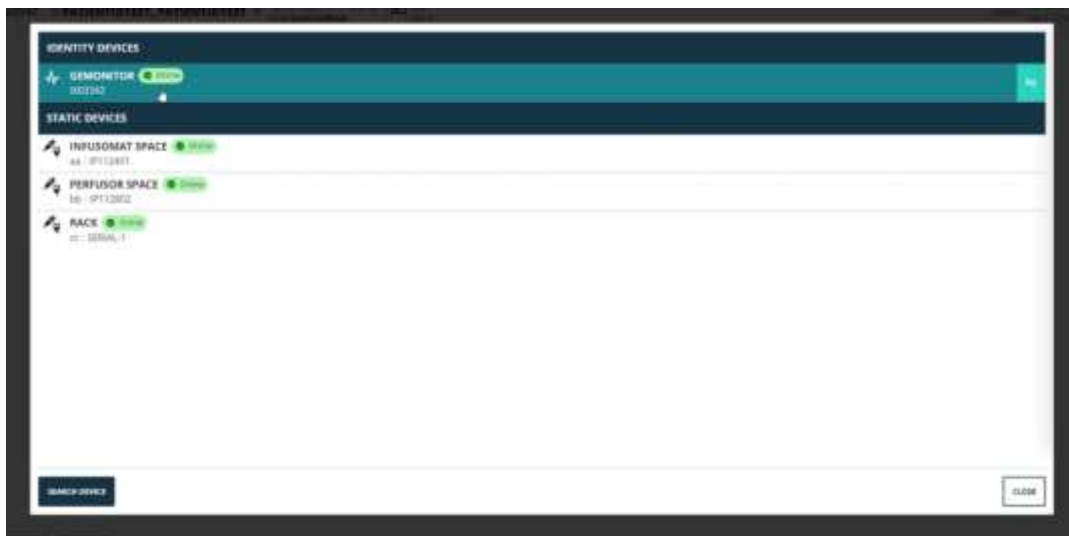

**Fig 26**

Se brugervejledningen til Identity for den komplette beskrivelse og instruktionerne til brug af dette undermodul (dokument USR DNK Identity Web).