



# Voice Notes Mobile Manual de Usuario

**Versión 2.0**

**14/07/2020**

# Contenido

<b>1. Voice Notes .....</b>	<b>3</b>
1.1 Introducción .....	3
1.2 Inicio de la aplicación .....	3
1.2.1 Acceso de usuarios .....	4
1.2.2 Notificaciones .....	4
1.3 Lista de pacientes .....	5
1.3.1 Encabezamiento de la lista de pacientes .....	5
1.3.2 Lista de camas .....	6
1.4 Lista de mensajes de voz .....	7
1.4.1 Escuchar los mensajes de voz.....	8
1.4.2 Borrar un mensaje de voz.....	9
1.4.3 Grabar un mensaje de voz.....	9

# 1. Voice Notes



Para obtener información general y detallada sobre el entorno del Producto y las instrucciones de uso del software *Mobile Launcher*, consulte los documentos específicos del Producto. La lectura y comprensión de estos documentos es obligatoria para un uso correcto y seguro del módulo *Voice Notes Mobile*, como se describe en este documento.

## 1.1 Introducción

El módulo *Voice Notes* permite grabar notas de voz asociadas a los pacientes, con temas seleccionables y un tiempo de vida configurable para el mensaje.

## 1.2 Inicio de la aplicación

Para iniciar el módulo *Voice Notes*:

- tocar la fila correspondiente en la pantalla del dispositivo de mano (Fig 1).



Fig 1

La pantalla de *Voice Notes* se muestra en la Fig 2.



Fig 2

Esta pantalla presenta una lista de todos los pacientes existentes en el dominio del dispositivo de mano.

## 1.2.1 Acceso de usuarios

Para utilizar **Voice Notes** se requiere un usuario válido que efectúe el acceso. Si ningún usuario ha efectuado el acceso, la fila correspondiente de la pantalla principal de Mobile Launcher será como la que se muestra en la Fig 3.

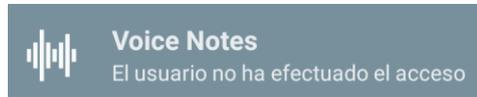


Fig 3

No podrán usar **Voice Notes** los usuarios que actualmente hayan efectuado el acceso en otro dispositivo. En esos casos, se efectuará automáticamente el registro de salida del usuario del dispositivo al que hayan efectuado el acceso y se visualizará una ventana emergente de notificación indicando la desconexión, como muestra la Fig 4.

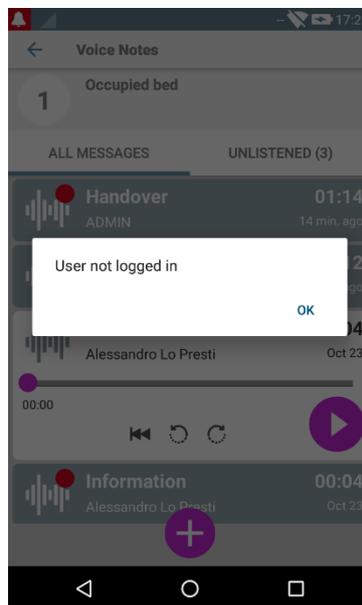


Fig 4

## 1.2.2 Notificaciones

En el momento del inicio de la aplicación, o cuando haya un nuevo mensaje, la aplicación muestra una notificación. Al hacer clic en la notificación, se abre la pantalla del paciente con la lista de mensajes (Fig 5).

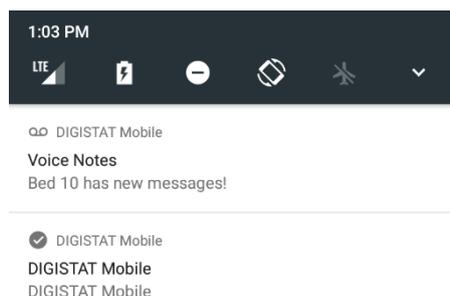


Fig 5



### 1.3.2 Lista de camas

Cada cama se representa con una celda (Fig 8).



Fig 8

La celda presenta la siguiente información:

- número de cama (Fig 8 **A**);
  - número de mensajes no escuchados (si los hubiera – Fig 8) **B**);
  - nombre del paciente en esa cama (Fig 8 **C**);
  - datos del paciente (si están disponibles: sexo, edad, fecha de nacimiento, ID de paciente - Fig 8 **D**).
- Tocar una celda para acceder a la lista de mensajes de voz para el paciente correspondiente.

## 1.4 Lista de mensajes de voz

La pantalla de lista de mensajes de voz está formada por dos áreas: un área de encabezamiento (Fig 9 **A**) y la lista de mensajes de voz (Fig 9 **B**).

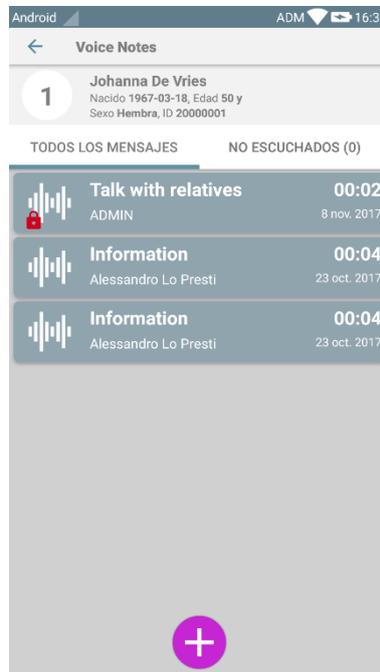


Fig 9

El área de encabezamiento muestra la siguiente información:

- número de cama;
- nombre del paciente en esa cama;
- datos del paciente (si están disponibles: sexo, edad, fecha de nacimiento, ID de paciente).

Los mensajes de voz se muestran en celdas debajo del área de encabezamiento. Cada celda representa un mensaje de voz. La Fig 10 muestra algunos ejemplos.

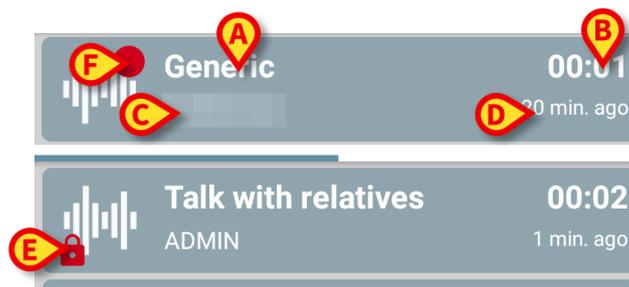


Fig 10

La celda de mensaje de voz muestra la siguiente información (Fig 10):

- **A**: asunto del mensaje;
- **B**: duración del mensaje;
- **C**: el autor, es decir, quién ha grabado el mensaje;
- **D**: hora de creación: cuándo ha sido grabado el mensaje de voz.

- **E:** el icono del candado (que se muestra opcionalmente) indica que el mensaje se ha marcado como privado. Significa que solo el autor puede ver esa entrada y escucharla
- **F:** el icono del círculo rojo (que se muestra opcionalmente) indica que el mensaje todavía no se ha escuchado).

### 1.4.1 Escuchar los mensajes de voz

Para escuchar un mensaje de voz

- tocar la celda del mensaje;

La celda se expande para mostrar los botones de control del reproductor de audio (Fig 11 y Fig 12).



Fig 11 – mensaje de voz no escuchado

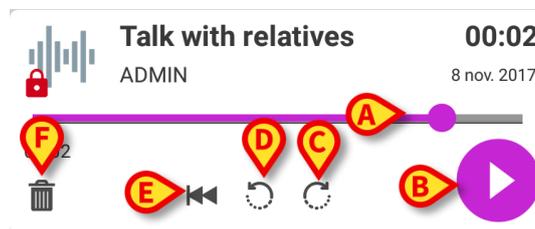


Fig 12 - mensaje privado, eliminable por el autor

En la siguiente se detallan los botones de control:

- barra de búsqueda (Fig 11 y Fig 12 **A**): tocar el dedo y arrastrar hacia la izquierda o la derecha para establecer el punto de avance de la reproducción;
- reproducir el mensaje (Fig 11 y Fig 12 **B**);
- saltar 10 segundos adelante (Fig 11 y Fig 12 **C**);
- saltar 10 segundos atrás (Fig 11 y Fig 12 **D**);
- regresar al comienzo (Fig 11 y Fig 12 **E**);
- borrar el mensaje (mostrado opcionalmente - Fig 12 **F**).

Un icono de confirmación  (en el mismo punto del símbolo Fig 12 **F**), si lo hubiera, permite marcar la nota como “escuchada”. Tocar el icono para marcar la nota como “escuchada”;

- se permite saltar hacia adelante en el mensaje solo hasta la última posición escuchada. La parte del mensaje escuchada se ilumina en la barra de búsqueda con una línea gris más gruesa;
- Al hacer clic en una celda de mensaje, en la vista expandida, la aplicación automáticamente establece el punto de inicio de la barra de búsqueda del reproductor de audio y la última posición escuchada.

## 1.4.2 Borrar un mensaje de voz

Los mensajes de voz se borran automáticamente una vez completado su tiempo de vida. Los mensajes borrados no se pueden recuperar. Solamente al autor se le permite borrar sus mensajes antes de que se cumpla el período de caducidad previsto; para ello debe hacer clic en el icono , situado en la vista expandida del mensaje (ver Fig 12). Esta operación requiere confirmación (Fig 13):

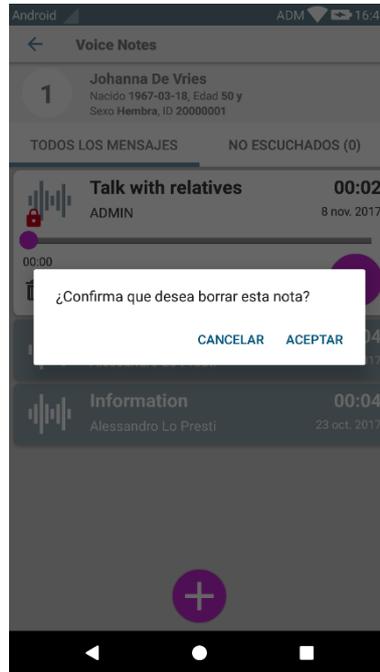



Fig 13

Si un usuario en la red está escuchando un mensaje en el momento en que está siendo borrado, se mostrará un mensaje de alerta.

## 1.4.3 Grabar un mensaje de voz


Para grabar una nota de voz, seleccionar al paciente en la pantalla Lista de Pacientes (Fig 6). Se mostrará la siguiente pantalla (Fig 14), con una lista de las notas actualmente existentes para el paciente seleccionado (en la Fig 14 no hay notas).

- Tocar el  icono situado al pie de página, como se indica en la Fig 14:

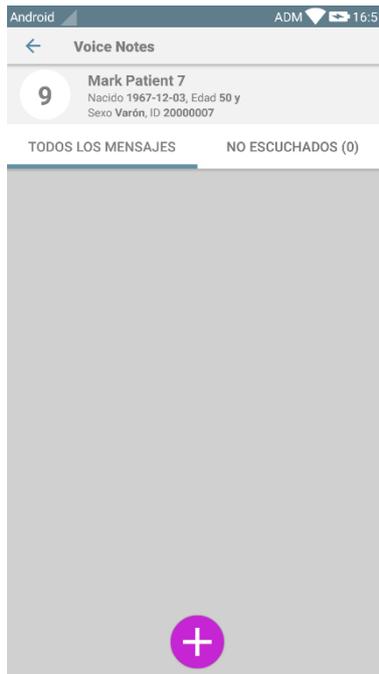


**Fig 14**

La pantalla de grabación se abrirá como se muestra en la Fig 15:

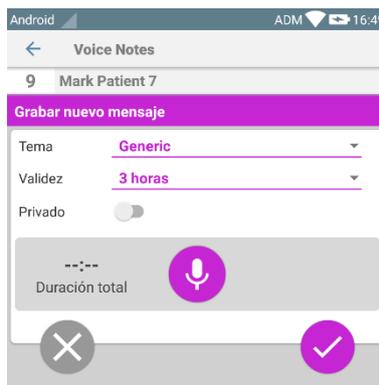


**Fig 15**

Antes de grabar una nota, se puede seleccionar el tema de la nota en una lista predefinida (Fig 16):

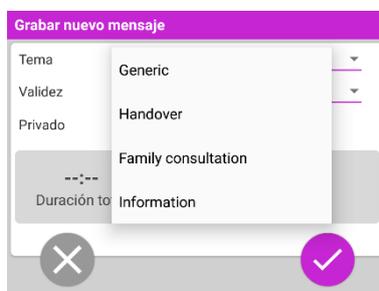

**Fig 16**


También, antes de grabar una nota, se puede definir su tiempo de vida. Los mensajes se borran automáticamente una vez superado el tiempo de vida aquí especificado (Fig 17).

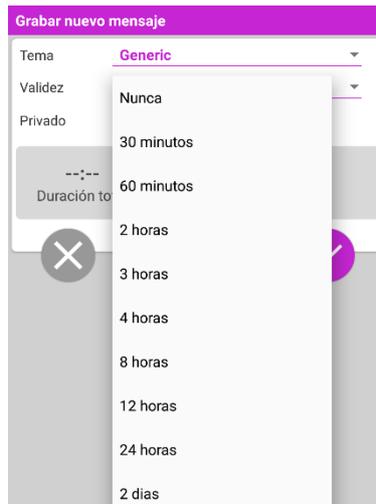

**Fig 17**

Para grabar un nuevo mensaje de voz:

- mantener pulsado el botón  como se indica en la Fig 18:

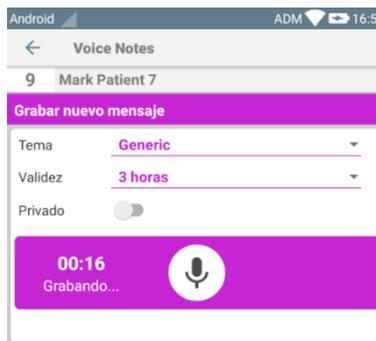


**Fig 18**

El color del botón durante la grabación es blanco. El tiempo de grabación se muestra al lado del botón. La grabación se detiene cuando se suelta el botón (Fig 19). La máxima duración predefinida son 5 minutos (valor configurable). Si es necesario, se puede seguir grabando; para ello solo hay que pulsar de nuevo el botón de grabación.




**Fig 19**

Una vez completada la grabación, se puede guardar el mensaje haciendo clic en el botón  (Fig 20 **A**) o anular la operación y descartar el mensaje haciendo clic en el botón  (Fig 20 **B**).

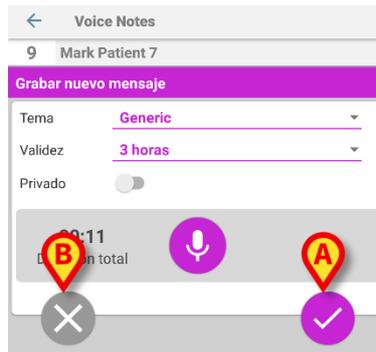


**Fig 20**

Después de guardar, se muestra de nuevo la pantalla de lista de mensajes, incluyendo la última nota grabada (Fig 21).

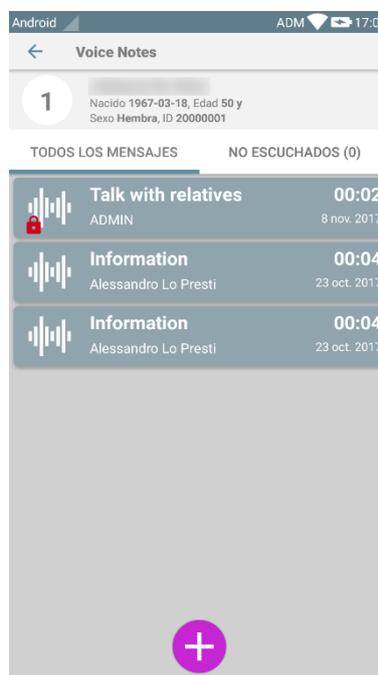

**Fig 21**

Cuando se guarda un mensaje, se muestra una notificación en todos los demás dispositivos de mano que tienen la misma cama en su dominio (Fig 22).

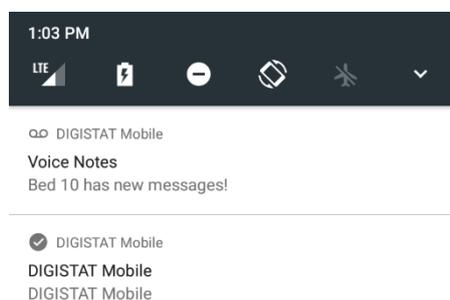

**Fig 22**

La misma notificación se muestra también en el momento de iniciar la aplicación. Tocar la notificación para visualizar la pantalla de lista de mensajes (Fig 22).