



Control Bar Web Használati utasítás

6.0-s verzió

10/3/2025

Tartalom

1. Control Bar Web.....	3
1.1 Control Bar Web indítása	3
1.2 Felhasználói bejelentkezés	4
1.2.1 Automatikus bejelentkezés	6
1.2.2 Kijelentkezés és maradás	6
1.3 Munkaterület.....	7
1.3.1 Modul kiválasztása	8
1.4 Control Bar (vezérlősáv).....	9
1.5 Főmenü	10
1.5.1 Jelszó módosítása	11
1.5.2 Felhasználói problémabejelentés	12
1.6 További almodulok	12
1.6.1 CDSS konfigurátor	13
1.6.2 Identity	14

1. Control Bar Web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról további információkat talál: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs (a telepített moduloktól függően – Digistat Suite EU esetén) vagy USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA esetén)* . A jelen dokumentumban leírt Control Bar Web megfelelő és biztonságos használatához kötelező a vonatkozó dokumentumok ismerete és megértése.

1.1 Control Bar Web indítása

Control Bar Web elindítása:

- Írja be a kívánt címet a böngésző címsorába.

Megnyílik a következő oldal:

Ábra 1

1.2 Felhasználói bejelentkezés

A rendszer funkcióinak engedélyezéséhez szükség van a felhasználó bejelentkezésére.



Ábra 2

Bejelentkezéshez:

- Írja be felhasználónevét a Username vagyis a „Felhasználónév” mezőbe (Ábra 2 **A**)
- Írja be jelszavát a Password vagyis „Jelszó” mezőbe (Ábra 2 **B**)
- Kattintson a **Login** vagyis Bejelentkezés gombra (Ábra 2 **C**)

Ezáltal a felhasználó be lesz jelentkezve.



A felhasználónevet és a jelszót a rendszergazda állítja ki. Ha nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem jogosult a program használatára.



Lehetőség van a Digistat Suite konfigurálására, hogy lehetővé tegye a bejelentkezést egy külső rendszeren keresztül („Single Sign On”). Ezekben az esetekben a bejelentkezési képernyőn egy erre a célra szolgáló gomb jelenik meg.

A rendszer elérése után a Control Bar (vezérlősáv) **User** gombján megjelenik a bejelentkezett felhasználónak megfelelő mozaikszó (a mozaikszó: ADMIN Ábra 3 **A**).



Ábra 3


A programon végrehajtott összes műveletért az a User (felhasználó) felelős, akinek a hitelesítő adatai a User (felhasználó) gombon megjelennek.



Megjegyzés: a telepítés konfigurációjától függően lehetnek kivételek (pl. automatikus bejelentkezés vagy „Kijelentkezés és maradás” funkciók – 1.1.1 bekezdés 1.1.2).

A rendszer nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében erősen ajánlott kijelentkezni, mielőtt elhagyja a Product munkahálózatot.


A kijelentkezéshez kattintson a munkamenet közben a **User** (felhasználó) gombra. Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 4).

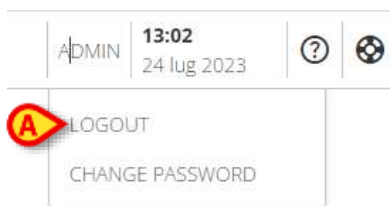

Ábra 4

- Kattintson a **LOGOUT** (Ábra 4 A).

Felhasználói megerősítés szükséges. A megerősítés után a felhasználó ki va jelentkezve. A bejelentkezéshez kattintson ismét a **User** (felhasználó) gombra. A Ábra 2 látható képernyő ismét megjelenik.

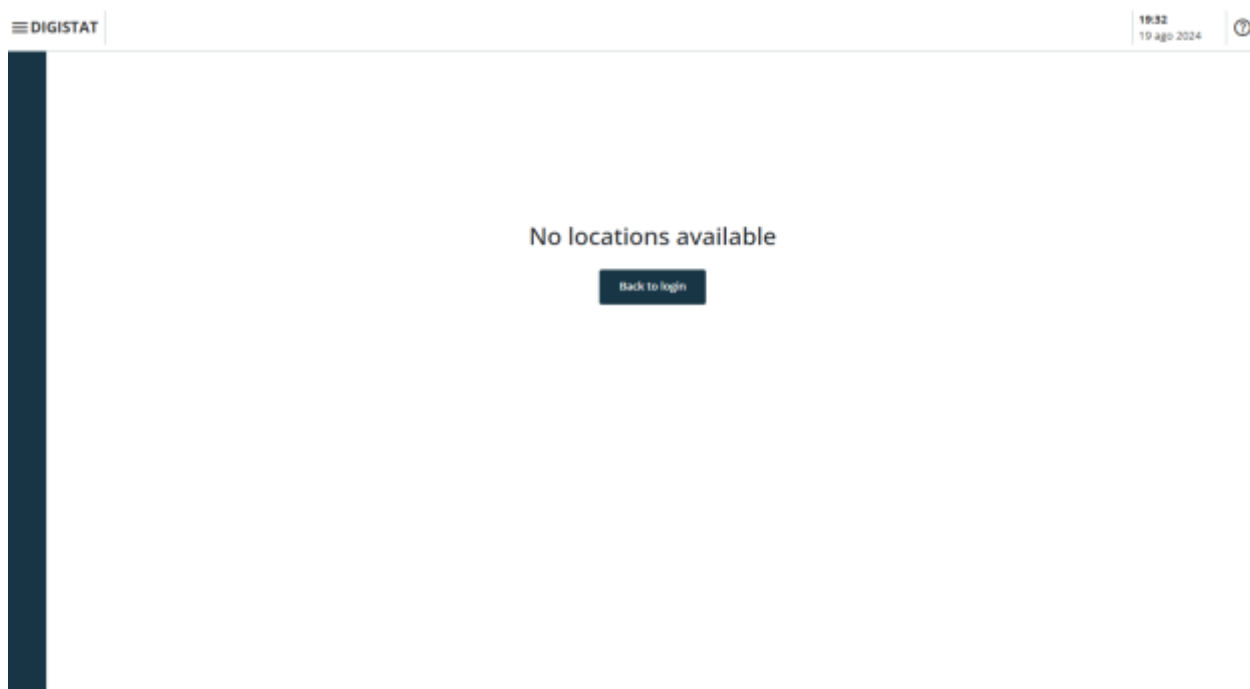

Ábra 5

Ha a felhasználónak nincs korábban hozzárendelt helye (a felhasználó és a hely közötti kapcsolat beállítását lásd a *CGF ENG Digistat Suite MDR* útmutatójában), akkor nem lehet bejelentkezni a modulba. Ebben az esetben a „Nincs elérhető hely” üzenet jelenik meg (Ábra 5). Ezenkívül egy **Vissza a bejelentkezéshez** gomb segítségével visszatérhet a bejelentkezési oldalra, és új felhasználóval vagy ugyanazzal a felhasználóval próbálhatja meg újra a bejelentkezést, miután a felhasználó és a helyszín összekapcsolása megtörtént.



A „Hely” egy Digistat beállítási egység, amely az egészségügyi struktúra egy adott területének felel meg. Ez lehet például egy osztály, egy kórterem, egy műtőblokk stb. az egészségügyi struktúra követelményeitől függően. További információért forduljon a rendszergazdákhoz.


1.2.1 Automatikus bejelentkezés

A Digistat Web úgy is konfigurálható, hogy lehetővé tegye a felhasználó automatikus bejelentkezését. Ez azt jelenti, hogy amikor a Digistat Web elindul, a konfigurált felhasználó már be van jelentkezve. Ebben az esetben néhány konfigurált funkció azonnal elérhetővé válik, mielőtt bármilyen bejelentkezési művelet végrehajtásra kerülne.

Az automatikus bejelentkezés engedélyezéséhez be kell állítani az „AutoLoginUsername” rendszeropciót. További információkért tekintse meg a DSO HU System Options (Rendszeropciók) dokumentumot.


Ha az automatikus bejelentkezés aktív, a felhasználó továbbra is bejelentkezhet a személyes hitelesítő adataival. Ehhez:

- Kattintson a **Felhasználó** gombra (Ábra 6 A).

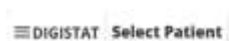

Ábra 6

A következő menü nyílik meg (Ábra 7).

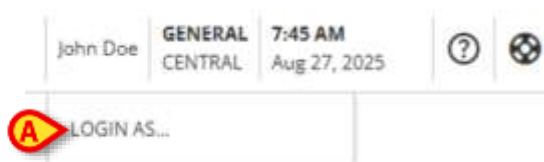

Ábra 7

- Kattintson a **BEJELENTKEZÉS MINT...** lehetőségre (Ábra 7 A).

Megjelenik a Bejelentkezés képernyő (Ábra 2). Jelentkezzen be a(z) 1.2 bekezdésben leírtak szerint.



Ha az „AutoLoginUsername” rendszerbeállítás konfigurálva van, akkor az „Aktuális felhasználó kijelentkeztetése” funkció (a(z) 1.2.2 bekezdésben leírtak szerint) letiltásra kerül.



Az „Automatikus bejelentkezés” és a „Kijelentkezés és maradás” funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az alkalmazás a „Digistat Web Browserben” fut. További információkért kérjük, olvassa el a Digistat Suite telepítési kézikönyvét (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Kijelentkezés és maradás

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a kijelentkezést, miközben a konfiguráció során megadott felhasználónévvel bejelentkezve marad. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó kijelentkezése után egy hagyományos felhasználó bejelentkezve marad. A funkció aktiválásához konfigurálni kell a „LogoutAndRemainUsername” rendszeropciót. További információkért tekintse meg a DSO HU System Options (Rendszeropciók) dokumentumot. Ha

ez a funkció elérhető, akkor az **Aktuális felhasználó kijelentkeztetése** opció a „Felhasználó” menüben (Ábra 9 **A**) érhető el.

„Kijelentkezés és maradás”

- Kattintson a **Felhasználó** gombra (Ábra 8 **A**).


Ábra 8
A következő menü nyílik meg (Ábra 9).



Ábra 9

- Kattintson az **AKTUÁLIS FELHASZNÁLÓ KIJELENTKEZTETÉSE** gombra (Ábra 9 **A**).

Az aktuális felhasználó hitelesítő adatai eltűnnek a **Felhasználó** gombról, a hagyományos konfigurált felhasználó hitelesítő adatai pedig megjelennek.

1.3 Munkaterület

A felhasználó bejelentkezése után az oldalsó sávban megjelennek az elérhető Digistat Web moduloknak megfelelő ikonok (Ábra 10 **A**). A (Ábra 10 **B**) munkaterület az oldalsó sávban kiválasztott modul kijelzőit és funkcióit jeleníti meg.



Ábra 10

A Control Bar-t (vezérlőszávot) (Ábra 10 **C**) a következő 1.4 szakaszokban és pontokban ismertetjük.


A kiválasztott modul ki van emelve.

1.3.1 Modul kiválasztása

Modul kiválasztásához:

- Kattintson a megfelelő ikonra az oldalsávon.

Az ikon ki lesz emelve, és a modul funkciói láthatóvá válnak a Work Area-n (munkaterületen) belül.

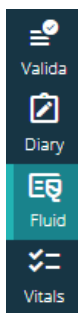

Ábra 11

1.4 Control Bar (vezérlősáv)

A képernyő felső részén megjelenő control bar (vezérlősáv) minden modulban azonos. Főbb jellemzőit az alábbiakban soroljuk fel:



Ábra 12

- A **Menu** (menü) gomb (Ábra 12 **A**) megnyitja a Control Bar Web főmenüt. Lásd a 1.5 részt.
- A **Patient** (páciens) gomb (Ábra 12 **B**). Ha nincs kiválasztott páciens, erre a gombra kattintva elindítható a páciensválasztási eljárás. A páciens kiválasztása után megjelenik a páciens neve és fő adatai. Felvett páciensek esetében az ágy száma és az osztály neve is megjelenik. Ha a kiválasztott páciens számára a Vezérlőpult webes funkciói rendelkezésre állnak, akkor a páciens gombra kattintva megjelenik egy legördülő menü, amely lehetővé teszi a funkciók elérését (további információkért lásd a 1.6 szakaszt). Ha egy lakat ikon -  - jelenik meg a páciens neve mellett, az azt jelenti, hogy bizonyos páciensadatok/funkciók zárolva vannak az adott páciens számára.




A páciens kiválasztása általában a Digistat Patient Explorer webmodulban történik. A pácienskezelési funkciókkal kapcsolatos utasításokat lásd a Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvében (USR HU Patient Explorer Web dokumentum). A Patient Explorer Web helyett más modulok is konfigurálhatók a páciens kiválasztásához. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

- A Ábra 12 **C**-ben jelzett terület arra használható, hogy a felhasználó számára jelezze, hogy értesítések érkeztek.
- A felhasználói gomb biztosítja a be- és kijelentkezést, valamint a jelszóváltoztatás funkciót (Ábra 12 **D**).
- Dátum-idő jelzés (Ábra 12 **E**).
- Használja a **Help** (súgó) gombot (Ábra 12 **F**) az online súgó eléréséhez.
- A  (Ábra 12 **G**) ikonra kattintva létrehozhat egy problémajelentést, amelyet elküldhet a technikai ügyfélszolgálatnak támogatás céljából. Lásd a 1.5.2 részt.

1.5 Főmenü

A **Menu** (menü) gomb (Ábra 12 **A**) megnyitja a következő menüt (Ábra 13).

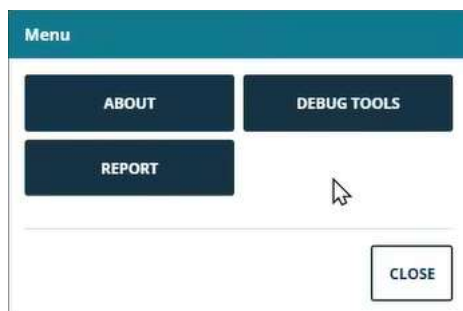

Ábra 13

Az **About** (tudnivalók) gomb megjeleníti a telepített Digistat Suite verzióra és a kapcsolódó licencekre vonatkozó információkat tartalmazó ablakot (további információkért lásd az adott dokumentációt).


A termék konkrét címkézése az About Box amely az ügyfelek munkaállomásain, mobil eszközein és webes moduljain jelenik meg, ahol a Digistat Suite telepítve van.

A **Debug Tools** (hibakereső eszközök) gomb a rendszergazdák számára van fenntartva.

A **Reports** (Jelentések) gomb megnyit egy ablakot, amely felsorolja a rendelkezésre álló jelentéseket (Ábra 14). A **Reports** (Jelentések) gomb egy beteg kijelölésével és anélkül is elérhető. Ha ki van választva egy beteg, akkor azok a jelentések állnak rendelkezésre, amelyek a beteg kórházi egységéhez kapcsolódnak („Beteg” címkével ellátva). Ha nincs kiválasztva beteg, akkor azok a jelentések állnak rendelkezésre, amelyek a bejelentkezett felhasználó kórházi egységéhez kapcsolódnak („Általános” címkével ellátva).



A konfiguráció során minden felhasználó egy vagy több kórházi egységhez kerül hozzárendelésre.

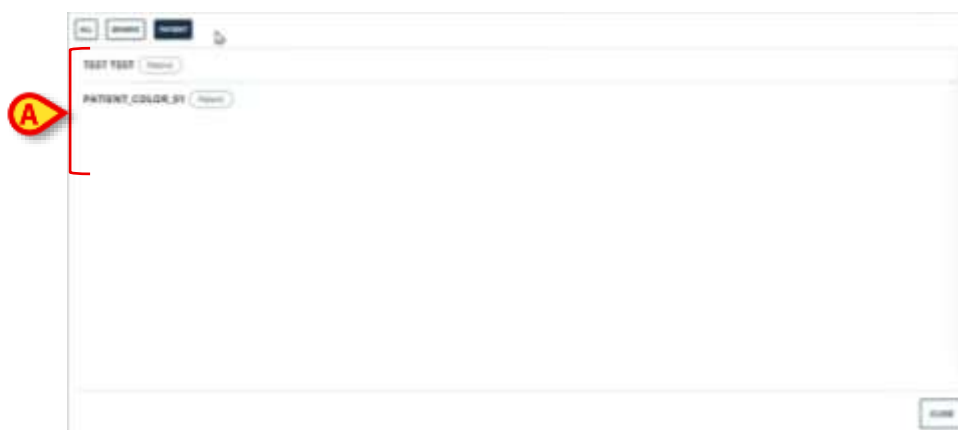

Ábra 14

Az ablak minden sora egy nyomtatott jelentésre utal.

- Kattintson egy sorra a nyomtatási előnézet megjelenítéséhez.

Minden jelentés megjelölhető a „Betegjelentés” vagy az „Általános jelentés” címkével (Ábra 15 **A**).



Ábra 15

A Ábra 15 **B** pontban jelzett gombokkal szűrhetők az ablakban megjelenített jelentések (csak „Általános jelentések”, csak „Betegjelentések” vagy az összes rendelkezésre álló jelentés).

1.5.1 Jelszó módosítása

Felhasználói jelszó módosítása

- Kattintson a **User** (felhasználó) gombra a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 16 **A**).



Ábra 16

- Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 17).



Ábra 17

- Kattintson a: **Change Password** (Jelszó módosítása) (Ábra 17 **A**). Megnyílik a következő képernyő (Ábra 18):



Ábra 18

- Írja be az aktuális jelszót az "OLD password" (régi jelszó) mezőbe (Ábra 18 **A**).
- Írja be az új jelszót a „New password” (új jelszó) mezőbe (Ábra 18 **B**).

- Írja be újra az új jelszót az „Confirm new password” (Új jelszó megerősítése) mezőbe (Ábra 18 C).
- Kattintson ide: **Save** (Mentés) (Ábra 18 D).

1.5.2 Felhasználói problémabejelentés

Ha jelen van, a  ikon a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 19 A) lehetővé teszi egy „probléma” jelentés létrehozását, és adott esetben technikai támogatás igénylését.



Ábra 19

	<i>Az ikon jelenléte az EnableUserIssueReporting System Option-tól (rendszerbeállítástól) függ. További információkért forduljon a rendszergazdákhhoz.</i>
---	--

Ehhez:

- Kattintson a  ikonra (Ábra 19 A). Megnyílik a következő ablak (Ábra 20).



Ábra 20

- Írja be a probléma leírását a "Description" (leírás) mezőbe (Ábra 20 A).
- Kattintson a **Send** (küldés) gombra (Ábra 20 B).

A visszaigazolás tartalmazza a probléma azonosító számát.

1.6 További almodulok

Az ebben a szakaszban leírt almodulok a Termék konfigurációjától függően jelen lehetnek vagy nem, az egészségügyi szervezetben. Az egyes almodulok a páciens gomb mellett megjelenő legördülő menü egy adott menüpontjára kattintva nyithatók meg. Ezek

pácienshez kötöttek, azaz csak akkor állnak rendelkezésre, ha egy páciens már ki van választva.

1.6.1 CDSS konfigurátor

A CDSS Configurator almodul a Control Bar Web kiegészítő részeként történő konfigurálással engedélyezhető. A CDSS konfigurátor almodul megnyitása:

- Válassza ki a megfelelő páciens.



A páciens kiválasztásához lásd a USR HUN Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét (USR HUN Patient Explorer Web dokumentum).


A páciens kiválasztása után, ha további Control Bar almodulok állnak rendelkezésre, az ikon megjelenik a páciensgombon (Ábra 21 A).



Ábra 21

- Kattintson az  ikonra.


Megjelenik egy legördülő ablak, amely felsorolja a rendelkezésre álló további almodulokat (Ábra 22).

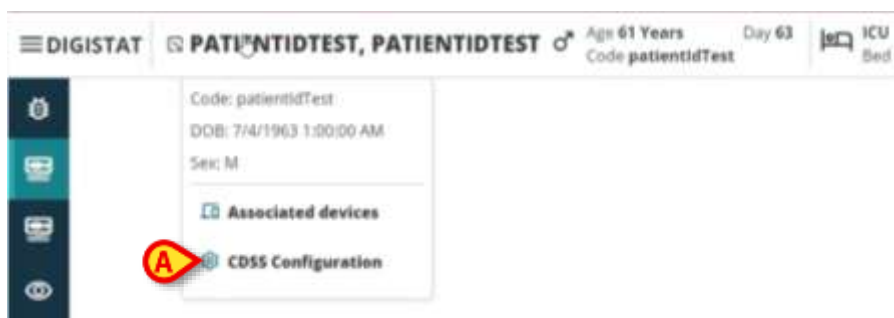

Ábra 22

- Kattintson a „CDSS konfiguráció” elemre (Ábra 22A).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshezÁbra 23 tartozó szabályokat ().

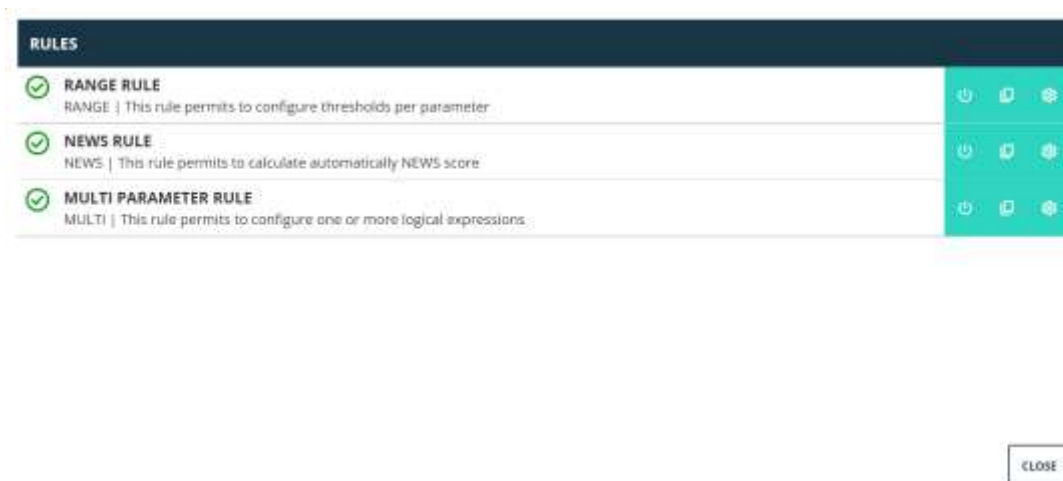

Ábra 23

Lásd a CDSS Configurator felhasználói kézikönyvét az almodul teljes leírásáért és használati utasításáért (USR HUN CDSS Web dokumentum).

1.6.2 Identity

Az Identity almodul a Control Bar Web kiegészítő részeként történő konfigurálással engedélyezhető. Az Identity almodul megnyitása:

- Válassza ki a megfelelő páciens.



Tekintse meg a USR HUN Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét a páciens kiválasztásához (USR HUN Patient Explorer Web dokumentum).


A páciens kiválasztása után, ha további Control Bar almodulok állnak rendelkezésre, az ikon megjelenik a páciensgombon (Ábra 24 A).



Ábra 24

- Kattintson az ikonra.


Megjelenik egy legördülő ablak, amely felsorolja a rendelkezésre álló további szakaszokat (Ábra 25).

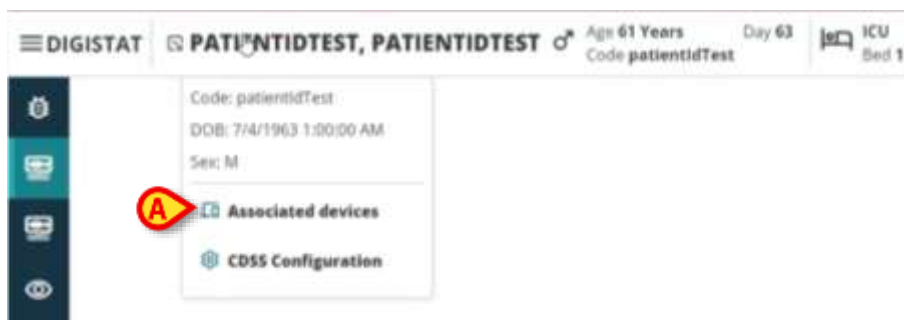

Ábra 25

- Kattintson a „Kapcsolódó eszközök” elemre (Ábra 25 **A**).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshez társított eszközöket (Ábra 26).

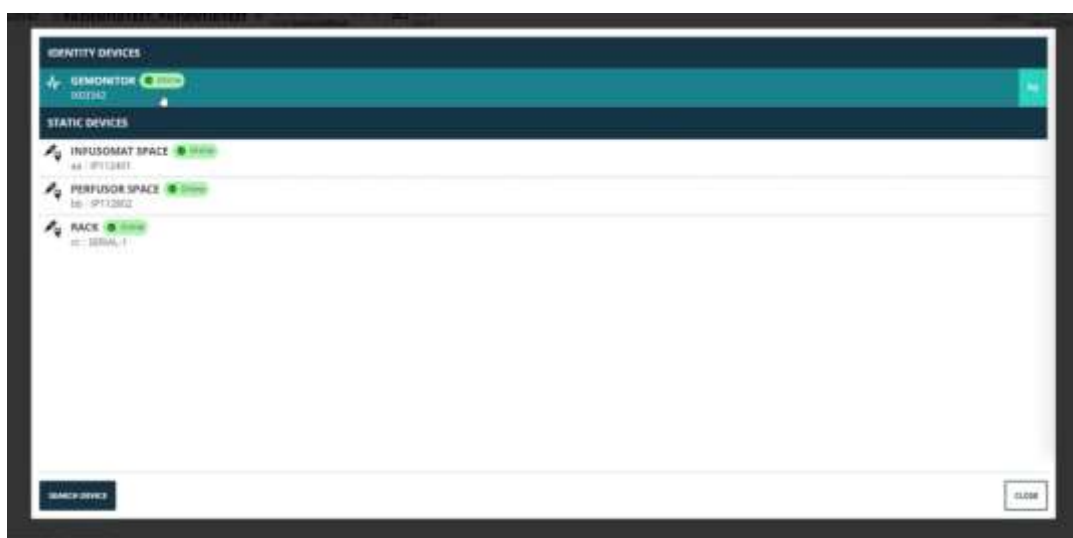

Ábra 26

Lásd az Identity felhasználói kézikönyvben az almodul teljes leírását és használati utasításait (USR HUN Identity Web dokumentum).