



Patient File

Használati utasítás

3.0 verzió

8/22/2025

Tartalom

1. Bevezetés.....	3
1.1. Indítás Patient File	3
1.2. Beteg kiválasztása	3
2. Patient File felépítése	4
2.1. Navigációs panel	4
2.2. Adatterület	6
2.3. Parancssor.....	7
3. Adatbevitel	8
3.1. Adatbeviteli példák.....	9
3.1.1. Legördülő listák.....	10
3.1.2. Többszörös választási lehetőség	11
3.1.3. Társkapcsolódó mezők.....	11
3.1.4. Szabadszöveges mezők.....	12
3.1.5. Kiválasztó ablak	12
3.1.6. Codefinder előhívása	13
3.1.7. Ápolói pontszámok.....	15
3.1.8. Letiltott mezők.....	15
3.2. Előzmények	16
3.3. Testvéroldalak.....	17
3.4. Dedikált munkafolyamatok	20
3.4.1. „Ágycsere” és „Elkülönítés” parancsikonok.....	20
3.4.2. Allergia/intolerancia	22
3.4.3. Sérülések/Bőrelváltozások	25
3.4.4. Klinikai elbocsátás	30



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról szóló további információkért lásd: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén). A megfelelő dokumentum ismerete és megértése kötelező a jelen dokumentumban leírt „Patient File” helyes és biztonságos használatához.

1. Bevezetés

A Digistat Patient File teljes digitális betegdokumentációt biztosít egy könnyen navigálható webes környezetben. A betegek információi intuitív módon vannak rendszerezve általános területeken és speciális részekben, amelyek megfelelnek az osztály klinikai munkafolyamatainak.



Ez a modul a *Digistat Docs* része, amely a *Digistat Suite* nem orvosi eszköz terméke. A modulban végzett munka előtt feltétlenül olvassa el a *Digistat Docs* dokumentumot a rendeltetésszerű használatáról.

1.1. Indítás Patient File

A Digistat Patient File elindítása:

- Kattintson a(z)  ikonra az oldalsávon.

Megjelenik egy képernyő, amely az aktuálisan kiválasztott páciens adatait mutatja. Ha jelenleg nincs páciens kiválasztva, egy üres képernyő jelenik meg, amelyhez ki kell választani egy páciens. Lásd a(z) 1.2 részt.

1.2. Beteg kiválasztása

A páciens kiválasztásához

- Kattintson az A Ábra 1 jelzés szerinti **Select Patient** gombra.



Ábra 1



Megnyílik a Patient Explorer webmodul. Tekintse meg a Digistat® Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét (*USR HUN Patient Explorer Web*) a betegkezelési funkciókkal kapcsolatos további információkért.

A páciens kiválasztásakor a modul megjeleníti a kiválasztott páciens adatait. Az alapértelmezés szerint megjelenített oldal a „Személyes adatok” űrlap.



A *Patient Explorer Web* helyett más modulok is konfigurálhatók a betegek kiválasztásához, az egészségügyi szervezet döntéseitől függően. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

2. Patient File felépítése

Minden oldal három fő részből áll:

- Oldalsó navigációs panel, amely lehetővé teszi az egyes oldalak gyors elérését (Ábra 2 **A**).
- A kontextuális adatokat megjelenítő adatterület (Ábra 2 **B**).
- Egy parancssor, amely lehetővé teszi az oldal tartalmának kezelését (Ábra 2 **C**).

The screenshot displays the 'Patient File' interface. On the left is a 'Patient' navigation panel with sections: 'Personal Details' (highlighted), 'Isolations', 'Patient Assessment' (with sub-items: Admission, Allergies/Intolerance, Injuries/Skin Lesions, Infections, Nursing Handover ABCDE, Daily Physical Examination, Procedures), and 'Discharge' (with sub-item: Clinical Discharge). The main area is titled 'Personal Details' and contains a 'Registration Details' form with fields for Patient ID, Family Name (Dell Tobasco), Given Name (Dustin), Tax Code, Gender (Female), Date of Birth (05/20/2002), Birth Place City, Birth Country, Street, City, Zip or Postal Code, State or Province, and Country. There are 'ISOLATION' and 'CHANGE BED' buttons. At the bottom is a command bar with 'NEW', 'EDIT', 'SAVE', 'DELETE', and 'CANCEL' buttons, and an 'ascom' logo.

A Navigációs panel

B Adatterület

C Parancssor

Ábra 2

2.1. Navigációs panel

A bal oldalon egy navigációs panel található, amely felsorolja az összes elérhető oldalt (Ábra 2 **A**, Ábra 3).

This is a close-up of the 'Patient' navigation panel. It shows a list of items under the 'Patient' header: 'Personal Details' (highlighted in teal), 'Isolations', 'Patient Assessment' (expanded to show: Admission, Anamnesis, Physical Examination, Allergies/Intolerance), 'Daily Activities' (expanded to show: Injuries/Skin Lesions, Infections, Nursing Handover ABCDE, Daily Physical Examination, Procedures), and 'Discharge' (expanded to show: Clinical Discharge).

Ábra 3

A különböző oldalak 5 részre vannak osztva: Beteg, Értékelés, Napi tevékenységek, Elbocsátás, Segédszolgáltatások.

Minden rész különböző űrlapokat tartalmaz, amelyek mindegyike egy adott témának szól.

Beteg → Személyes adatok, elkülönítés.

Klinikai értékelés → Felvétel, anamnézis, fizikális vizsgálat, allergia/intolerancia.

Napi tevékenységek → Sérülések/bőrelváltozások, fertőzések, ápolás átadása-átvétele, napi vizsgálat, eljárások.


Elbocsátás → Klinikai elbocsátás, ápolási elbocsátás.

Segédprogramok → Dokumentumok nyomtatása.



A konfiguráció és/vagy a felhasználói engedélyek miatt nem mindig érhető el minden rész/oldal. Ez a kézikönyv egy teljes standard konfigurációt ír le az összes engedéllyel rendelkező felhasználó számára.

A részek nevére kattintva összezsukhatók/kibonthatók a kapcsolódó oldalak. Lásd pl. Ábra 4.

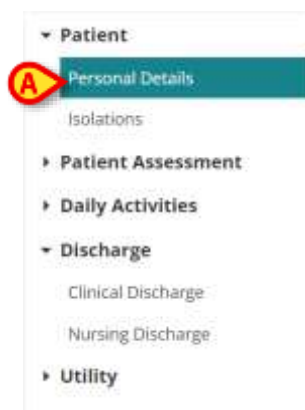

Ábra 4

Az aktuálisan kiválasztott oldal ki van jelölve (Ábra 4 **A**).

- Kattintson az oldal nevére a kiválasztásához, és közvetlenül egy adott tartalomhoz navigáljon.

A könnyebb navigáció érdekében az oldal fejlécében egy vissza gomb jelenik meg azoknál a rekordoknál, amelyek egy adott űrlaphoz kapcsolódó alrekordok. Példaként említhetők a „Hozzájárulások” (Ábra 5) konkrét rekordjai.



Ábra 5

Ha a fejlécben megjelenik az Ábra 5 **A** jelzéssel ellátott balra mutató nyíl,

- A magasabb szintű főlapra való visszatéréshez kattintson rá.

2.2. Adatterület

Minden oldal egy adott témához kapcsolódó adatokat tartalmaz. Különböző eszközök, adatbeviteli módok és adatmegjelenítési módok állnak rendelkezésre, attól függően, hogy milyen típusú adatokat adott meg a kontextusban. Ezeket a(z) 3.1 részben ismertetjük. Például a „Személyes adatok” oldalon megjelennek a páciens személyes adatai, valamint az esetleges korábbi felvételekkel kapcsolatos adatok (Ábra 6).

Ábra 6

Minden oldalon az adatok témakörök szerint csoportosítva vannak. Minden „témaszekciót” egy címsor határoz meg (Ábra 6 **A**).

- Kattintson a fejlécre egy szakasz kibontásához/összecsukásához.

Itt Ábra 7 például a „Regisztrációs adatok” rész össze van csukva (Ábra 7 **A**).

Ábra 7

- Használja a Ábra 7 **B** részben jelzett gombokat minden rész bővítéséhez (↑) vagy összecsukásához (↓).

Egy oldalon speciális gombok állhatnak rendelkezésre más oldalak vagy eljárások eléréséhez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az aktuálisan megjelenített oldalon lévőkhöz. Ez vonatkozik az ELKÜLÖNÍTÉS és az ÁGYCSERE gombokra, amelyeket a **Ábra 6 B** részben jeleztünk (lásd a(z) 3.4.1 részt).

2.3. Parancssor

A parancssor (**Ábra 8**) tartalmazza azokat a gombokat, amelyek lehetővé teszik a képernyő tartalmának kezelését.

PATIENT FILE

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

Ábra 8

A modul neve (Patient File) a bal oldalon látható. A gombok a következők:

Új – lehetővé teszi új űrlap létrehozását. Ez vagy akkor fordulhat elő, ha "testvéroldalak" elérhetőek (ez például az "Ápolói átadások" esete, ahol általában minden műszak végén új átadás jön létre), vagy az oldal első szerkesztésekor (például egy beteg felvételi adatainak első bevitelkor).

Szerkesztés – lehetővé teszi az adatbevitelt (az oldal „Szerkesztés módba” vált).

Mentés – lehetővé teszi a változtatások mentését a szerkesztés után.

Törlés – lehetővé teszi egy oldal törlését, ahol lehetséges.

Visszavonás – lehetővé teszi az oldalon végzett módosítások elvetését.

A parancssor gombjai a kontextustól függően engedélyezhetők/letilthatók (például: a **Mentés** gomb csak „Szerkesztés módban”) és/vagy a felhasználói engedélyektől függően (azaz: bizonyos műveleteket csak meghatározott felhasználók hajthatnak végre).

3. Adatbevitel

Amikor egy beteg rekordját első alkalommal nyitja meg, a parancssoron aktiválódik az **Új** gomb, amely lehetővé teszi, hogy új rekordot hozzon létre az adott beteghez. Az egymást követő hozzáféréseknél a csak egyszer kitöltött oldalak esetében az **Új** gomb nem aktív, de a **Szerkesztés** gomb elérhető, és lehetővé teszi a meglévő oldal adatainak módosítását. A több példányban létező rekordok (például a „Napi vizit” rekord) esetében az **Új** gomb az egymást követő időpontokban is aktív marad.

Az adatok megadásához:

- A kontextustól (Ábra 9) függően kattintson a **Szerkesztés** vagy az **Új** gombra.

PATIENT FILE

NEW EDIT

SAVE

DELETE

CANCEL

Ábra 9

Az oldal „Szerkesztés” módra vált. A **Szerkesztés** gomb ki van jelölve (Ábra 10 **A**). A **Mentés** és **Visszavonás** gombok engedélyezve vannak (Ábra 10 **B - C**).



Ábra 10

- Adja meg az adatokat.
- Kattintson a **Mentés** gombra a módosítások mentéséhez, vagy kattintson a **Mégse** gombra a módosítások elvetéséhez.

A bevitt adatok típusától függően többféle adatbeviteli mód létezik. Ezeket a következő részben ismertetjük.

3.1. Adatbeviteli példák

A Betegfelvétel oldal leírása itt a leggyakoribb adatbeviteli módok példájaként szolgál.

The screenshot shows the 'Admission' form in the Patient File system. The form is titled 'Admission' and is part of the 'Patient Assessment' section. It contains various input fields and buttons for recording patient admission. A red circle with a yellow 'A' is placed over the 'NEW' button in the bottom left corner of the form area.

Ábra 11

- Kattintson az **Új** gombra a parancssoron történő új felvételi bejegyzés létrehozásához a páciens számára (Ábra 11 **A**).

A képernyő „Szerkesztés” módra vált; adatbevitel engedélyezve van. A parancssorban az **Új** gomb ki van jelölve, a **Mentés** és **Visszavonás** gomb engedélyezve van (Ábra 12).

The screenshot shows the 'Admission' form in the Patient File system, showing the 'Edit' mode. The form is titled 'Admission' and is part of the 'Patient Assessment' section. It contains various input fields and buttons for recording patient admission. A red circle with a yellow 'A' is placed over the 'NEW' button, and a red circle with a yellow 'B' is placed over the 'Admitting Doctor' dropdown menu.


Ábra 12

A felvételi dátum mező automatikusan kitöltésre kerül, ha a beteget már felvették (Ábra 12 **A**). A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni, mint például a „Felvevő orvos” (Ábra 12 **B**, Ábra 13).

The close-up screenshot shows the 'Admitting Doctor' dropdown menu, which is a search bar with a list of doctors below it.

Ábra 13

Az oldal nem menthető, ha nincs kitöltve minden kötelező mező. Ha a felhasználó megpróbál menteni egy bejegyzést hiányos adatokkal, egy előugró ablak jelenik meg, amely felsorolja az összes hiányzó szükséges információt (Ábra 14).

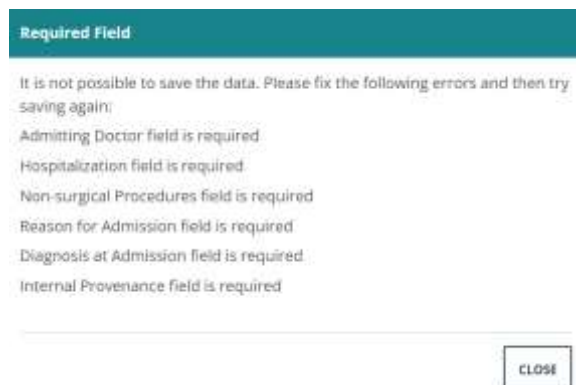

Required Field


It is not possible to save the data. Please fix the following errors and then try saving again:

- Admitting Doctor field is required
- Hospitalization field is required
- Non-surgical Procedures field is required
- Reason for Admission field is required
- Diagnosis at Admission field is required
- Internal Provenance field is required

CLOSE

Ábra 14

A hiányzó kötelező mezők is ki vannak emelve (Ábra 15).

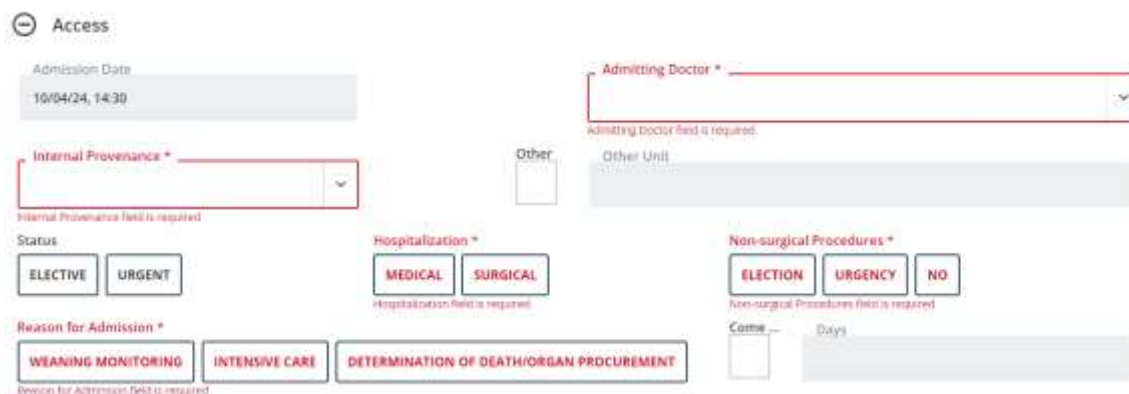

Access

Admission Date
16/04/24, 14:30

Internal Provenance *
Internal Provenance field is required

Admitting Doctor *
Admitting Doctor field is required

Other
Other Unit

Status
ELECTIVE URGENT

Hospitalization *
MEDICAL SURGICAL
Hospitalization field is required

Non-surgical Procedures *
ELECTION URGENCY NO
Non-surgical Procedures field is required

Reason for Admission *
WEANING MONITORING INTENSIVE CARE DETERMINATION OF DEATH/ORGAN PROCUREMENT
Reason for Admission field is required

Come Days

Ábra 15

3.1.1. Legördülő listák

- Kattintson egy névre a listában a legördülő listamező kitöltéséhez.

A felvevő orvos például egy legördülő menüből választható ki, amely tartalmazza mindazok nevét, akik felvevő orvosként szolgálhatnak (Ábra 16).



Admitting Doctor *

English Doctor

Other Doctor

Other Doctor

Ábra 16

3.1.2. Többszörös választási lehetőség

Többszörös választási lehetőség mezői esetén, mint pl. Ábra 17 **A**,

- Kattintson egy lehetőségre a kiválasztásához.

Admission

Admission Date: 05/16/24, 09:00

Admitting Doctor *: English Doctor

Internal Provenance *: Hospital Unit 1

Other: Other Unit

Status: **ELECTIVE** URGENT

Hospitalization *: **MEDICAL** SURGICAL

Non-surgical Procedures *: **ELECTION** URGENCY NO

Reason for Admission *: **WEANING MONITORING** INTENSIVE CARE DETERMINATION OF DEATH/ORGAN PROCUREMENT

Scheduled Admission to ICU: YES NO

Admitted for Trauma: YES NO

Judicial Authority Report: YES NO

Protocol Number JA

Ábra 17

3.1.3. Társkapcsolódó mezők

Egyes opciók további specifikációt tesznek lehetővé. Ilyen például az „Egyéb” és a „Vissza” jelölőnégyzet, amelyek bejelölése esetén meg kell adni a származási osztályt és a napok számát, amelyek után a beteg visszatért. Továbbá, ha elérhető egy igazságügyi hatósági jelentés, a „Protokollszám” mező engedélyezve van (Ábra 18 **A - B - C**).

Other: ☒ Other Unit *: Other department

Non-surgical Procedures *: **ELECTION** URGENCY NO

Come: ☒ Days: 5

Judicial Authority Report: **YES** NO

Protocol Number JA: AG55765XY

Ábra 18

3.1.4. Szabadszöveges mezők

Írja be a szükséges szöveget a mező kitöltéséhez. Lásd például Ábra 19.



The image shows three empty text input fields arranged horizontally. The first field is titled 'Diagnosis at Admission *' and contains a placeholder text: 'Type here the diagnosis at admission. This is a textual field etc...'. The second field is titled 'Epicrisis/Recent Clinical History'. The third field is titled 'Problems List at Admission'.

Ábra 19

3.1.5. Kiválasztó ablak

Egyes mezők kiválasztási ablakot nyitnak meg, amely lehetővé teszi a szükséges információk megadását. Lásd például a Betegség felvételkor leírását a Felvétel oldalon.




The image shows a 'Disease At Admission' selection window. It has a title bar with a minus icon and the text 'Disease At Admission'. Below the title bar, there is a large empty text area with the placeholder text 'No disease added yet.' at the bottom. On the right side, there is a red circular button with a white 'A' and a plus sign, labeled 'ADD NEW DISEASE +'.

Ábra 20

Betegség megjelölése

- Kattintson az **Új betegség hozzáadása** gombra (Ábra 20 **A**).

Megnyílik egy dedikált kiválasztási ablak (Ábra 21).

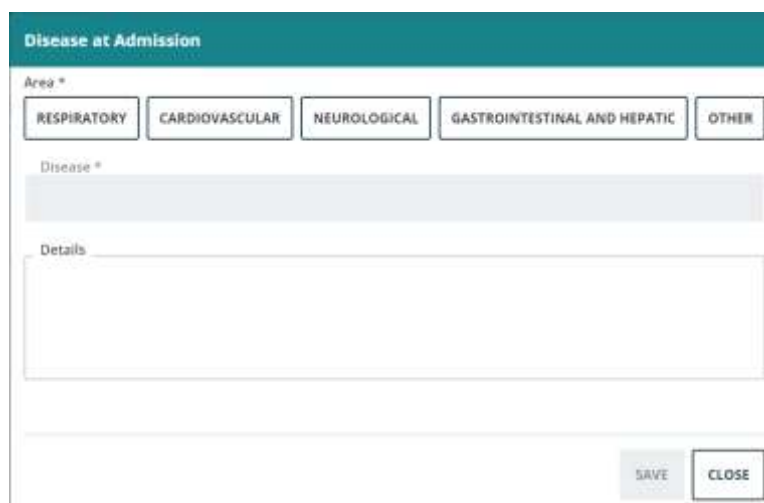

The image shows a 'Disease at Admission' selection window. It has a title bar with the text 'Disease at Admission'. Below the title bar, there is a section labeled 'Area *' with five buttons: 'RESPIRATORY', 'CARDIOVASCULAR', 'NEUROLOGICAL', 'GASTROINTESTINAL AND HEPATIC', and 'OTHER'. Below this, there is a section labeled 'Disease *' with a large empty text area. Below that, there is a section labeled 'Details' with a large empty text area. At the bottom right, there are two buttons: 'SAVE' and 'CLOSE'.

Ábra 21

- Válassza ki a területet (Ábra 22 **A**).

Ábra 22

- Válassza ki a betegséget a kontextusfüggő legördülő listából (Ábra 22 **B**).
- Ha szükséges, írjon be részletesebb leírást (Ábra 22 **C**).
- Kattintson a **Mentés**gombra (Ábra 22 **D**).

A kiválasztott elemek egy táblázatban vannak felsorolva (Ábra 23 **A**).


Area	Disease	Details			
Respiratory	AIRWAY PATHOLOGY	Type details here			

Ábra 23

- Kattintson a(z) ikonra a részletek teljes megjelenítéséhez.
- Kattintson a(z) ikonra a meglévő elem szerkesztéséhez.
- Kattintson a(z) ikonra az elem törléséhez.

3.1.6. Codefinder előhívása


Az ICD9 diagnózis és eljárások a Digistat Codefinder webmodulon keresztül választhatók ki. Ezekben az esetekben egy adott gomb hívja elő a Codefinder modult (a Codefinder modul leírását lásd a *USR ENG Codefinder Web* dokumentumban). A következő példa a diagnózis kiválasztásának folyamatát mutatja be a „Felvétel” oldalon (Ábra 24).

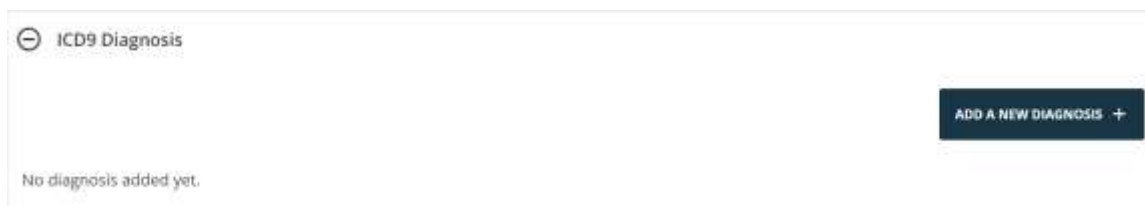

Ábra 24

- Kattintson az **Új diagnózis hozzáadása** gombra (Ábra 24 **A**).

Megnyílik a Codefinder modul (Ábra 25)

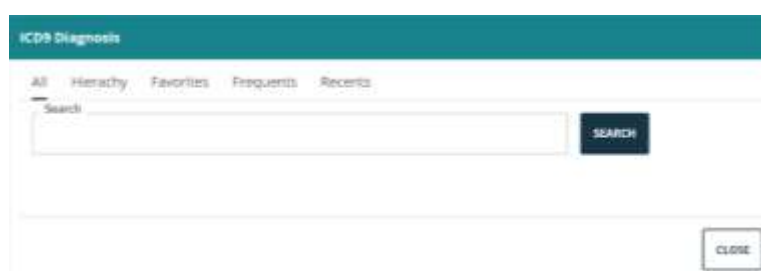

Ábra 25

- Keresse meg a szükséges diagnózist (Ábra 26)



Ábra 26

- Kattintson a kívánt diagnózisra a kiválasztásához (Ábra 26 **A**).

A kiválasztott elem megjelenik a Patient File modulban, az összes kiválasztott elemet felsoroló táblázatban (Ábra 27).



Ábra 27

- Használja a(z)  ikont egy elem törléséhez az asztalon (Ábra 27 A).

3.1.7. Ápolói pontszámok



Alapértelmezés szerint az „Patient File” előre beállított példákat jelenít meg az ápolói pontszámokra, amelyek a konfiguráció során módosíthatók. Ezeket az ápolói pontszámokat a Vitals Web konfigurációs alkalmazásban kell beállítani (tekintse meg a CFG ENG Digistat Suite dokumentumot). Ezek a pontszámok csak dokumentációs célokat szolgálnak.

A különböző ápolói pontszámok kontextusban dokumentálhatók különböző oldalakon. Lásd például a Felvétel oldalon a sérülés súlyossági pontszámát (ISS -Ábra 28).



Ábra 28

Pontszám dokumentálása:

- Írja be az összes szükséges értékelést (Ábra 29 A).



Ábra 29

- Kattintson a **Számítás** gombra (Ábra 29 B).

Az összpontszám ezután megjelenik egy eredménymezőben (Ábra 29 C).


3.1.8. Letiltott mezők

Egyes mezők letilthatók vagy csak olvashatók. A „Betegadatok” részben található beteg személyes adatai például a kórházi ADT-től származnak, és csak olvashatóak a Patient File modulban. A mezők letilthatók vagy a felhasználói engedélyek miatt (ha a felhasználó nem hajthat végre egy adott eljárást).

3.2. Előzmények


A rekord létrehozására és utolsó szerkesztésére vonatkozó adatok mindig az egyes rekordok bal alsó sarkában jelennek meg.

A megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók a rekordmódosítások előzményeihez is hozzáférhetnek. Ha ez a lehetőség engedélyezve van, akkor az oldalon a létrehozási és szerkesztési információk mellett megjelenik egy külön „Felvételi előzmények” hivatkozás is (Ábra 30 **A**).

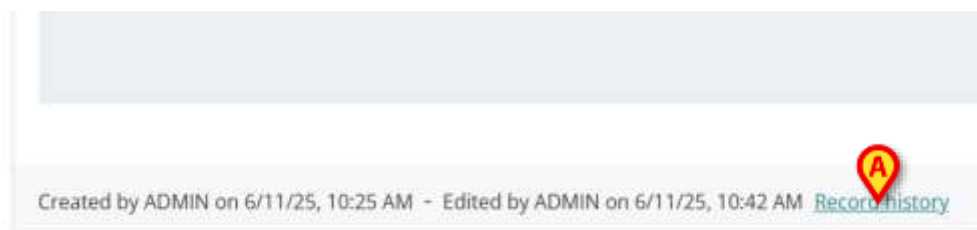

Ábra 30

- A linkre kattintva a következő ablak nyílik meg (Ábra 31)

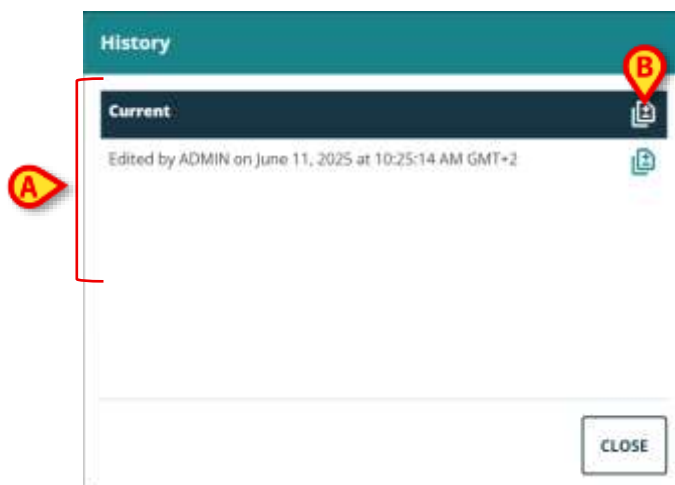


Ábra 31

Az ablak a rekordon végzett összes szerkesztést felsorolja. Minden sor egy adott szerkesztésnek felel meg (Ábra 31 **A**). Felül az aktuális verzió látható. Az alábbiakra van lehetőség:

- Kattintson egy sorra a rekord korábbi verziójának megjelenítéséhez.

A megjelenített korábbi verziók csak olvashatók.

Az egyes sorok jobb oldalán található ikon (Ábra 31 **B**) megnyit egy ablakot, amely összehasonlítja a kiválasztott verziót az előző verzióval (Ábra 32). Az ikon csak a meghatározott jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára látható.

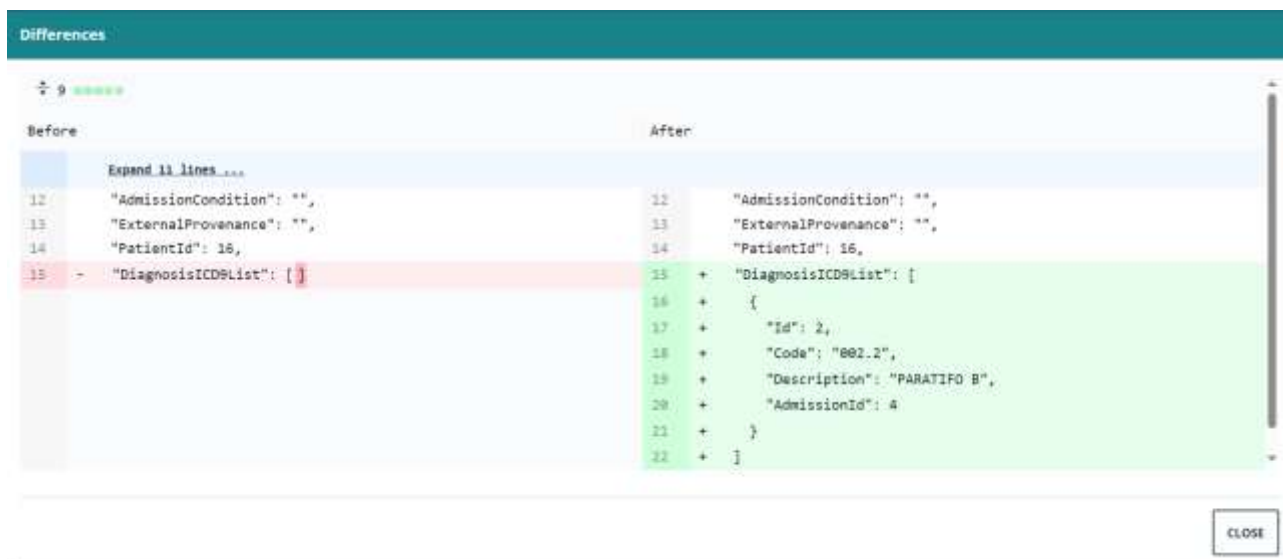

Ábra 32

3.3. Testvéroldalak

Egyes tevékenységeket többször is elvégeznek a beteg tartózkodása alatt. Ez ugyanazon páciensnél több azonos típusú bejegyzést eredményez. Ilyen például az ápolói átadás-átvételi jegyzőkönyv, amelyet általában az ápolószemélyzet tölt ki és ment el minden műszak végén (Ábra 33).

Nursing Handover ABCDE

Date/Time: mm/dd/yyyy

Airways And Breathing

Spontaneous Breath: YES NO

Breath: EUPNOIC BRADYPNOIC TACHYPNOIC DYSPNOIC

Ventilation: NO INVASIVE NON-INVASIVE

O2 Therapy: NO YES

Cough: YES NO

Secretions: YES NO

Patient

Personal Details

Isolations

Patient Assessment

Admission

Anamnesis

Physical Examination

Allergies/Intolerance

Daily Activities

Injuries/Skin Lesions

Infections

Nursing Handover ABCDE

Daily Physical Examination

Procedures

Discharge

Clinical Discharge

PATIENT FILE NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

ascom

Ábra 33

Új Ápolási átadás létrehozása

- Kattintson az **Új** gombra a parancssorban (Ábra 33 **A**).

Az oldal „Szerkesztés módra” vált (Ábra 34).

Nursing Handover ABCDE

Date/Time * mm/dd/yyyy -- -- Shift

Airways And Breathing

Spontaneous Breath YES NO

Breath EUPNOIC BRADYPNOIC TACHYPNOIC DYSPNOIC

Ventilation NO INVASIVE NON-INVASIVE

O2 Therapy NO YES

Flow (l/min) Device FIO2 (%)

Cough Secretions

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL ascom

Ábra 34

- Töltse ki az összes kötelező mezőt (Ábra 35).

Nursing Handover ABCDE

Feeding

Type ORAL ENTERAL PARENTERAL FASTING

Medical Devices N.G.TUBE P.J.TUBE PEG NJT

Diet Low-Calorie

Bowel OPEN OPEN TO GAS CLOSED ILEOSTOMY COLOSTOMY

Last Discharge mm/dd/yyyy -- --

Diurests NORMAL OLIGURIA POLYURIA

Medical Devices CV CYSTOSTOMY NEPHROSTOMY URETERAL STENT

Mobilization PRT

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL ascom

Ábra 35

- Kattintson a **Mentés gombra** , ha kész (Ábra 35 **A**).

A bejegyzés mentésre kerül (Ábra 36).

Ábra 36

A parancssorban a következő gombok engedélyezve vannak (Ábra 36 **A**):

Új – lehetővé teszi új, azonos típusú bejegyzés létrehozását. Új bejegyzés létrehozásakor választható, hogy a meglévő adatokat az új bejegyzés másolja-e vagy sem.

Szerkesztés – meglévő bejegyzés szerkesztésének engedélyezése.

Törlés – bejegyzés törlésének engedélyezése.

Ha több bejegyzés is elérhető, a pontban jelzett gombok segítségével lehet navigálni a különböző bejegyzésekhez Ábra 36 **B**.

Kattintson a(z)  gombra a következő bejegyzés megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra az előző bejegyzés megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra az utolsó bejegyzés (a legutóbbi) megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra az első bejegyzés (a legrégebbi) megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra egy táblázat megjelenítéséhez, amely felsorolja az összes létező bejegyzést (Ábra 37).

Created On	Shift	Date/Hour
06/06/2024	Morning	05/06/2024
06/06/2024	Afternoon	05/06/2024
06/06/2024	Night	05/06/2024


Ábra 37

A sárga sor az éppen megjelenített bejegyzést jelzi. Kattintson egy sorra a megfelelő bejegyzés megjelenítéséhez.

3.4. Dedikált munkafolyamatok

3.4.1. „Ágycsere” és „Elkülönítés” parancsikonok

Egyes oldalakon speciális gombok találhatók a kapcsolódó eljárások parancsikonjaként. Lásd például a „Személyes adatok” oldalon az **Ágycsere** és az **Elkülönítés** gombokat (Ábra 38 A).

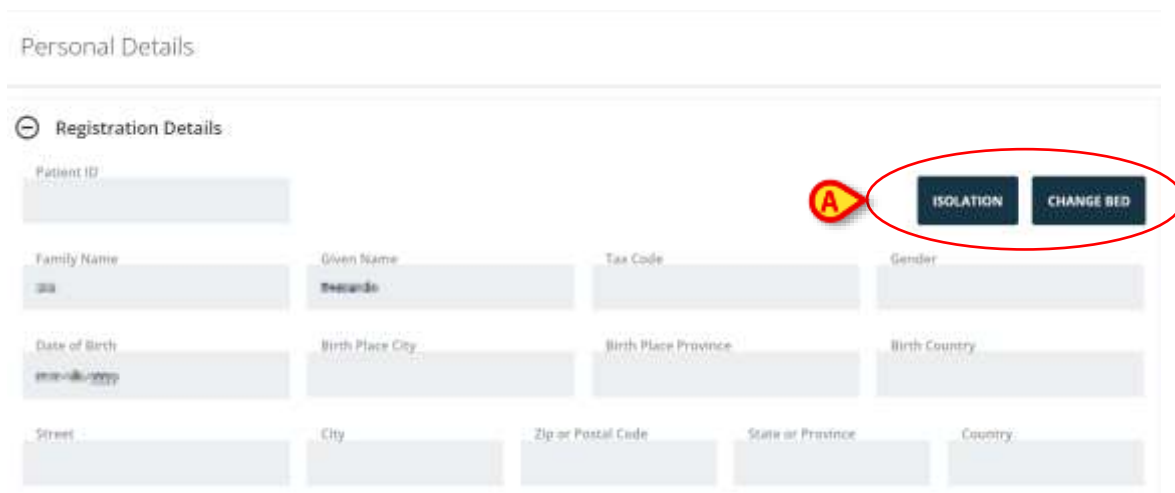

Ábra 38

Ágycsere

Az Ágycsere gombbal gyorsan rögzíthető, hogy a páciens átkerült egy másik ágyra.

- Kattintson az **Ágy megváltoztatása** lehetőségre a „Páciens mozgatása” ablak megnyitásához



Ábra 39

- Válassza ki a rendeltetési osztályt és ágyat az ablakon, majd kattintson az **Áthelyezés gombra** (Ábra 39 A).

Elkülönítés

- Kattintson az **Elkülönítés** gombra, hogy közvetlenül elérje az „Elkülönítés” oldalt, amely lehetővé teszi a páciens elkülönítési időszakainak dokumentálását (Ábra 40).

The screenshot shows a web form titled "Isolation". It contains two date pickers: "Start Date" and "End Date", both with the placeholder "mm/dd/yyyy -- --". Below the date pickers, there is a section for "Isolation Type" with three buttons: "CONTACT", "DROPLET", and "AIRBORNE". At the bottom, there is a "Details" section which is currently empty.

Ábra 40

Ha az elkülönítési időszak elkezdődött (a kezdési dátum meg van adva), de nem fejeződött be (a befejezési dátum nincs megadva), Ábra 41.

This screenshot shows the "Isolation" form with the "Start Date" field populated with "06/06/2024 12:00 AM". The "End Date" field remains empty with the placeholder "mm/dd/yyyy -- --". The "Isolation Type" section shows the "CONTACT" button highlighted in dark blue, while "DROPLET" and "AIRBORNE" are in light grey.

Ábra 41

akkor az Elkülönítés gomb piros színnel jelenik meg a „Személyes adatok” oldalon (Ábra 42).

The screenshot displays the "Personal Details" form. Under the "Registration Details" section, there are input fields for "Patient ID", "Family Name", "Given Name", "Tax Code", and "Gender". The "Patient ID" field is filled with "123". The "Given Name" field is filled with "TWEEDLE". To the right of these fields, there are two buttons: "ISOLATION" in red and "CHANGE BED" in dark blue.

Ábra 42

3.4.2. Allergia/intolerancia

A páciens allergiájának és intoleranciáinak dokumentálására egy speciális munkafolyamatot szentelnek.




Ábra 43

Az allergia és intolerancia megjelölése

- Kattintson az **Új** gombra a parancssorban (Ábra 43 **A**).

A képernyő **Szerkesztés** módra vált (Ábra 44).

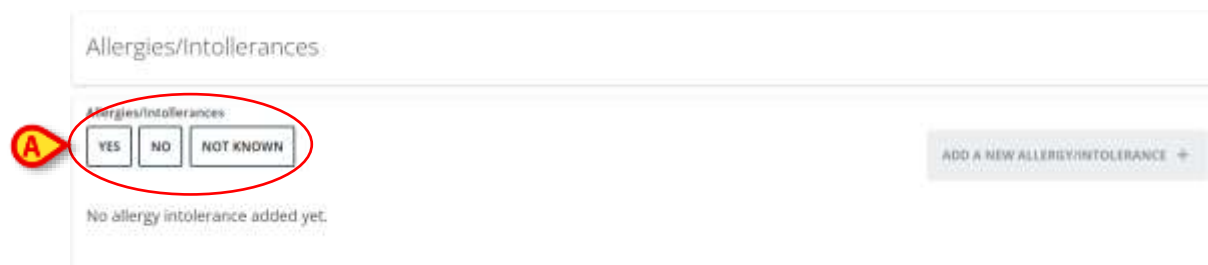

Ábra 44

- Válassza ki a(z) Ábra 44 **A**-ban jelzett opciók egyikét. A választás automatikusan mentésre kerül.



*Bármelyik opciót is választja az „Allergiák” oldalon, az azonnal és automatikusan mentésre kerül. A kiválasztott kijelölés mentéséhez nem szükséges a **Mentés** gombra kattintani. A kijelölés ezután a **Szerkesztés** eljárással módosítható.*

Miután kiválasztotta az **IGEN** lehetőséget (Ábra 45 **A** – azt jelenti, hogy vannak allergiák/intoleranciák), az **Új allergia/intolerancia hozzáadása** gomb engedélyezve van (Ábra 45 **B**).

Allergies/Intolerances

Allergies/Intolerances

YES NO NOT KNOWN

No allergy intolerance added yet.

ADD A NEW ALLERGY/INTOLERANCE +

Ábra 45

A páciens allergiáinak megadása

- Kattintson a **Új allergia/intolerancia hozzáadása** gombra.

Megjelenik egy dedikált űrlap (Ábra 46)

< Allergies/Intolerances - New

Category

DRUGS FOOD AMBIENTAL OTHER

Code Description

Seriousness

INTOLERANCE ALLERGY

Reactions

Ábra 46

- Töltse ki az űrlapot (Ábra 47 - erre a célra egy speciálisan konfigurált Codefinder ablak áll rendelkezésre).

< Allergies/Intolerances - New

Category:

Code: 260172004

Description: Aglio

Seriousness:

Reactions:

Reactions description

NEW EDIT **SAVE** DELETE CANCEL

ascom

Ábra 47

- Kattintson a **Mentés** gombra a parancssorban (Ábra 47 **A**).

A kiválasztott elemek egy táblázatban jelennek meg (Ábra 48).

Allergies/Intolerances

Allergies/Intolerances

ADD A NEW ALLERGY/INTOLERANCE +

Seriousness	Category	Code	Description	Reactions
Allergy	Food	260172004	Aglio	Reactions description

Ábra 48

3.4.3. Sérülések/Bőrelváltozások


Egy speciális eljárást szentelnek a páciens sérüléseinek és bőrelváltozásainak dokumentációjának (Ábra 49).



Ábra 49

Elváltozás jelzéséhez:

- Kattintson az **Új elváltozás** gombra (Ábra 49 **A**). A képernyő a következő módon változik (Ábra 50).

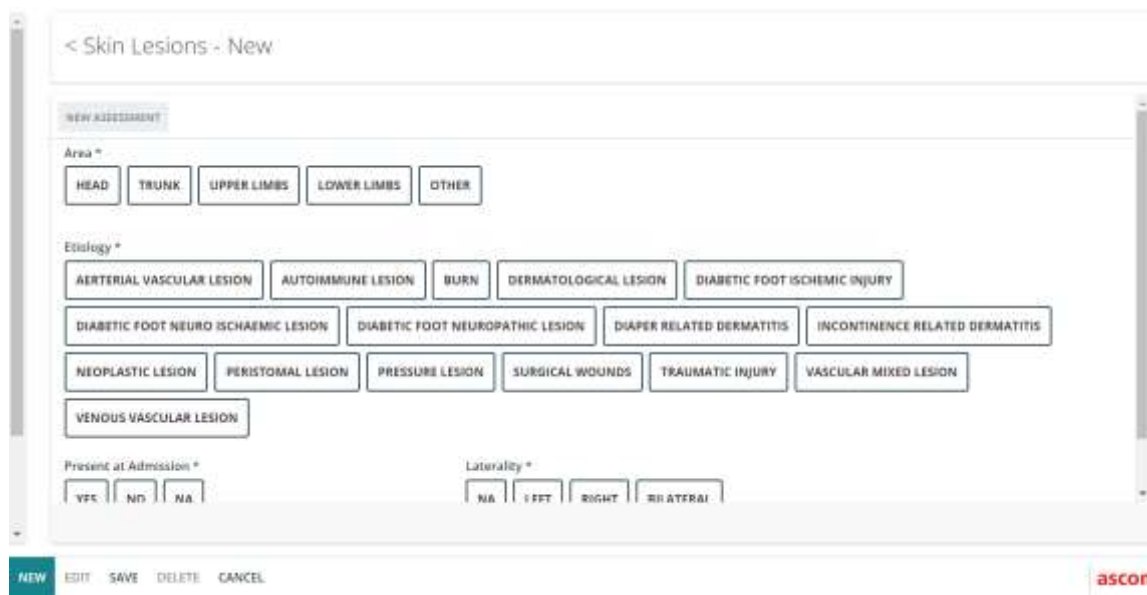

Ábra 50

- Írja be a szükséges információkat (Ábra 51).

< Skin Lesions - New

NEW ASSESSMENT

Area *

HEAD TRUNK UPPER LIMBS **LOWER LIMBS** OTHER

Site *

SACRUM GLUTEUS GENITALS ANTERIOR THIGH POSTERIOR THIGH LEG KNEE CALF OUTER CALF MALLEOLUS INSTEP HEEL

HALLUX 2ND TOE 2RD TOE 4TH TOE 5TH TOE TOE

Etiology *

AERTERIAL VASCULAR LESION AUTOIMMUNE LESION BURN **DERMATOLOGICAL LESION** DIABETIC FOOT ISCHEMIC INJURY

DIABETIC FOOT NEURO ISCHAEMIC LESION DIABETIC FOOT NEUROPATHIC LESION DIAPER RELATED DERMATITIS INCONTINENCE RELATED DERMATITIS

NEOPLASTIC LESION PERISTOMAL LESION **PRESSURE LESION** SURGICAL WOUNDS TRAUMATIC INJURY VASCULAR MIXED LESION

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

ascom

Ábra 51

- Kattintson a **Mentés** gombra (Ábra 51 **A**).

Az adatok mentésre kerülnek (Ábra 52).

B Skin Lesions - View

A NEW ASSESSMENT

Area *

HEAD TRUNK UPPER LIMBS **LOWER LIMBS** OTHER

Site *

SACRUM GLUTEUS GENITALS ANTERIOR THIGH POSTERIOR THIGH LEG KNEE CALF OUTER CALF MALLEOLUS INSTEP HEEL

HALLUX 2ND TOE 2RD TOE 4TH TOE 5TH TOE TOE

Etiology *

AERTERIAL VASCULAR LESION AUTOIMMUNE LESION BURN **DERMATOLOGICAL LESION** DIABETIC FOOT ISCHEMIC INJURY

DIABETIC FOOT NEURO ISCHAEMIC LESION DIABETIC FOOT NEUROPATHIC LESION DIAPER RELATED DERMATITIS INCONTINENCE RELATED DERMATITIS

NEOPLASTIC LESION PERISTOMAL LESION **PRESSURE LESION** SURGICAL WOUNDS TRAUMATIC INJURY VASCULAR MIXED LESION

Created by ADMIN on 07/06/24 12:06 [Record history](#)

Ábra 52

Mostantól lehetőség van a jelzett elváltozás értékelésének dokumentálására (kattintson az **Új értékelés** gombra -Ábra 52 **A**) vagy lépjen vissza az elváltozások/sérülések összefoglaló oldalára (Ábra 53 - kattintson a **Vissza** nyíltra a Ábra 52 **B** részben jelzett módon).


Injuries/Skin Lesions

SHOW ALL ASSESSMENTS NEW LESION NEW ASSESSMENT NEW DRESSING

Lower Limbs - Sacrum - Pressure Lesion

Ábra 53

A további elváltozások dokumentálásához használja ismét az **Új elváltozás** gombot. Az összes dokumentált elváltozás/sérülés felsorolva van az oldalon (Ábra 54).

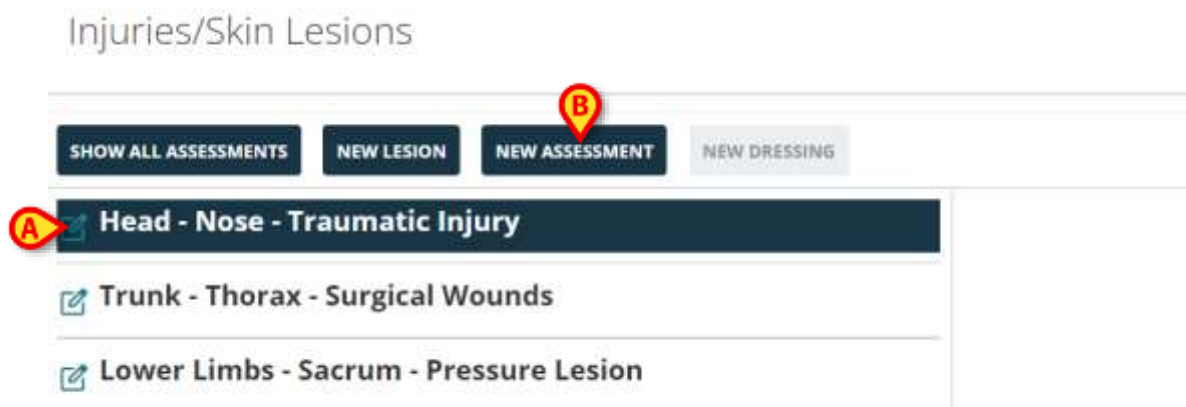

Ábra 54


Az időszakos értékelések dokumentálhatók minden egyes elváltozás esetében. Ehhez:

- Válassza ki a vizsgálandó elváltozást. A megfelelő sor ki van jelölve (Ábra 54 **A**).
- Kattintson az **Új értékelés** gombra (Ábra 54 **B**)

Megnyílik az „Értékelés” űrlap.

- Írja be a szükséges információkat, és kattintson a **Mentés** gombra a parancssorban.

Az értékelési adatok így mentésre kerülnek (Ábra 55).

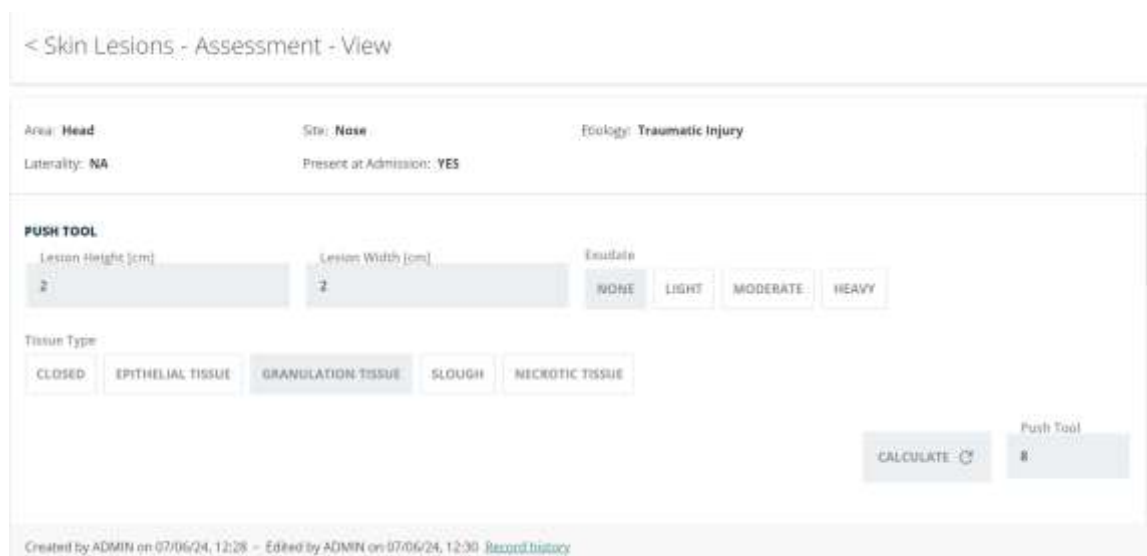

Ábra 55


Az értékelések a sérülések/elváltozások oldalon, a kapcsolódó sérülés alatt találhatók (Ábra 56)



Ábra 56

A lehetséges egymást követő kötszerek dokumentálhatók egy konkrét értékeléshez. Ehhez:

- Kattintson a megfelelő értékelésre. A megfelelő sor ki van jelölve (Ábra 57 **A**).

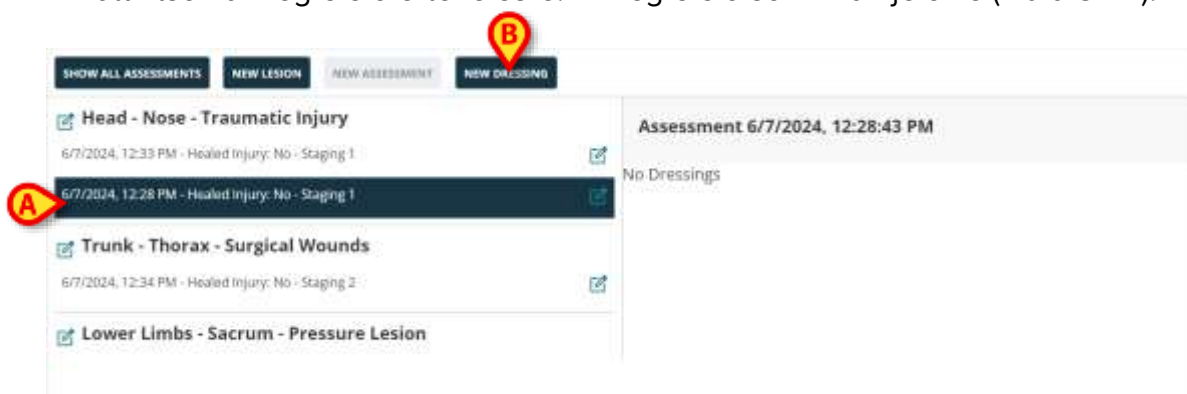

Ábra 57

- Kattintson az **Új kötés** gombra (Ábra 57 **B**).

Megnyílik a „Kötés” űrlap.

- Írja be a szükséges információkat, és kattintson a **Mentés** gombra a parancssorban.

A kötési adatok így mentésre kerülnek (Ábra 58).

< Skin Lesions - Dressing - View

Date/Time Dressing * 06/07/2024 12:27:09 PM Executed by * trust

Dressing Details

Primary Dressing

BETADINE GAUZE PARAFFIN GAUZE **STERILE GAUZE** MOISTURING CREAM SILVER ALGinate ZINC OXIDE OTHER

Secondary Dressing

HYDROCOLLOID 3 MM HYDROCOLLOID 5 MM POLYURETHANE FOAM BORDERED STERILE GAUZE **MEDICATED PATCH** COHESIVE BENDAGE

ELASTIC MESH COMPRESSIVE BENDAGE PATCH OTHER

Painfulness * Procedural Pain *

Created by ADMIN on 07/06/24, 12:46 - Edited by ADMIN on 07/06/24, 12:46 [Record history](#)

Ábra 58

A kötszerek adatai a „Sérülések/Elváltozások” főoldalon jelennek meg a kapcsolódó értékelés kiválasztásakor (Ábra 59 jobbra).

SHOW ALL ASSESSMENTS NEW LESION NEW ASSESSMENT NEW DRESSING

Head - Nose - Traumatic Injury

6/7/2024, 12:33 PM - Healed Injury: No - Staging 1

6/7/2024, 12:28 PM - Healed Injury: No - Staging 1

Trunk - Thorax - Surgical Wounds

6/7/2024, 12:34 PM - Healed Injury: No - Staging 2

Lower Limbs - Sacrum - Pressure Lesion

Assessment 6/7/2024, 12:28:43 PM

Date/Time Dressing	Executed by	Primary Dressing
6/7/2024, 12:27:09 PM		Sterile Gauze

Ábra 59

Bármely elem gyors eléréséhez és szerkesztéséhez:

- Kattintson a  az elem mellett elhelyezett ikonra (lásd pl. Ábra 59 **A**).



A „Sérülések/Bőrelváltozások” dokumentáció a következőképpen épül fel:

- Egy betegnél több sérülés is dokumentálható.
- Egy sérülés esetén több értékelés is dokumentálható.
- Az értékeléshez több kötszer is dokumentálható.

3.4.4. Klinikai elbocsátás

A „Klinikai elbocsátás” adatlapon az adatbeviteli eljárások megegyeznek az előző bekezdésekben leírtakkal, de az elbocsátási dokumentáció végén, minden lényeges információ feltüntetése után, külön eljárásra van szükség.

Ezen az űrlapon az aktív terápiákkal kapcsolatos információk a Digistat Therapy Web modulból, míg a Vizsgálatokkal/Konzultációkkal kapcsolatos információk a Digistat Napló Web modulból származnak.



Az Elbocsátási eljárás megköveteli, hogy legalább egy terápia aktív legyen a páciens számára a Digistat „Therapy Web” modulján, és hogy a Napló webes feljegyzései megfelelően legyenek konfigurálva. További információért lásd a Digistat Therapy Web felhasználói kézikönyvet (USR HUN Therapy Web) és a Diary Web felhasználói kézikönyvet (USR HUN Diary Web).

A betegellátás végén, amikor az „Elbocsátás” űrlap összes mezője ki van töltve, el kell végezni egy végső érvényesítési eljárást. Ehhez a „Klinikai elbocsátás” űrlap „Végső érvényesítési műveletek” részében,

- Kattintson a **A terápia lezárása és a beteg elbocsátása** gombra (Ábra 60 A).



Ábra 60

A páciens így elbocsátásra kerül, a terápiák a Patient Therapy Web modulon zárolva vannak. A **Terápia feloldása**, valamint a **Érvényesítés és a Betegadatok zárolása** gombok engedélyezve vannak (Ábra 61).




Ábra 61

- Kattintson az **Érvényesítés és a Beteg adatainak zárolása** gombra (Ábra 61 A).

A klinikai feljegyzés így kerül validálásra. A páciensadatok a különböző Patient File űrlapokon csak olvasható módba kapcsolnak. Az **Érvényesítés visszavonása** gomb engedélyezve van.

Használja a **Terápia feloldása** és az **Érvényesítés visszavonása** gombokat „Visszavonás” gombként a **Terápia zárolása** és **Érvényesítés** eljárásokhoz. Mindkét esetben a feloldás/érvénytelenítés okát a felhasználónak külön meg kell adnia egy erre a célra szolgáló felugró ablakban (Ábra 62).

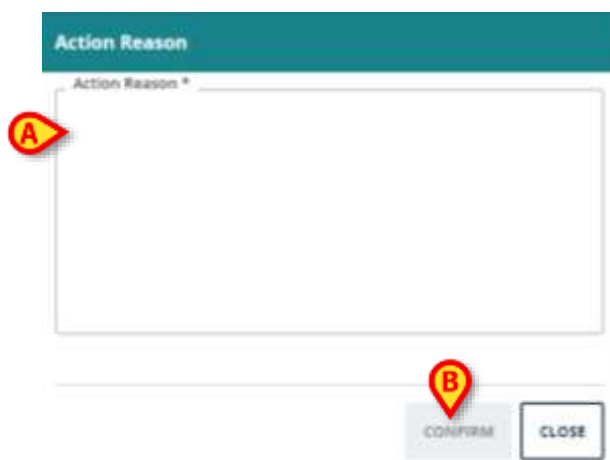

Ábra 62

Ehhez:

- Írja be az okot az Ábra 62**A-ban** jelzett szöveges mezőbe.
- Kattintson a **Megerősítés gombra** (Ábra 62 **B**).