



Control Bar Web Manuale Utente

Versione 11.0

10/3/2025

Sommario

1. Control Bar Web.....	3
1.1 Come lanciare Control Bar Web.....	3
1.2 Accesso (Login).....	4
1.2.1 Auto Login.....	6
1.2.2 Logout e rimani collegato	6
1.3 Area di lavoro	8
1.3.1 Come selezionare un modulo.....	8
1.4 Control Bar	9
1.5 Menu	10
1.5.1 Modifica password.....	11
1.5.2 Segnalazione di problemi tecnici	12
1.6 Sub-moduli aggiuntivi.....	13
1.6.1 CDSS Configurator	13
1.6.2 Identity	14

1. Control Bar Web



Per informazioni riguardanti l'ambiente del Prodotto, le precauzioni, gli avvertimenti e per l'uso previsto si vedano USR ITA Digistat Care e/o USR ITA Digistat Docs (a seconda dei moduli installati - per la Digistat Suite EU) oppure si veda USR ENG Digistat Suite NA (per la Digistat Suite NA). La conoscenza e comprensione dei documenti appropriati sono obbligatorie per un uso corretto e sicuro di Control Bar Web, descritto qui.

1.1 Come lanciare Control Bar Web

Per lanciare Control Bar Web,

- Digitare l'indirizzo nella barra degli indirizzi del browser (Fig 1).

Si aprirà la pagina seguente


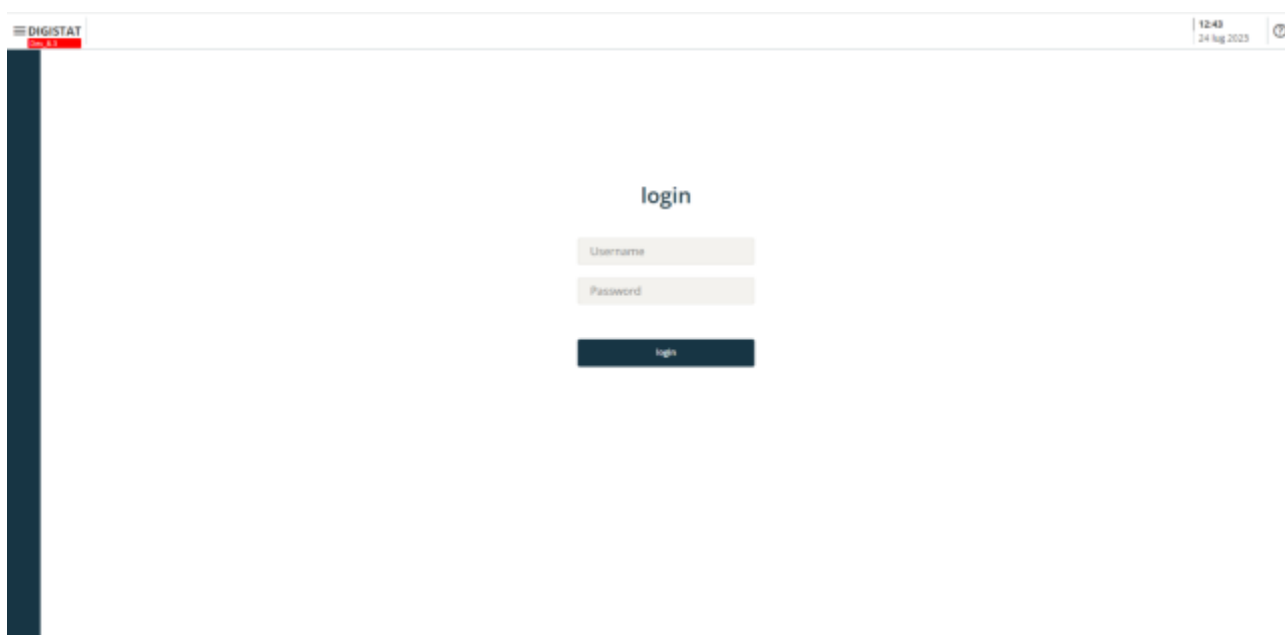


Fig 1

1.2 Accesso (Login)

Per accedere alle funzionalità del sistema è richiesto il login da parte dell'utente.

login

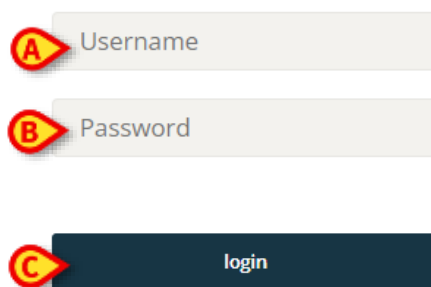

The login form consists of three elements: a text input field labeled 'Username' with a red circle 'A' next to it, a text input field labeled 'Password' with a red circle 'B' next to it, and a dark blue button labeled 'login' with a red circle 'C' next to it.

Fig 2

Per effettuare il login

- Inserire il proprio nome utente nel campo **Username** ("Nome utente" - Fig 2 **A**)
- Inserire la propria password nel campo **Password** ("Parola chiave" - Fig 2 **B**).
- Cliccare il pulsante **Login** (Fig 2 **C**).



Il nome utente e la password sono rilasciati dall'amministratore di sistema. Se non siete in possesso di un nome utente e di una password non siete autorizzati ad utilizzare il Prodotto.

Una volta effettuato l'accesso una sigla corrispondente all'utente connesso appare sul pulsante **Utente** (la sigla è "ADMIN" in Fig 3 **A**).



Fig 3

*L'utente le cui credenziali appaiono sul pulsante **Utente** è responsabile delle operazioni che vengono effettuate sul Prodotto.*



Nota: sono possibili eccezioni relative alla configurazione della vostra installazione (ad esempio si vedano le funzionalità di Autologin e di "Logout e rimani collegato" – paragrafi 1.2.1 e 1.2.2)

Si raccomanda pertanto di effettuare il log out dal sistema ogni volta che ci si allontana dalla postazione di lavoro. Ciò al fine di evitare un uso improprio del sistema.



È possibile configurare il Prodotto in modo che il login possa essere eseguito tramite un sistema esterno (single sign on). In questi casi è presente un pulsante apposito sulla schermata di Login.

Per effettuare il log out dal sistema:

- Cliccare il pulsante **Utente** durante la sessione di lavoro. Si aprirà il menù seguente (Fig 4)

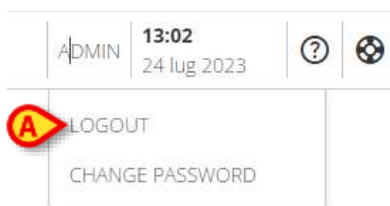


Fig 4

- Cliccare su **LOGOUT** (Fig 4 A).

È richiesta una conferma da parte dell'utente. Dopo la conferma l'utente è scollegato. Per connettersi di nuovo è sufficiente cliccare di nuovo sul pulsante **Utente**. Apparirà di nuovo la schermata mostrata in Fig 2.

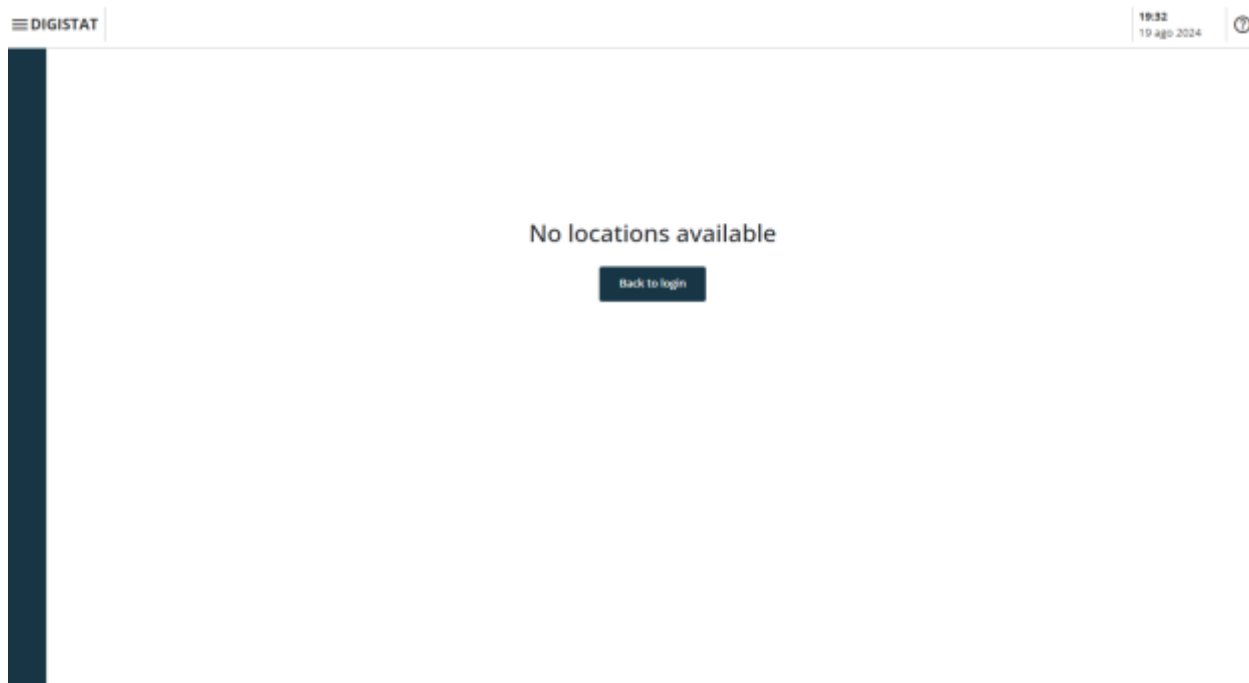


Fig 5

Se l'utente non è associato ad una "Location" non è possibile effettuare il login (si veda il documento *CGF ENG Digistat Suite MDR* per l'associazione fra utente e "Location"). In questo caso è visualizzato il messaggio "No location available/Location non disponibile" (Fig 5). Un pulsante **Back to Login** (Torna al login) è inoltre presente sulla schermata, per accedere direttamente al login e eventualmente ripetere la procedura con un altro utente, o con lo stesso dopo che sia stata effettuata l'associazione fra utente e "Location".



La "Location" è una entità di configurazione Digistat che corrisponde a una determinata area della struttura ospedaliera. Può trattarsi, ad esempio, di un reparto, di un blocco operatorio, di una corsia etc. a seconda delle esigenze della struttura. Si faccia riferimento agli amministratori del sistema per maggiori informazioni.

1.2.1 Auto Login

È possibile configurare Digistat Web in modo da abilitare il login automatico dell'utente. Ciò significa che all'avvio di Digistat Web c'è già connesso un utente configurato. Quando questo avviene, alcune funzionalità specificate in fase di configurazione sono immediatamente disponibili, prima che sia effettuata la procedura di login.

Per abilitare l'Auto Login, è necessario configurare la System Option “AutoLoginUsername”. Per maggiori informazioni si veda il documento “DSO ENG System Options”.

Quando l'Auto Login è attivato, è ancora possibile per l'utente effettuare l'accesso con le proprie credenziali. Per fare ciò è necessario:

- Cliccare il pulsante **Utente** (Fig 6 A).

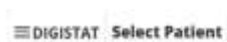


Fig 6

Si aprirà il seguente menù (Fig 7).



Fig 7

- Cliccare su **LOGIN AS...** (“Login come...” - Fig 7 A).

Si aprirà la schermata di Login (Fig 2). Si esegua l'accesso così come descritto nel paragrafo 1.2



Quando è configurata la System Option “AutoLoginUsername”, la funzionalità “Logout dell’utente corrente” (descritta nel paragrafo 1.2.2) è disabilitata.



Le funzionalità di “Auto Login” e “Logout e rimani” sono disponibili soltanto quando l’applicazione si trova all’interno del “Digistat Web Browser”. Si veda il manuale di installazione della Digistat Suite per maggiori informazioni (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Logout e rimani collegato

Questa funzionalità permette all'utente di effettuare il logout rimanendo collegato con un nome utente specificato in fase di configurazione. Ciò significa che dopo il logout, un utente convenzionale rimane connesso. Per attivare questa funzionalità è necessario configurare la System Option “LogoutAndRemainUsername”. Per maggiori informazioni si veda il documento “DSO ENG System Options”. Quando questa funzionalità è disponibile, l'opzione **Logout Current User** (logout dell'utente corrente) è disponibile sul menù “Utente” (Fig 9 A).

Per effettuare il logout rimanendo collegati:

- Cliccare il pulsante **Utente** (Fig 8 **A**).



Fig 8

Si aprirà il seguente menù (Fig 9).



Fig 9

- Cliccare su **LOGOUT CURRENT USER** (“Logout utente corrente” - Fig 9 **A**).

Spariranno le credenziali dell’utente Corrente dal pulsante **Utente**, che saranno sostituite da quelle dell’utente convenzionale configurato.

1.3 Area di lavoro

Dopo il login, le icone corrispondenti ai moduli disponibili sono visualizzate sulla barra laterale (Fig 10 **A**). L'area di lavoro (Fig 10 **B**) mostra le schermate e le funzionalità del modulo selezionato sulla barra laterale.



Fig 10

La barra comandi (Fig 10 **C**) sarà descritta nel paragrafo 1.4 (e seguenti). L'icona corrispondente al modulo correntemente selezionato è evidenziata.

1.3.1 Come selezionare un modulo

Per selezionare un modulo

- Cliccare l'icona corrispondente sulla barra laterale.

L'icona sarà evidenziata. Le funzionalità del modulo saranno visualizzate all'interno dell'area di lavoro.

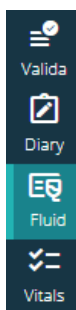


Fig 11

1.4 Control Bar

La barra comandi che appare nella parte superiore della schermata (detta Control Bar) è comune a tutti i moduli. Elenchiamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.



Fig 12

- Il pulsante **Menu** (Fig 12 **A**) permette di aprire il menu principale di Control Bar Web (Paragrafo 1.5).
- Il pulsante **Paziente** (Fig 12 **B**). Se nessun paziente è selezionato, questo pulsante può essere cliccato per lanciare la procedura di selezione del paziente. Dopo la selezione del paziente il pulsante riporta il nome del paziente selezionato ed alcuni dei dati principali. Per i pazienti ammessi sono indicati anche il letto e il reparto di ammissione. Se per il paziente selezionato sono disponibili funzionalità aggiuntive di Control Bar Web, il pulsante Paziente può essere cliccato per visualizzare un menù a discesa che permette di accedere a tali funzionalità (si veda il paragrafo 1.6 per maggiori informazioni). Se accanto al nome del paziente è visualizzata un'icona-lucchetto -  - significa che alcuni dati o funzionalità non sono disponibili per quel paziente.



La procedura di selezione del paziente si esegue di solito sul modulo Digistat Patient Explorer Web. Si veda il manuale utente di Patient Explorer Web (documento USR ENG Patient Explorer Web) per le istruzioni sulle funzionalità di gestione dei pazienti. Altri moduli possono essere configurati al posto di Patient Explorer per la selezione del paziente. Se questo è il caso, si veda, per le istruzioni, la documentazione specifica.

- L'area indicata in Fig 12 **C** può essere utilizzata per segnalare notifiche all'utente.
- Il pulsante **Utente** dà accesso alle funzionalità di Login/Logout e di cambio password (Fig 12 **D**).
- Indicazione di ora e data correnti (Fig 12 **E**).
- Il pulsante **Help** (Fig 12 **F**) permette di accedere alla documentazione online esistente (manuali utente, guide all'uso del sistema etc.).
- L'icona  (Fig 12 **G**) permette di creare una segnalazione da parte dell'utente diretta all'assistenza tecnica. Vedi paragrafo 1.5.2.

1.5 Menu

Il pulsante **Menu** (Fig 12 **A**) apre la finestra seguente (Fig 13).

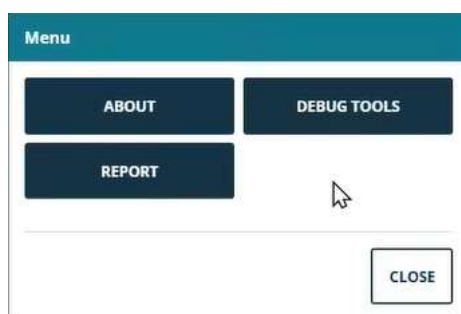


Fig 13

Il pulsante **About** (“Informazioni”) permette di visualizzare una finestra contenente informazioni sulla versione del Prodotto installata e sulle relative licenze (About Box - si veda la documentazione relativa per maggiori informazioni). L’etichettatura del prodotto è l’About Box visualizzato sulle postazioni di lavoro client, sui dispositivi mobili e moduli web sui quali è installato il Prodotto.

Il pulsante **Debug Tools** (“Strumenti di debug”) è riservato agli amministratori di sistema.

Il pulsante **Report** (Stampe) apre una finestra che elenca tutti i documenti che è possibile stampare (Fig 14). Il pulsante **Report** è presente sia quando c’è un paziente selezionato, sia quando non c’è un paziente selezionato. Se c’è un paziente selezionato, le stampe disponibili sono quelle relative al reparto di appartenenza del paziente (e sono etichettate come “Paziente”). Se non c’è un paziente selezionato, le stampe disponibili sono quelle relative al reparto di appartenenza dell’utente connesso (e sono etichettate come “Generica”).



Ogni utente può essere associato da configurazione a uno o più reparti.

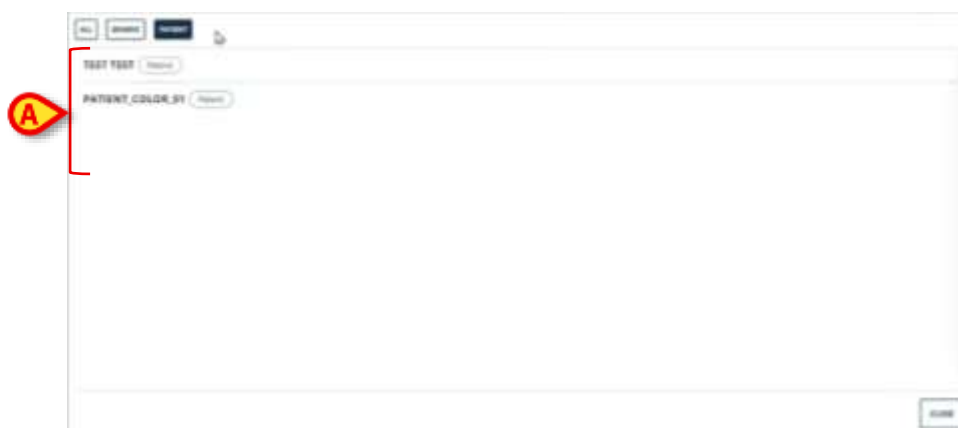


Fig 14

Ogni riga sulla finestra si riferisce a un tipo di documento.

- Cliccare una riga per visualizzare un’anteprima di stampa.

Ogni stampa è etichettata come “Paziente” o “Generica” (Fig 15 **A**).



Fig 15

I pulsanti indicate in Fig 15 **B** permettono di filtrare le stampe visualizzate sulla finestra (solo le “Generiche”, solo quelle del “Paziente” oppure tutte le stampe disponibili).

1.5.1 Modifica password

Per cambiare la password:

- Cliccare il pulsante Utente su Control Bar (Fig 16 **A**).



Fig 16

Si aprirà il seguente menù



Fig 17

- Cliccare su **Change Password** (“Cambia password” - Fig 17 **A**). Si aprirà la schermata seguente (Fig 18).



Fig 18

- Inserire la password attuale nel campo **Old password** (“Password precedente” - Fig 18 **A**).
- Inserire la nuova password nel campo indicato in Fig 18 **B**.
- Digitare di nuovo per conferma la nuova password nel campo **Confirm new password** (“Conferma la nuova password” - Fig 16 **C**).
- Cliccare su **SAVE** (“Salva” - Fig 16 **D**).

1.5.2 Segnalazione di problemi tecnici

Se presente, l'icona  su Control Bar (Fig 19 **A**) permette di notificare un eventuale problema tecnico all'assistenza.

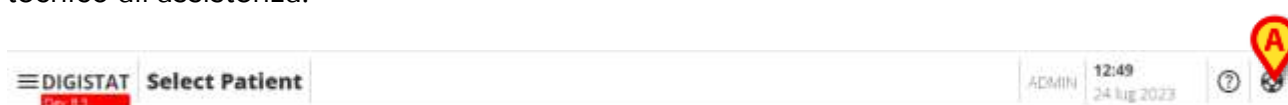


Fig 19



*La presenza dell'icona dipende dalla System Option “EnableUserIssueReporting”.
Si faccia riferimento agli amministratori del sistema per maggiori informazioni.*

Per fare ciò è necessario:

- Cliccare l'icona  (Fig 19 **A**). Si aprirà la finestra seguente (Fig 20).



Fig 20

- Descrivere brevemente il problema all'interno del campo **Description** (“Descrizione” - Fig 20 **A**).
- Cliccare su **Send** (“Spedisci” - Fig 20 **B**).

Sarà fornita una conferma e un numero identificativo della richiesta effettuata.

1.6 Sub-moduli aggiuntivi

I sub-moduli descritti in questo paragrafo possono essere presenti oppure no, a seconda della configurazione del Prodotto nella specifica Struttura Ospedaliera. Tali sub-moduli si aprono cliccando la voce corrispondente su un menu che è visualizzato sotto al pulsante **Paziente**. Le funzionalità di questi sub-moduli sono relative al paziente specifico. Ciò significa che sono disponibili solo se c'è un paziente selezionato.

1.6.1 CDSS Configurator

Il sub-modulo CDSS Configurator può essere abilitato da configurazione come sezione aggiuntiva di Control Bar Web. Per aprire tale sub-modulo:

- Selezionare il paziente.



Si veda il manuale utente di Patient Explorer Web per la procedura di selezione del paziente (documento USR ENG Patient Explorer Web).

Dopo la selezione del paziente, se sono disponibili sub-moduli di Control Bar, l'icona  è visualizzata sul pulsante **Paziente** (Fig 21 A).



Fig 21

- Cliccare l'icona .

Sarà visualizzata una finestra a discesa che elenca i sub-moduli disponibili (Fig 22).

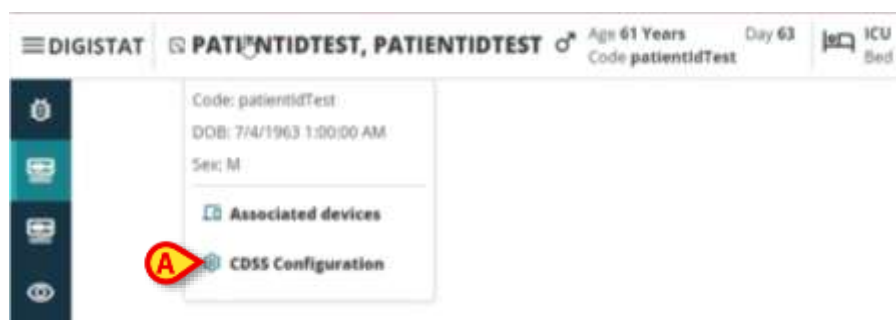


Fig 22

- Cliccare su “CDSS Configuration” (Fig 22 A).

Si aprirà la finestra seguente, che elenca le regole associate al paziente correntemente selezionato (Fig 23).

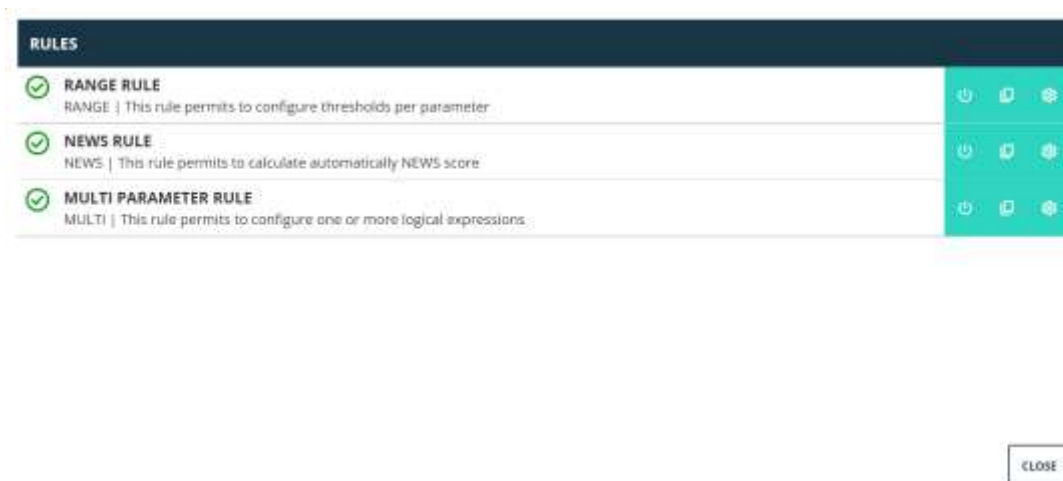


Fig 23

Si veda il manuale utente di CDSS Configurator per la descrizione completa e per le istruzioni d'uso di questo sub-modulo (documento USR ENG CDSS Web).

1.6.2 Identity

Il sub-modulo Identity può essere abilitato da configurazione come sezione aggiuntiva di Control Bar Web. Per aprire tale sub-modulo:

- Selezionare il paziente.



Si veda il manuale utente di Patient Explorer Web per la procedura di selezione del paziente (documento USR ENG Patient Explorer Web).

Dopo la selezione del paziente, se sono disponibili sub-moduli di Control Bar, l'icona è visualizzata sul pulsante **Paziente** (Fig 24 **A**).



Fig 24

- Cliccare l'icona .

Sarà visualizzata una finestra a discesa che elenca tutti i sub-moduli disponibili (Fig 25).

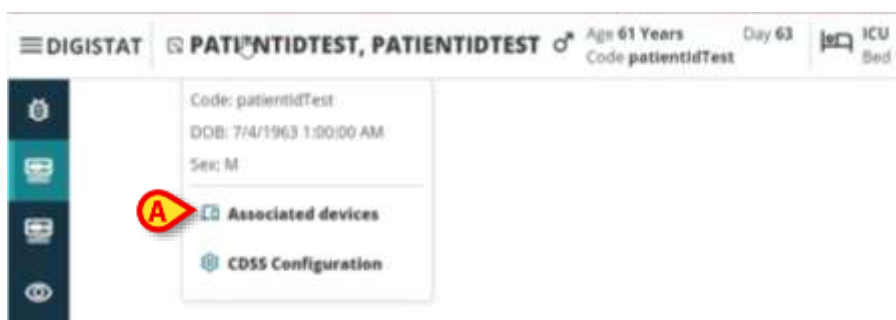


Fig 25

- Cliccare su “Associated devices” (Fig 25 **A**).

Si aprirà la finestra seguente, che elenca i dispositivi associati al paziente correntemente selezionato (Fig 26).

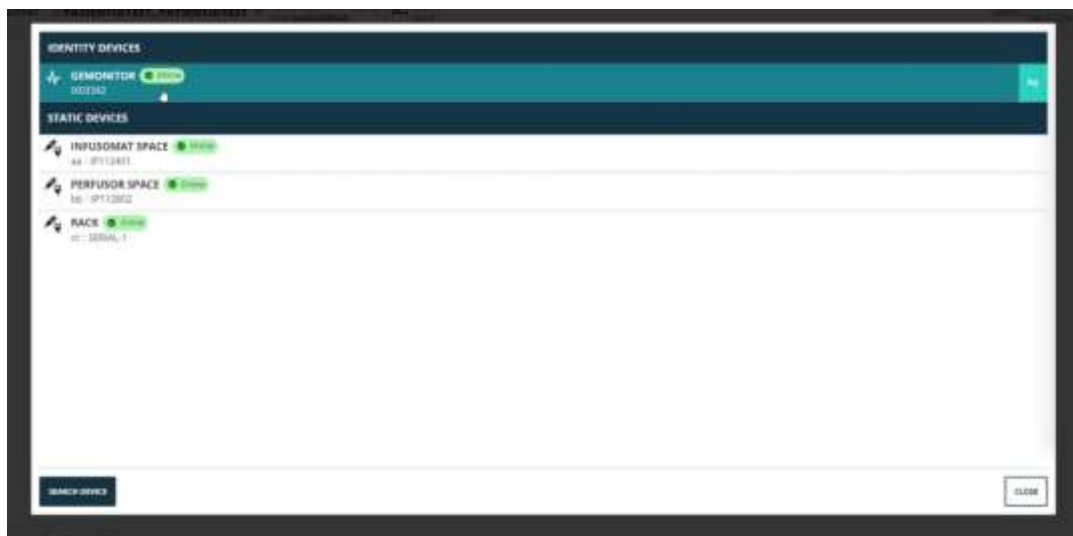


Fig 26

Si veda il manuale utente di Identity per la descrizione completa e per le istruzioni d'uso di questo sub-modulo (documento USR ENG Identity Web).