



Invasive Device Management

(Gestione dispositivi invasivi)

Manuale Utente

Versione 1.0

2023-03-29

Indice

Invasive Device Management (Gestione dispositivi invasivi)	3
1. Descrizione generale	3
2. Elenco dei dispositivi	4
3. La barra comandi	5
4. Come inserire un nuovo dispositivo	6
5. Come modificare i dati di un dispositivo	7
6. Come rimuovere un dispositivo	7
7. Come cancellare un dispositivo inserito	7
8. Come inserire una attività infermieristica	8
9. Come modificare una attività infermieristica	9
10. Come cancellare un'attività infermieristica	9
11. Come aggiungere un elemento a un menù	10


Invasive Device Management (Gestione dispositivi invasivi)



Per informazioni riguardanti l'ambiente del Prodotto, le precauzioni, gli avvisi e l'uso previsto si vedano i documenti USR ITA Digistat Care e/o USR ITA Digistat Docs (a seconda dei moduli installati - Digistat Suite EU) oppure USR ENG Digistat Suite NA (per la Digistat Suite NA). La conoscenza e la comprensione della documentazione appropriate sono obbligatorie per un uso corretto e in sicurezza del modulo IDM, descritto in questo documento.

1. Descrizione generale

Il modulo INVASIVE DEVICE MANAGEMENT (IMD da qui in avanti) può essere usato per gestire i dispositivi del paziente e le azioni infermieristiche collegate a tali dispositivi. Per visualizzare il modulo, selezionarlo tramite l'icona  sulla barra laterale. Si aprirà la pagina seguente (Fig 1).

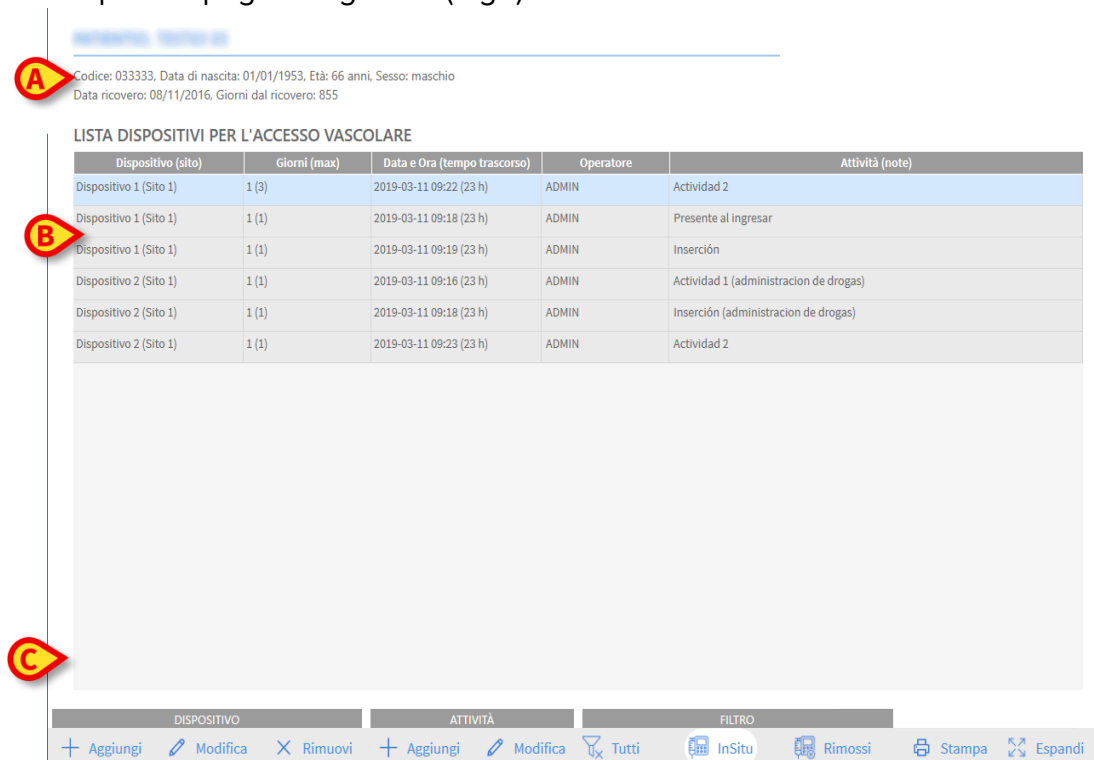

A Codice: 033333, Data di nascita: 01/01/1953, Età: 66 anni, Sesso: maschio
Data ricovero: 08/11/2016, Giorni dal ricovero: 855

B LISTA DISPOSITIVI PER L'ACCESSO VASCOLARE

Dispositivo (sito)	Giorni (max)	Data e Ora (tempo trascorso)	Operatore	Attività (note)
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (3)	2019-03-11 09:22 (23 h)	ADMIN	Actividad 2
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:18 (23 h)	ADMIN	Presente al ingresar
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:19 (23 h)	ADMIN	Inserción
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:16 (23 h)	ADMIN	Actividad 1 (administracion de drogas)
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:18 (23 h)	ADMIN	Inserción (administracion de drogas)
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:23 (23 h)	ADMIN	Actividad 2

C

DISPOSITIVO ATTIVITÀ FILTRO

+ Aggiungi Modifica × Rimuovi + Aggiungi Modifica Tutti InSitu Rimossi Stampa Espandi

Fig 1

I dati del paziente sono in alto, su due righe (Fig 1 **A**): nome del paziente, ID, età e sesso sono visualizzati sulla prima riga; data di ammissione, durata della degenza, peso, altezza, sono visualizzati sulla seconda riga.

I dati relativi ai dispositivi del paziente sono visualizzati nella tabella indicata in Fig 1 **B** (si veda il paragrafo successivo). Un insieme di pulsanti che permettono di eseguire diverse operazioni si trovano sulla barra comandi in fondo alla schermata (Fig 1 **C** – si veda a pagina 5 per la descrizione).

2. Elenco dei dispositivi

Tutti i dispositivi del paziente sono elencati nella tabella mostrata in Fig 2. Nelle diverse colonne della tabella sono specificate le seguenti informazioni:

- Nome del dispositivo e sito – in caso lo stesso tipo di dispositivo compaia più volte, accanto al nome del dispositivo è visualizzato un numero progressivo (ad esempio: CVC, CVC2, CVC3 etc.).
- Giorni di permanenza del dispositivo e numero massimo consentito di giorni di permanenza, nella forma seguente: 3 (4).
- Data e ora di applicazione. Se viene superato il numero massimo indicato di giorni di permanenza la riga è di colore rosso.
- Nome dell'operatore che ha eseguito l'azione.
- Tipo di azione eseguita o, in caso di più azioni sullo stesso dispositivo, ultima azione eseguita. Qui sono visualizzate anche le note dell'utente.

Dispositivo (sito)	Giorni (max)	Data e Ora (tempo trascorso)	Operatore	Attività (note)
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (3)	2019-03-11 09:22 (23 h)	ADMIN	Actividad 2
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:18 (23 h)	ADMIN	Presente al ingresar
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:19 (23 h)	ADMIN	Inserción
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:16 (23 h)	ADMIN	Actividad 1 (administracion de drogas)
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:18 (23 h)	ADMIN	Inserción (administracion de drogas)
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:23 (23 h)	ADMIN	Actividad 2

Fig 2

La tabella può essere visualizzata in forma compatta (come in Fig 2), o espansa (come in Fig 3).

Dispositivo (sito)	Giorni (max)	Data e Ora (tempo trascorso)	Operatore	Attività (note)
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (3)	2019-03-11 09:22 (23 h)	ADMIN	Actividad 2
	1 (3)	2019-03-11 09:10 (23 h)	ADMIN	Inserción (primer día de hospitalización)
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:18 (23 h)	ADMIN	Presente al ingresar
Dispositivo 1 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:19 (23 h)	ADMIN	Inserción
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:23 (23 h)	ADMIN	Actividad 2
	1 (1)	2019-03-11 09:19 (23 h)	ADMIN	Inserción
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:16 (23 h)	ADMIN	Actividad 1 (administracion de drogas)
Dispositivo 2 (Sito 1)	1 (1)	2019-03-11 09:18 (23 h)	ADMIN	Inserción (administracion de drogas)

Fig 3

In modalità compatta è visualizzata solo l'ultima azione per ogni dispositivo. In modalità espansa sono visualizzate tutte le azioni di un dispositivo selezionato.

Si usi il pulsante **Espandi/Riduci** sulla barra comandi per visualizzare la tabella in forma espansa o compatta.

3. La barra comandi

Questi sono i pulsanti che compaiono sulla barra comandi:



Fig 4

Pulsanti relativi al dispositivo:

AGGIUNGI – si usi questo pulsante per aggiungere un nuovo dispositivo.

MODIFICA – si usi questo pulsante per modificare i dati di un dispositivo esistente.

RIMUOVI - si usi questo pulsante per rimuovere un dispositivo.

Pulsanti relativi alle azioni infermieristiche:

AGGIUNGI – si usi questo pulsante per aggiungere una nuova azione.

MODIFICA – si usi questo pulsante per modificare i dati di una azione esistente.

Filtri:

TUTTI – selezionare questo pulsante per visualizzare tutti i dispositivi.

IN SITU - selezionare questo pulsante per visualizzare solo i dispositivi in situ.

RIMOSSI - elezionare questo pulsante per visualizzare solo i dispositivi rimossi.

Si usi il pulsante **Espandi/Riduci** per visualizzare la tabella in forma espansa o compatta.

Il pulsante **Stampa** permette di selezionare e produrre uno dei report configurati.

4. Come inserire un nuovo dispositivo

Per inserire un nuovo dispositivo:

- Cliccare il pulsante “Aggiungi dispositivo” sulla barra comandi. Sarà visualizzata la seguente schermata.

The screenshot shows a web form titled "NUOVO DISPOSITIVO" in blue text. The form contains several input fields and a text area:

- Dispositivo:** A dropdown menu with a downward arrow and a plus sign to its right.
- Sito:** A dropdown menu with a downward arrow and a plus sign to its right.
- Giorni (max):** A text input field.
- Attività:** A dropdown menu with a downward arrow, currently showing "Inserimento".
- Data e ora:** Two fields. The first is a date field showing "13/03/2019" with a calendar icon. The second is a time field showing "09:14" with a clock icon.
- Operatore:** A dropdown menu with a downward arrow and a plus sign to its right, currently showing "ADMIN".
- Note:** A large text area for additional information.

At the bottom of the form is a grey bar with three buttons: "Rimuovi" (with a red X icon), "Ok" (with a green checkmark icon), and "Annulla" (with a blue X icon).

Fig 5

Questa schermata permette di specificare i dati di un nuovo dispositivo.

Tutte le informazioni possono essere inserite o cliccando l'elemento appropriato sui menu a tendina contestuali o digitandole da tastiera. Si faccia uso del pulsante-freccia per aprire i diversi menu. Si veda a pagina 10 per la modalità di inserimento degli elementi ai diversi menù. Le informazioni che qui possono essere specificate sono:

- Nome del dispositivo.
- Sito.
- Numero massimo consentito di giorni di permanenza.
- Attività eseguita.
- Data/ora di applicazione.
- Nome dell'operatore.
- Note eventuali (testo libero).

- Cliccare il pulsante **OK** sulla barra comandi per inserire il dispositivo. Una nuova riga sarà aggiunta alla tabella mostrata in Fig 2 e Fig 3.

Sarà di nuovo visualizzata la schermata principale del modulo (Fig 1).

5. Come modificare i dati di un dispositivo

Per modificare i dati di un dispositivo esistente:

- Cliccare, sulla tabella, la riga corrispondente al dispositivo.
- Cliccare il pulsante **MODIFICA** sulla barra comandi. Si aprirà la schermata contenente i dati del dispositivo selezionato.
- Modificare i dati.
- Cliccare il pulsante **OK** sulla barra comandi.

Sarà di nuovo visualizzata la schermata principale del modulo (Fig 1).

6. Come rimuovere un dispositivo

Per registrare la rimozione di un dispositivo:

- Cliccare, sulla tabella, la riga corrispondente al dispositivo.
- Cliccare il pulsante **MODIFICA** sulla barra comandi.

La riga corrispondente al dispositivo non è cancellata. Il dispositivo è indicato come “rimosso”.

7. Come cancellare un dispositivo inserito

Per cancellare uno dei dispositivi inseriti:

- Cliccare, sulla tabella, la riga corrispondente al dispositivo.
- Cliccare il pulsante **MODIFICA** sulla barra comandi. Si aprirà la schermata contenente i dati del dispositivo selezionato.
- Cliccare il pulsante **CANCELLA** presente sulla barra comandi.

Sarà richiesta conferma tramite una finestra pop-up.

- Cliccare su **Sì** per cancellare il dispositivo.

Sarà di nuovo visualizzata la schermata principale del modulo (Fig 1). La riga corrispondente al dispositivo cancellato sarà scomparsa.

8. Come inserire una attività infermieristica

Per aggiungere una attività infermieristica:

- Cliccare, sulla tabella, la riga corrispondente al dispositivo cui si riferisce l'attività infermieristica da inserire.
- Cliccare il pulsante “**Aggiungi attività infermieristica**” sulla barra comandi. Si aprirà la seguente schermata.

NUOVA ATTIVITÀ INFERMIERISTICA

Dispositivo: Dispositivo 1

Sito: Sito 1

Giorni (max): 3

Attività: +

Data e ora: 13/03/2019 09:15

Operatore: ADMIN +

Note:

Rimuovi Ok Annulla

Fig 6

Questa schermata permette di specificare tutte le informazioni relative ad una nuova attività infermieristica.

I campi posti in alto (Fig 6 **A - Dispositivo, Sito, Massimo giorni**) si riferiscono al dispositivo e non possono essere modificati in questa sede.

I campi **Data/Ora, Operatore** e **Attività** (Fig 6 **B**) possono essere specificati selezionando l'elemento appropriato nei menù a tendina contestuali o inserendo l'informazione da tastiera. Si usino i pulsanti posti accanto al campo per aprire i diversi menu. Si veda a pagina 10 per le modalità di inserimento di nuovi elementi ai menù a tendina. Se necessario, si usi il campo **Note** per inserire note come testo libero.

- Cliccare il pulsante **OK** sulla barra comandi per inserire l'attività infermieristica.

Una nuova attività è così aggiunta al dispositivo selezionato. Sarà visualizzata sulla riga corrispondente al dispositivo come attività più recente.

Sarà di nuovo visualizzata la schermata principale del modulo (Fig 1).

9. Come modificare una attività infermieristica

Per modificare i dati di una attività infermieristica esistente:

- Si utilizzi il pulsante **ESPANDI** sulla barra comandi per visualizzare tutte le attività infermieristiche.
- Cliccare la riga corrispondente all'attività infermieristica da modificare.
- Cliccare il pulsante **MODIFICA attività infermieristica** sulla barra comandi. Sarà visualizzata la schermata contenente i dati dell'attività infermieristica selezionata.
- Modificare i dati.
- Cliccare il pulsante **OK** sulla barra comandi.

Sarà di nuovo visualizzata la schermata principale del modulo (Fig 1).

10. Come cancellare un'attività infermieristica

Per cancellare una delle attività inserite:

- Si utilizzi il pulsante **ESPANDI** sulla barra comandi per visualizzare tutte le attività infermieristiche.
- Cliccare la riga corrispondente all'attività infermieristica da cancellare.
- Cliccare il pulsante **MODIFICA attività infermieristica** sulla barra comandi.

Sarà visualizzata la schermata contenente i dati dell'attività infermieristica selezionata.

- Cliccare il pulsante **CANCELLA** presente sulla barra comandi.

Sarà richiesta conferma tramite una finestra pop-up.

- Cliccare su **Sì** per cancellare l'attività.

Sarà di nuovo visualizzata la schermata principale del modulo (Fig 1). La riga corrispondente all'attività infermieristica cancellata sarà scomparsa.

11. Come aggiungere un elemento a un menù

Quando accanto a uno dei campi è visualizzato il simbolo +, è possibile aggiungere un nuovo elemento ad un menu a tendina esistente in modo che l'elemento possa essere direttamente selezionato in futuro.

Si veda ad esempio in Fig 7 **A**.

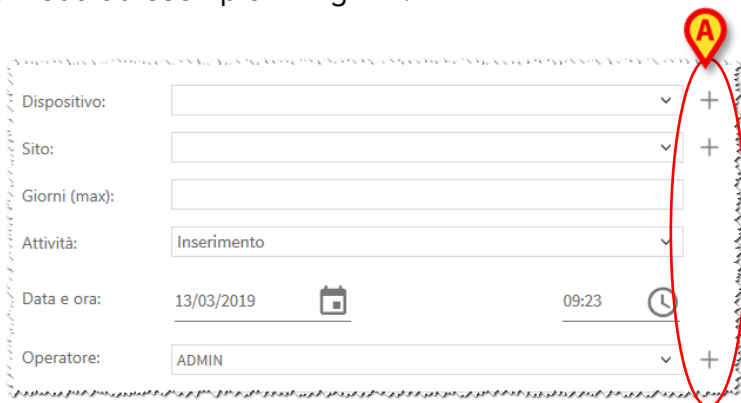


Fig 7

Per fare questo è necessario:

- Cliccare il pulsante + posto accanto al campo. Il campo cambierà nel modo mostrato in Fig 8.

Dispositivo: ✓ ✕

Fig 8

- Digitare il nome dell'elemento.

Dispositivo: ✓ ✕

Fig 9

- Cliccare il pulsante indicato in Fig 9 **A**.

L'elemento viene così inserito nel menù a tendina corrispondente e rimarrà disponibile per essere selezionato direttamente (Fig 10 **A**).

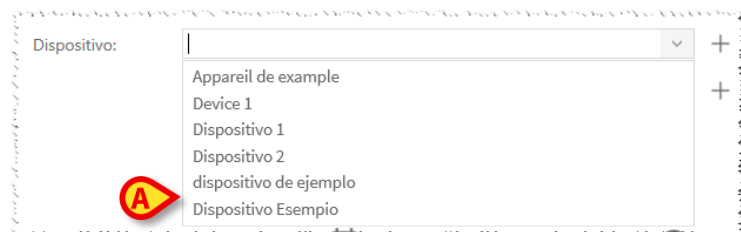


Fig 10