



Control Bar Web Gebruikershandleiding

Versie 5.0

10/3/2025

Inhoud

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Web starten	3
1.2 Inloggen	4
1.2.1 Automatisch inloggen	6
1.2.2 Uitloggen en blijven	7
1.3 Werkruimte	8
1.3.1 Een module kiezen	8
1.4 Control Bar.....	9
1.5 Hoofdmenu.....	10
1.5.1 Wachtwoord wijzigen.....	11
1.5.2 Rapportage van gebruikersproblemen.....	12
1.6 Aanvullende submodules	13
1.6.1 CDSS Configurator	13
1.6.2 Identity	15

1. Control Bar Web



Voor meer informatie over de productomgeving, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en het beoogde gebruik, raadpleegt u de *USR NLD Digistat Care* en/of de *USR NLD Digistat Docs* (afhankelijk van de geïnstalleerde modules - voor de *Digistat Suite EU*) of *USR ENG Digistat Suite NA* (voor *Digistat Suite NA*). Voor een correct en veilig gebruik van de *Control Bar Web* dient u bekend te zijn met het betreffende document.

1.1 Control Bar Web starten

De Control Bar Web starten doet u zo:

- Typ het specifieke adres in de adresbalk van de browser.

De volgende pagina wordt geopend:

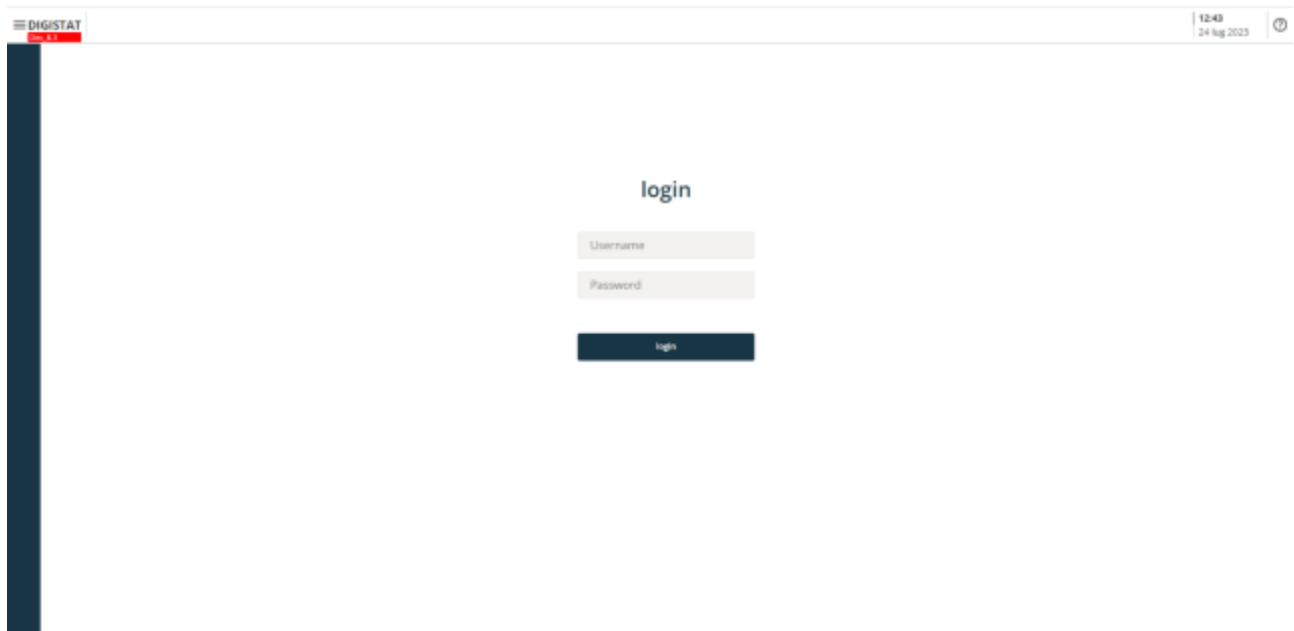


Fig 1

1.2 Inloggen

Om de functies van het systeem te activeren, moet de gebruiker inloggen.

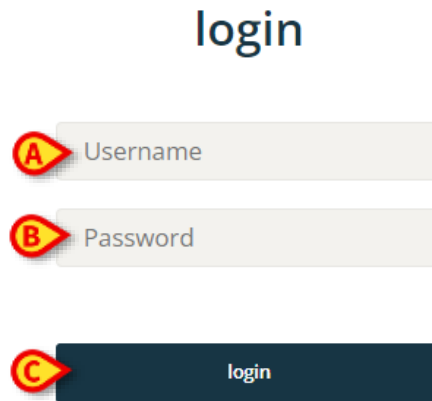


Fig 2

Inloggen doet u zo:

- Voer uw gebruikersnaam in in het veld "Gebruikersnaam" (Fig 2 **A**).
- Voer uw wachtwoord in in het veld "Wachtwoord" (Fig 2 **B**).
- Klik op de knop **Inloggen** (Fig 2 **C**).

De gebruiker is nu ingelogd.



De gebruikersnaam en het wachtwoord worden toegekend door de systeembeheerder. Als u niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, bent u niet gemachtigd om het Product te gebruiken.

Nadat u toegang tot het systeem hebt verkregen, wordt op de knop Gebruiker in de besturingsbalk een lettercombinatie weergegeven dat overeenstemt met de aangemelde **gebruiker** (de lettercombinatie is ADMIN in Fig 3A).



Fig 3



Het is mogelijk om het product zo te configureren dat inloggen via een extern systeem mogelijk is ("single sign on"). In deze gevallen wordt een speciale knop weergegeven op het aanmeldingsscherm.

De gebruiker wiens gegevens worden weergegeven op de Gebruikersknop is verantwoordelijk voor alle acties die op het Product worden uitgevoerd.



Let op: Afhankelijk van de configuratie van uw installatie zijn enkele uitzonderingen mogelijk (bijv. de functionaliteit Automatisch inloggen of “Uitloggen en blijven” – paragrafen 1.2.1 e 1.2.2).

Om misbruik van het systeem te voorkomen, wordt nadrukkelijk aangeraden om uit te loggen voordat u het workstation van het Product verlaat.

Om uit te loggen, klikt u tijdens de werksessie op de knop **Gebruiker**. Het volgende menu wordt geopend (Fig 4).

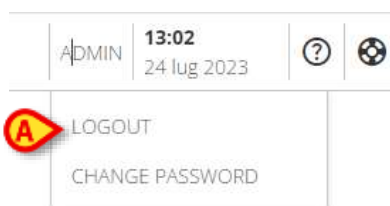


Fig 4

- Klik op **UITLOGGEN** (Fig 4 **A**).

Er wordt een bevestiging van de gebruiker gevraagd. Na bevestiging wordt de gebruiker uitgelogd. Klik opnieuw op de knop **Gebruiker** om terug in te loggen. Het in Fig 2 getoonde scherm wordt opnieuw opnieuw weergegeven.

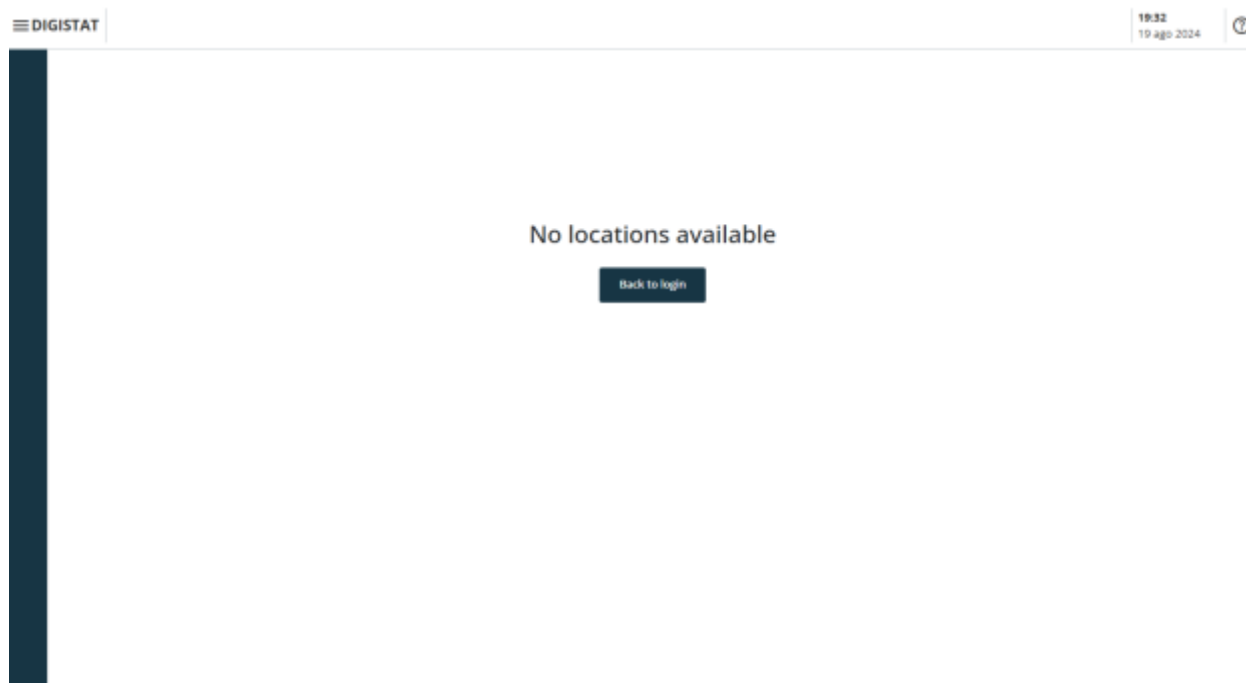


Fig 5

Als de gebruiker geen eerder gekoppelde locatie heeft (zie handleiding *CGF ENG Digistat Suite MDR* voor de configuratie van de koppeling tussen gebruiker en locatie), dan is het niet mogelijk om in te loggen op de module. In dit geval wordt het bericht "Geen locatie beschikbaar" weergegeven (Fig 5). Daarnaast is er een knop **Terug naar aanmelden** om terug te keren naar de aanmeldpagina en opnieuw proberen in te loggen met een nieuwe gebruiker of met dezelfde gebruiker na een gebruiker-locatieassociatie.



Een "Locatie" is een Digistat configuratie-entiteit die overeenkomt met een specifiek gebied van de gezondheidszorgstructuur. Het kan bijvoorbeeld een afdeling, een ziekenhuisafdeling, een operatiekamer enz. zijn, afhankelijk van de vereisten van de gezondheidszorgstructuur. Raadpleeg de systeembeheerders voor meer informatie.

1.2.1 Automatisch inloggen

U kunt Digistat Web zo configureren dat gebruikers zich automatisch kunnen aanmelden. Dat betekent dat wanneer Digistat Web wordt gestart, er al een geconfigureerde gebruiker is ingelogd. Wanneer dit het geval is, zijn sommige geconfigureerde functionaliteiten direct beschikbaar, nog voordat er een aanmeldingsprocedure wordt uitgevoerd.

Om Automatisch Aanmelden in te schakelen, moet u de system option "AutoLoginUsername" configureren. Zie het document DSO ENG System Options voor meer informatie.

Wanneer Automatisch inloggen actief is, kan een gebruiker nog steeds inloggen met zijn of haar persoonlijke inloggegevens. Om dat te doen.

- Klik op de knop **Gebruiker** (Afb. 6 A).

DIGISTAT Select Patient



Afb. 6

Het volgende menu wordt geopend (Afb. 7).



Afb. 7

- Klik op **AANMELDEN ALS...** (Afb. 7 A).

Het inlogscherm wordt weergegeven (Fig 2). Log in zoals beschreven in paragraaf 1.2.



Wanneer de system option “AutoLoginUsername” is geconfigureerd, is de functionaliteit “Huidige gebruiker afmelden” (beschreven in paragraaf 1.2.2) uitgeschakeld.



De functionaliteiten “Automatisch inloggen” en “Uitloggen en blijven” zijn alleen beschikbaar wanneer de applicatie draait in de “Digistat Web Browser”. Raadpleeg de Digistat Suite installatiehandleiding voor meer informatie (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Uitloggen en blijven

Met deze functionaliteit kan de gebruiker zich afmelden, maar toch ingelogd blijven met de gebruikersnaam die hij/zij tijdens de configuratie heeft opgegeven. Dat betekent dat een conventionele gebruiker ingelogd blijft nadat hij/zij is uitgelogd. Om deze functionaliteit te activeren, moet u de system option “LogoutAndRemainUsername” configureren. Zie het document DSO ENG System Options voor meer informatie. Als deze functionaliteit beschikbaar is, is de optie **Huidige gebruiker afmelden** beschikbaar beschikbaar in het menu “Gebruiker” (Afb. 9 A).

“Uitloggen en blijven”

- Klik op de knop **Gebruiker** (Afb. 8 A).

≡ DIGISTAT Select Patient



John Doe 12:48 PM
Sep 4, 2025



Afb. 8

Het volgende menu wordt geopend (Afb. 9).



Afb. 9

- Klik op **HUIDIGE GEBRUIKER AFMELDEN** (Afb. 9 A).

De inloggegevens van de huidige gebruiker verdwijnen via de knop **Gebruiker**, terwijl de inloggegevens van de conventioneel geconfigureerde gebruiker worden weergegeven.

1.3 Werkruimte

Nadat de gebruiker is ingelogd, worden de pictogrammen die overeenstemmen met de beschikbare Digistat Web-modules weergegeven op de zijbalk (Fig 10A). In de werkruimte (Fig 10B) worden de schermen en de functies van de in de zijbalk geselecteerde module weergegeven.



Fig 10

De Control Bar (Fig 10C) wordt beschreven in de hoofdstukken 1.4 en verder. De op dat moment geselecteerde module wordt gemarkeerd.

1.3.1 Een module kiezen

Een module kiezen:

- Klik in de zijbalk op het overeenstemmende pictogram.

Het pictogram wordt gemarkeerd en de functies van de module worden weergegeven in de werkruimte.

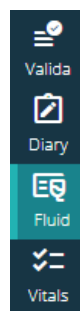


Fig 11

1.4 Control Bar

De Control Bar die in het bovenste gedeelte van het scherm verschijnt, is hetzelfde voor alle modules. De belangrijkste functies ervan worden hieronder opgesomd.



Fig 12

- Met de knop **Menu** (Fig 12 **A**) wordt het hoofdmenu van de Control Bar Web geopend. Zie hoofdstuk 1.5.
- De knop **Patiënt** (Fig 12 **B**). Als er geen patiënt is geselecteerd, kunt u op deze knop klikken om de procedure voor patiëntselectie te starten. Nadat de patiënt geselecteerd is, worden de naam en belangrijkste gegevens van de patiënt weergegeven. Bij opgenomen patiënten worden ook het bednummer en de naam van de afdeling weergegeven. Als er voor de geselecteerde patiënt bepaalde aanvullende functies van Control Bar Web beschikbaar zijn, klikt u op de patiëntknop om een keuzemenu te openen waarmee u toegang krijgt tot deze functies (zie sectie 1.6 voor meer informatie). Als er een hangslotpictogram -  - naast de naam van de patiënt wordt weergegeven, betekent dit dat sommige gegevens of functies van de patiënt zijn beveiligd.



De procedure voor patiëntselectie wordt gewoonlijk uitgevoerd op de module Digistat Patient Explorer Web. Raadpleeg de handleiding van USR NLD Patient Explorer Web (document: USR NLD Patient Explorer Web) voor instructies over de functies van het patiëntbeheer. Er kunnen andere modules worden geconfigureerd voor patiëntselectie in plaats van Patient Explorer Web. Als dit het geval is, raadpleeg dan de specifieke documentatie voor instructies.

- Het veld in Fig 12 **C** kan gebruikt worden om aan te geven dat er meldingen voor de gebruiker zijn.
- De gebruikersknop biedt toegang tot de functies inloggen/uitloggen en wachtwoord wijzigen (Fig 12 **D**).
- Datum- en tijdsaanduiding (Fig 12 **E**).
- Gebruik de **Help-knop** (Fig 12 **F**) om het online hulpcentrum te openen.
- Klik op het pictogram  (Fig 12 **G**) om een probleemrapport aan te maken dat naar de technische ondersteuning wordt gestuurd. Zie hoofdstuk 1.5.2.

1.5 Hoofdmenu

Met de knop **Menu** (Fig 12 **A**) opent u het volgende menu (Fig 13).

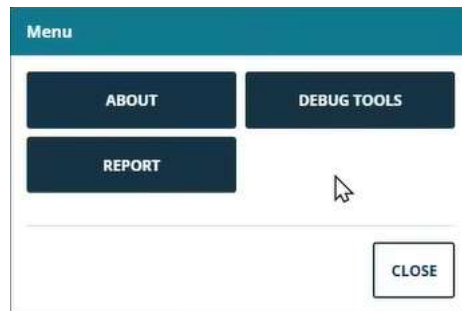



Fig 13

De knop **Info** opent een venster met informatie over de geïnstalleerde versie van Digistat Suite en de bijbehorende licenties (voor meer informatie, zie de specifieke documentatie). De feitelijke labeling van het product is de het veld Info dat weergegeven wordt op de werkstations, mobiele apparaten en webmodules waar de Digistat Suite is geïnstalleerd. De knop **Debuggereedschappen** is voorbehouden aan systeembeheerders.

Met de knop **Rapporten** opent u een venster met een lijst van de beschikbare rapporten (Afb. 14). De knop **Rapporteren** is beschikbaar wanneer er een patiënt is geselecteerd en wanneer er geen patiënt is geselecteerd. Als een patiënt wordt geselecteerd, zijn de beschikbare rapporten die welke betrekking hebben op de ziekenhuisafdeling van de patiënt (aangeduid als 'Patiënt'). Als er geen patiënt is geselecteerd, zijn de beschikbare rapporten die gerelateerd zijn aan de aangemelde ziekenhuiseenheid van de gebruiker (aangeduid als 'Generiek').



Elke gebruiker wordt tijdens de configuratie aan een of meer ziekenhuisafdelingen gekoppeld.

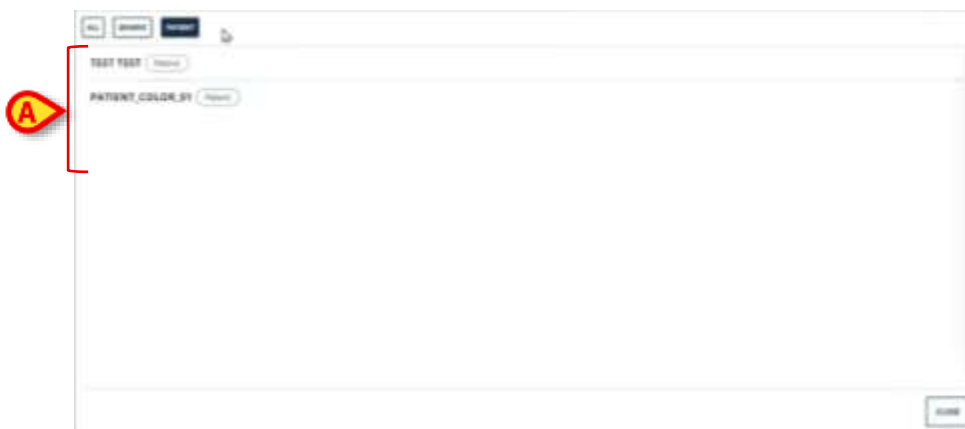

Afb. 14

Elke rij in het venster verwijst naar een afdrukrapport.

- Klik op een rij om een afdrukvoorbeeld te bekijken.

Elk rapport kan worden gelabeld als ‘Patiëntenrapport’ of ‘Generiek rapport’ (Afb. 15 **A**).



Afb. 15

Met de knoppen aangegeven in Afb. 15B kunt u de in het venster weergegeven rapporten filteren (alleen “Algemene rapporten”, alleen “Patiëntenrapporten” of alle beschikbare rapporten).

1.5.1 Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord wijzigen doet u zo:

- Klik op de Control Bar op de knop **Gebruiker** (Fig 16 **A**).



Fig 16

- Het volgende menu wordt geopend (Fig 17).



Fig 17

- Klik op **Wachtwoord wijzigen** (Fig 17 **A**). Het volgende scherm wordt geopend (Fig 18).

CHANGE PASSWORD



Fig 18

- Typ het huidige wachtwoord in het veld "OUD wachtwoord" (Fig 18 **A**).
- Typ het nieuwe wachtwoord in het veld "Nieuw wachtwoord" (Fig 18 **B**).
- Typ het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld "Nieuw wachtwoord bevestigen" (Fig 18 **C**).
- Klik op **Opslaan** (Fig 18 **D**).

1.5.2 Rapportage van gebruikersproblemen

Indien aanwezig, kunt u met het pictogram  op de Control Bar (Fig 19 **A**) een "probleem" melden en, indien nodig, technische ondersteuning krijgen.



Fig 19



De aanwezigheid van het pictogram is gekoppeld aan de systeemoptie `EnableUserIssueReporting`. Meer informatie is verkrijgbaar bij de systeembeheerders.

Om dat te doen:

- Kijkt u op het pictogram  (Fig 19 **A**). Het volgende venster wordt geopend (Fig 20).

Fig 20

- Geef een beschrijving van het probleem op in het veld "Beschrijving" (Fig 20 **A**).
- Klik op **Verzenden** (Fig 20 **B**).

U krijgt een bevestiging en een identificatienummer.

1.6 Aanvullende submodules

De in deze sectie beschreven submodules kunnen, afhankelijk van de configuratie van het product in de zorginstelling, al dan niet aanwezig zijn. Elke submodule wordt geopend door op een specifiek menu-item te klikken in een keuzemenu dat naast de patiëntknop wordt weergegeven. Deze zijn patiëntgebonden, d.w.z. dat ze alleen beschikbaar zijn als er al een patiënt is geselecteerd.

1.6.1 CDSS Configurator

De submodule CDSS Configurator kan worden ingeschakeld door deze te configureren als een aanvullende sectie van Control Bar Web. U opent de submodule CDSS-configurator als volgt:

- Selecteer de gewenste patiënt.



Raadpleeg de handleiding van Patient Explorer Web voor de procedure voor patiëntselectie (document: USR NLD Patient Explorer Web).

Nadat de patiënt is geselecteerd, wordt, indien er aanvullende submodules voor de


Control Bar beschikbaar zijn, het  pictogram weergegeven op de patiëntknop (Afb. 21 **A**).



Afb. 21

- Klik op het pictogram .


Er wordt een keuzemenu weergegeven met de beschikbare aanvullende submodules (Afb. 22).

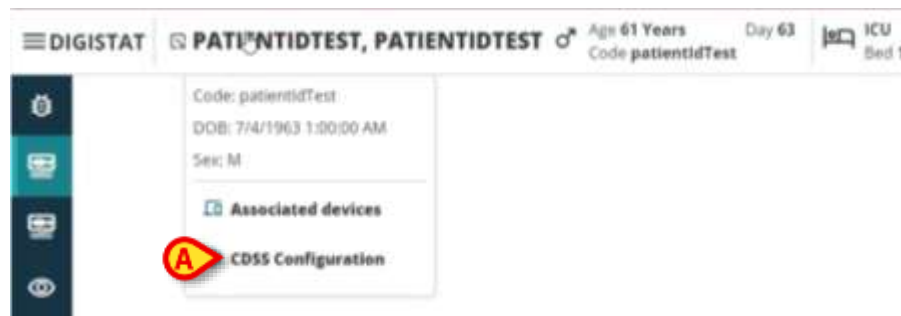

Afb. 22

- Klik op "CDSS Configuration" (Afb. 22 **A**).

Het volgende venster bevat een lijst met regels die aan de op dat moment geselecteerde patiënt (Afb. 23) zijn gekoppeld.

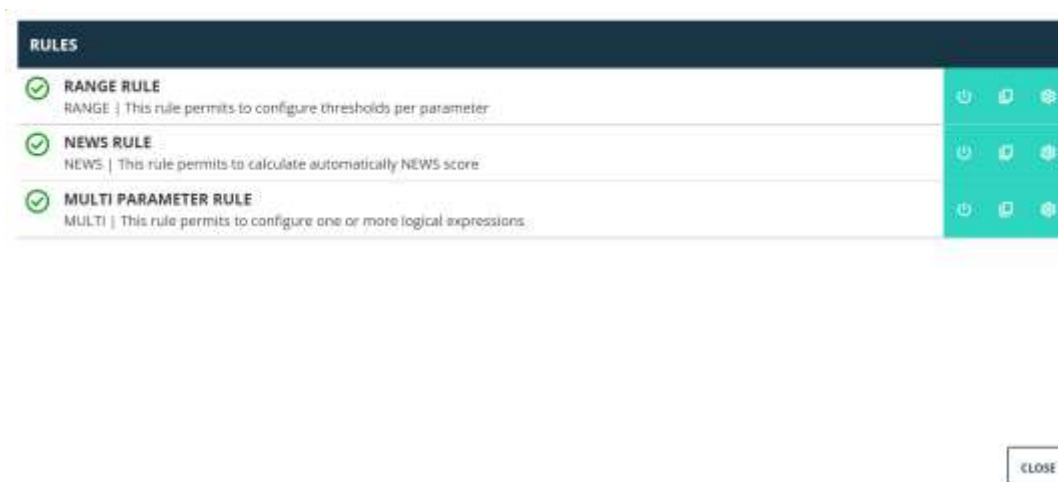

Afb. 23

Raadpleeg de handleiding van CDSS Configurator voor de volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing van deze submodule (document USR NLD CDSS Web).

1.6.2 Identity

De submodule Identity kan worden ingeschakeld door deze te configureren als een aanvullende sectie van Control Bar Web. De submodule Identity opent u als volgt:

- Selecteer de gewenste patiënt.



Raadpleeg de handleiding van USR NLD Patient Explorer Web voor de procedure voor patiëntselectie (document: USR NLD Patient Explorer Web).


Nadat de patiënt is geselecteerd, wordt, indien er aanvullende submodules voor de Control Bar beschikbaar zijn, het  pictogram weergegeven op de patiëntknop (Afb. 24 A).



Afb. 24

- Klik op het pictogram .


Er wordt een keuzemenu weergegeven met de beschikbare aanvullende secties (Afb. 25).

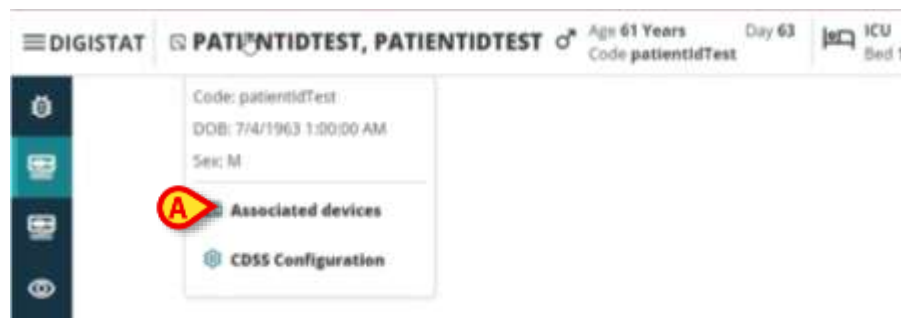

Afb. 25

- Klik op "Gekoppelde apparaten" (Afb. 25 A).

Het volgende venster bevat een lijst van apparaten die aan de op dat moment geselecteerde patiënt zijn gekoppeld (Afb. 26).

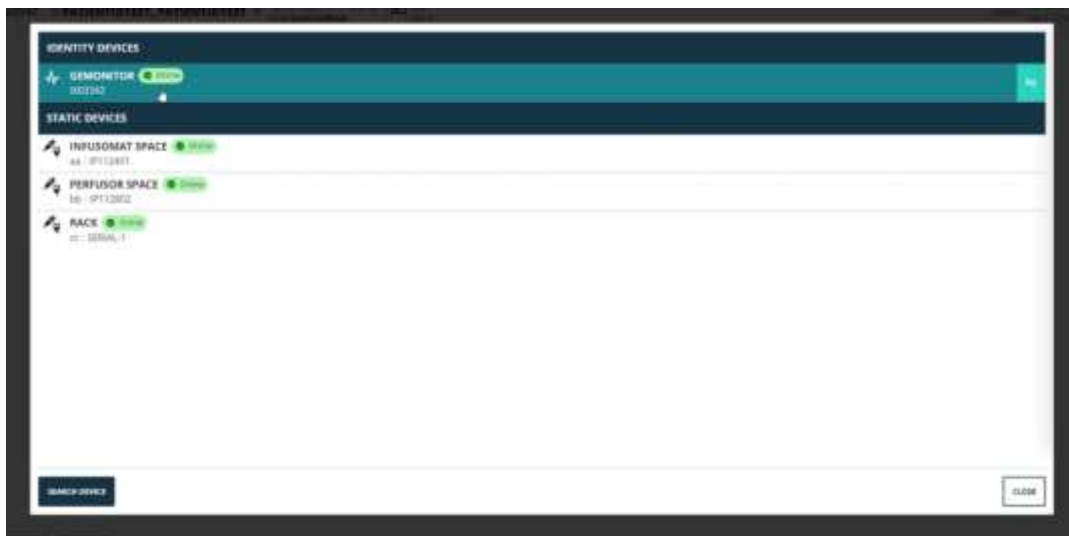

Afb. 26

Raadpleeg de handleiding van Identity voor de volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing van deze submodule (document: USR NLD Identity Web).