



Invasive Device Management

(Invasiv Enhetsstyring)

Brukerhåndbok

Version 3.0

2023-09-21

Innhold

Invasive Device Management (Invasiv Enhetsstyring)	3
1. Oversikt	3
2. Enhetsliste	4
3. Kommandolinje	5
4. Hvordan legge til en ny enhet	6
5. Hvordan redigere enhetsdataene	7
6. Hvordan fjerne en enhet	7
7. Hvordan slette en innlagt enhet	7
8. Hvordan legge til en sykepleieraktivitet	8
9. Hvordan redigere en sykepleieraktivitet	9
10. Hvordan slette en sykepleieraktivitet.....	9
11. Legge et element til i en rullegardinmeny	9


Invasive Device Management (Invasiv Enhetsstyring)

1. Oversikt

INVASIVE DEVICE MANAGEMENT-modulen (IDM heretter) brukes til å administrere pasientenheter og sykepleierhandlinger knyttet til enheter. For å vise modulen:

- Klikk  i sideverktøylinjen.

Følgende side vises (Fig 1).

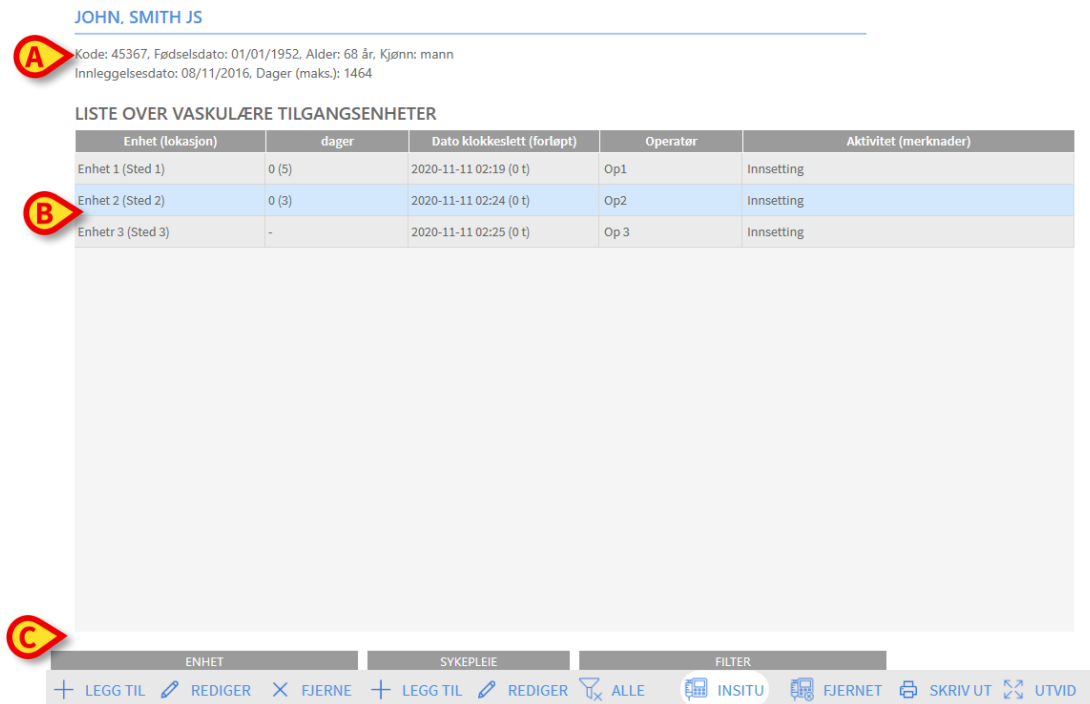

JOHN. SMITH JS

Kode: 45367, Fødselsdato: 01/01/1952, Alder: 68 år, Kjønn: mann
Innleggesdato: 08/11/2016, Dager (maks.): 1464

LISTE OVER VASKULÆRE TILGANGSENHETER

Enhet (lokasjon)	dager	Dato klokkeslett (forløp)	Operator	Aktivitet (merknader)
Enhet 1 (Sted 1)	0 (5)	2020-11-11 02:19 (0 t)	Op1	Innsetting
Enhet 2 (Sted 2)	0 (3)	2020-11-11 02:24 (0 t)	Op2	Innsetting
Enhet 3 (Sted 3)	-	2020-11-11 02:25 (0 t)	Op 3	Innsetting

ENHET **SYKEPLEIE** **FILTER**

+ LEGG TIL ✎ REDIGER ✕ FJERNE + LEGG TIL ✎ REDIGER 🔍 ALLE 📄 INSITU 🗑 FJERNET 🖨 SKRIV UT 🔄 UTVID

Fig 1

Pasientdata vises øverst på skjermen i to rader (Fig 1 **A**): pasientnavn, ID, alder og kjønn vises på første rad, innleggesdato, innleggesvarighet, vekt og høyde vises på andre rad. Pasientens enhetsdata vises i tabellen angitt i Fig 1 **B** (se neste avsnitt for beskrivelse). Et sett med knapper som gjør det mulig å utføre forskjellige handlinger, befinner seg på kommandolinjen nederst på siden (Fig 1 **C** – se side 4 for beskrivelsen).

2. Enhetsliste

Alle enhetene er oppført i tabellen vist i Fig 2. Tabellkolonnene angir følgende informasjon:

- Enhetsnavn og -sted – hvis det er mer enn en enhet av samme type, nummereres de fortløpende. f.eks. CVC, CVC2, CVC3 ...
- Dager siden innsetting og maksimalt antall tillatte dager, i dette skjemaet: 3 (4).
- Dato og klokkeslett for iverksettelse. Hvis mer enn 24 timer har gått, er denne raden gul. Hvis maksimalt antall tillatte dager overskrides (det vil si: Enheten er utløpt), er denne raden rød.
- Navnet på operatøren som utførte handlingen.
- Type handling utført eller siste handling utført hvis flere handlinger er utført på samme enhet. Brukernotater vises også her.

Enhet (lokasjon)	dager	Dato klokkeslett (forløpt)	Operatør	Aktivitet (merknader)
Enhet 1 (Sted 1)	0 (5)	2020-11-11 02:19 (0 t)	Op1	Innsetting
Enhet 2 (Sted 2)	0 (3)	2020-11-11 02:28 (0 t)	Op 3	Aktivitet 1
Enhetr 3 (Sted 3)	-	2020-11-11 02:25 (0 t)	Op 3	Innsetting

Fig 2

Tabellen kan enten være kompakt (som i Fig 2) eller utvidet (som i Fig 3).

Enhet (lokasjon)	dager	Dato klokkeslett (forløpt)	Operatør	Aktivitet (merknader)
Enhet 1 (Sted 1)	0 (5)	2020-11-11 02:19 (0 t)	Op1	Innsetting
Enhet 2 (Sted 2)	0 (3)	2020-11-11 02:28 (0 t)	Op 3	Aktivitet 1
	0 (3)	2020-11-11 02:26 (0 t)	Op 3	Aktivitet 2
	0 (3)	2020-11-11 02:24 (0 t)	Op2	Innsetting
Enhetr 3 (Sted 3)	-	2020-11-11 02:25 (0 t)	Op 3	Innsetting

Fig 3

I kompakt modus vises bare den siste handlingen for en enhet. I utvidet modus vises alle handlingene for en valgt enhet.

Bruk **Utvid**-knappen på kommandolinjen for å utvide eller skjule tabellen.

3. Kommandolinje

Dette avsnittet omhandler knappene på kommandolinjen:



Fig. 4

ENHET:

- **LEGG TIL** – legge til en ny enhet
- **REDIGER** – redigere dataene til en eksisterende enhet
- **FJERNE** – fjerne en enhet

SYKEPLEIE:

- **LEGG TIL** – legge til en ny sykepleierhandling
- **REDIGER** – redigere dataene til en eksisterende handling

FILTER:

- **ALLE** – vise alle enhetene
- **IN SITU** – vise bare enhetene in situ
- **FJERNET** – vise bare enhetene som er fjernet

Bruk **Skriv ut**-knappen for å skrive ut rapporten om konfigurerte invasive enheter.

Bruk **Utvid/skjul**-knappen for å enten utvide eller skjule tabellen.

4. Hvordan legge til en ny enhet

For å legge til en ny enhet:

- Under ENHET, klikk på **Legg til** i kommandolinjen.

Følgende skjermbilde vises.

NY ENHET

Enhet: +

Sted: +

Maks. dager:

Aktivitet: +

Dato/Tid:  

Operatør: +

Notater:

✕ SLETT

✓ OK

✕ AVBRYT

Fig 5

Dette skjermbildet gjør det mulig å angi dataene for den nye enheten. All informasjon kan legges inn enten ved å velge riktig element i rullegardinmenyene eller skrive i de aktuelle feltene. Bruk pil ned for å åpne de forskjellige menyene. Se side 9 for detaljer om å legge elementer til i menyene. Informasjonen som kan angis her er:

- Enhetsnavn.
- Sted.
- Maksimalt antall tillatte dager.
- Utført aktivitet.
- Dato/klokkeslett for iverksettelse.
- Operatørens navn.
- Mulige merknader (fritekstfelt).

- Klikk **OK** på kommandolinjen for å legge til enheten.

En ny rad legges til i tabellen vist i Fig 2 og Fig 3. Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

5. Hvordan redigere enhetsdataene

For å redigere dataene til en eksisterende enhet:

- Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle enheten i tabellen.
- Under ENHET, klikk på **Rediger** i kommandolinjen.

Et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte enheten vises.

- Rediger dataene.
- Klikk **OK** på kommandolinjen.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

6. Hvordan fjerne en enhet

For å registrere fjerning av enheten:

- Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle enheten i tabellen.
- Under ENHET, klikk på **Fjern** på kommandolinjen.

MERKNAD: Raden som tilsvarer enheten slettes ikke. Enheten merkes som «fjernet».

7. Hvordan slette en innlagt enhet

For å slette en av de innlagte enhetene:

- Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle enheten i tabellen.
- Under ENHET, klikk på **Rediger** i kommandolinjen.

Et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte enheten vises.

- Klikk på **Slett** på kommandolinjen.

Bekreftelse er påkrevd.

- Klikk på **JA** for å slette enheten.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1). Raden som tilsvarer den slettede enheten vises ikke lenger.

8. Hvordan legge til en sykepleieraktivitet

For å legge til en ny sykepleieraktivitet:

- I tabellen klikker du på raden som tilsvarer enheten som sykepleieraktiviteten refererer til.
- Under SYKEPLEIE, klikk på **Legg til** på kommandolinjen.

Følgende skjermbilde vises.

LEGG TIL NY SYKEPLEIE

Enhet: Enhet 2

Sted: Sted 2

Maks. dager: 3

Aktivitet: +

Dato/Tid: 11/11/2020 14:26

Operatør: ADMIN +

Notater:

X SLETT ✓ OK X AVBRYT

Fig 6

Dette skjermbildet gjør det mulig å spesifisere dataene for den nye sykepleieraktiviteten. Feltene øverst på skjermen (Fig 6 **A - Enhet, Sted, Maks. dager**) refererer til enheten og kan ikke redigeres her.

Feltene **Aktivitet**, **Dato/klokkeslett** og **Operatør** (Fig 6 **B**) kan angis enten ved å velge riktig element fra rullegardinmenyene eller ved å skrive i de aktuelle feltene. Bruk ned-pilene ved siden av feltene for å åpne de forskjellige menyene. Se side 9 for detaljert beskrivelse av å legge elementer til i menyene. Bruk eventuelt boksen **Notater** for å legge til notater som fritekst.

- Klikk **OK** på kommandolinjen for å legge til sykepleieraktiviteten.

En ny sykepleieraktivitet legges til på enheten og vises i enhetsraden som den nyeste handlingen. Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

9. Hvordan redigere en sykepleieraktivitet

For å redigere dataene for en eksisterende sykepleieraktivitet:

- Klikk på **Utvid** på kommandolinjen for å vise alle sykepleieraktiviteter.
- Klikk på raden som tilsvarer sykepleieraktiviteten som skal redigeres.
- Under SYKEPLEIE, klikk på **Rediger** på kommandolinjen.

Det vises et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte sykepleieraktiviteten.

- Rediger dataene.
- Klikk **OK** på kommandolinjen.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

10. Hvordan slette en sykepleieraktivitet

For å slette en eksisterende sykepleieraktivitet:

- Klikk på **Utvid** på kommandolinjen for å vise alle sykepleieraktiviteter.
- Klikk på raden som tilsvarer sykepleieraktiviteten som skal slettes.
- Under SYKEPLEIE, klikk på **Rediger** på kommandolinjen.

Det vises et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte sykepleieraktiviteten.

- Klikk på **Slett** på kommandolinjen.

Bekreftelse er påkrevd.

- Klikk **Ja** for å slette sykepleieraktiviteten.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1). Raden som tilsvarer den slettede aktiviteten vises ikke lenger.

11. Legge et element til i en rullegardinmeny

Når symbolet + (pluss) vises, er det mulig å legge til et nytt element i en eksisterende rullegardinmeny, slik at elementet er klart til å velges i fremtiden (Fig. 7 **A**).



Fig. 7

For å legge til et nytt element i en eksisterende rullegardinmeny:

- Klikk på **+** ved siden av det aktuelle feltet.

Feltet endres som vist i Fig. 8.



Fig. 8

- Skriv inn elementets navn i det valgte feltet (enten **Enhet** eller **Sted** eller **Aktivitet** i Fig. 7).



Fig. 9

- Klikk på ✓ **Bekreft** (Fig. 9 **A**).

Elementet settes inn i den aktuelle rullegardinlisten og kan velges fra det øyeblikket for alle pasienter (Fig. 10 **A**).

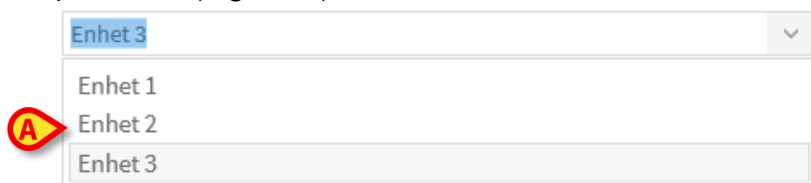


Fig. 10