



On Line Mobile Brukerhåndbok

Versjon 4.0

2023-10-17

Innhold

On Line Mobile	3
1. Introduksjon.....	3
2. Visning av data	3
3. Datainnsamling.....	3
4. Oppstart av On Line Mobile	4
5. Side med pasientliste.....	5
6. Sidelisteskjerm.....	6
7. On Line-sider	7
7.1. Diagrammer	7
7.1.1. Diagrammer beskrivelse	8
7.1.2. Kommandolinjen	10
7.2. Rutenett.....	11
7.2.1. Rutenettbeskrivelse	12
7.2.2. Kommandolinjen	13
7.3. Mikrobiologi	14
7.3.1. Overskrift.....	15
7.3.2. Filtre.....	15
7.3.3. Datarutenett	16
7.4. Laboratorium.....	17
7.4.1. Laboratorium – Datarutenett	18

On Line Mobile



For informasjon om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tiltenkt bruk, se USR NOR Digistat Care og/eller USR NOR Digistat Docs (avhengig av modulene som er installert - for Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (for Digistat Suite Na). Kunnskapen og forståelsen av det aktuelle dokumentet er obligatorisk for en riktig og sikker bruk av On Line Mobile, beskrevet i dette dokumentet.



Funksjonene og funksjonalitetene i On Line Mobile-modulen blir tilgjengelige når brukeren har logget inn. En popup-melding informerer brukeren hvis applikasjonen krever innlogging.

1. Introduksjon

On Line Mobile er et webprogram som viser innkommende data fra de medisinske enhetene som er tilkoblet pasienten (for eksempel: monitor, respirator, laboratorium osv.). Innsamlede rådata kan integreres og valideres av brukeren for å opprette en nøyaktig og lesbar brukerdokumentasjon.

Programmet kan også konfigureres for tilkobling til andre Digistat®-moduler og visning av deres data (for eksempel Digistat® Diary, Digistat® Connect).

2. Visning av data

Data kan vises i diagrammer. Måten data vises på er svært tilpassbar. Referer til systemadministratorene for tilpasningsalternativer. Tallene i denne håndboken viser et konfigurasjonseksempel.

3. Datainnsamling

Data kan enten samles inn automatisk eller registreres av brukere manuelt.

Automatisk innsamling er for parametere som overføres av medisinsk utstyr med grensesnitt (for eksempel: respiratorer, pasientmonitorer), eller av et laboratorium (for eksempel: prøveresultater).

Med manuell redigering kan brukere kontrollere og validere data for å eliminere artefakter og redunansdata for å sette inn verdier når automatisk innsamling av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig.

4. Oppstart av On Line Mobile

Slik starter du On Line Mobile-modulen:

- trykk på den tilsvarende raden på skjermen på den håndholdte enheten (Fig 1).

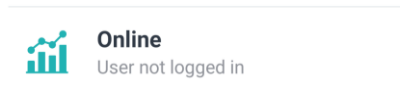


Fig 1

Siden med On Line Mobiles pasientliste åpnes (Fig 2):

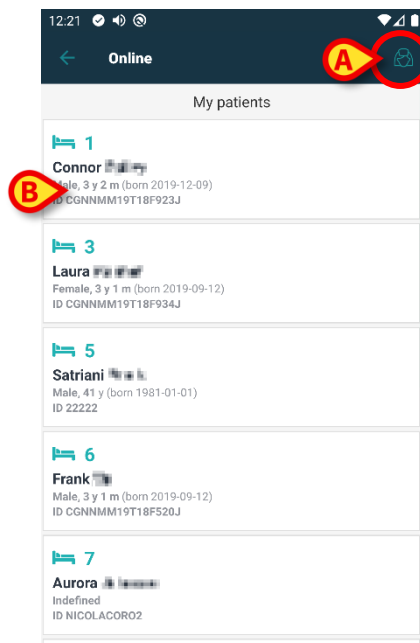


Fig 2

On Line Mobile krever at du velger en pasient. Hvis ingen pasient er valgt, kommer en tom skjerm opp som minner om at «denne modulen krever en pasient». Se avsnitt 5.

5. Side med pasientliste

On Line Mobiles pasientlisteside (Fig 2) viser pasientlisten inkludert i («MyPatients»)-listen. Les dokumentet *USR NOR Mobile Launcher* for mer informasjon om «MyPatients»-listen.

- Trykk på «MyPatients»-knappen (Fig 2 **A**) for å administrere «MyPatients»-listen.

Hver pasient representeres av en flis (Fig 3).



Fig 3

Følgende informasjon vises i flisen (tilpassbar):

- Sengenummer (hvis kjent – Fig 3 **A**);
 - Pasientdata (kjønn, alder, fødselsdato, pasient-ID – Fig 3 **B**);
 - Navnet på pasienten i sengen (Fig 3 **C**).
- Trykk på pasientflisen (f.eks. Fig 2 **B**) for å få tilgang til sidelisteskjermen og administrere relaterte On Line-sider. Se avsnitt 6.

6. Sidelisteskjerm

Sidelisteskjermen viser alle On Line Mobile-sidene, og hver enkelt viser tilgjengelige data for den valgte pasienten i diagrammer.

Ulike On Line Mobile-sider kan konfigureres for samme pasient, der hver enkelt fokuserer på et delsett med parametere. Ulike ikoner kan kobles til under konfigureringen for å symbolisere hva slags data siden inneholder.



Referer til systemadministratorene for de eksisterende konfigurasjonsalternativene.

Sidelisteskjermen har to områder: et overskriftsområde med pasientens hoveddata (Fig 4 **A**) og listen over On Line-sider som er konfigurert for pasientene (Fig 4 **B**).

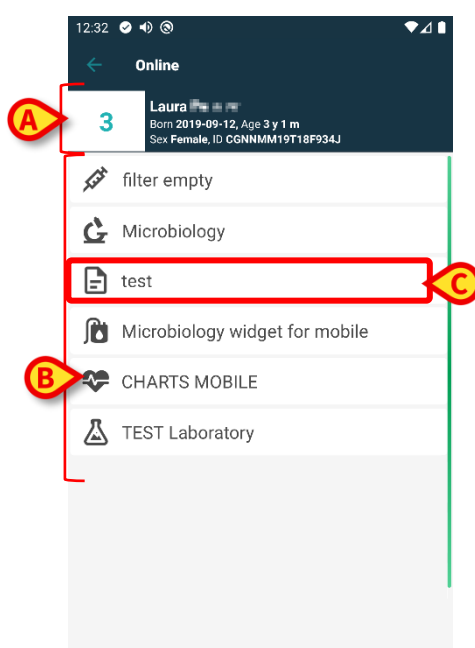


Fig 4

Overskriftsområdet (Fig 4 **A**) viser den samme informasjonen som vises i pasientflisen på pasientlisteskjermen (beskrevet i avsnitt 5).

- Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle On Line-siden (f.eks. Fig 4 **C**) for å få tilgang til den (Fig 5). Les avsnitt 7.


7. On Line-sider

Det er fire mulige sidetyper:

- 1 - "Chart" viser data fra de konfigurerte pasientenhetene i diagrammer.
- 2 - "Grid" viser data fra de konfigurerte pasientenhetene i rutenett.
- 3 – "Mikrobiologi", viser dataene fra mikrobiologilaben i et rutenett.
- 4 – "Laboratorium", viser laboratoriumsdataene i rutenett.

7.1. Diagrammer

En «Diagram»-side (Fig 5) viser tilgjengelige data for den valgte pasienten i diagrammer.

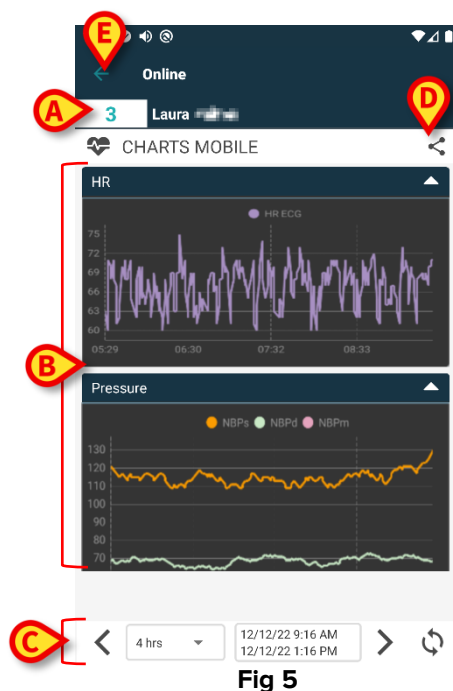

- Sengenummer og pasientnavn vises øverst (Fig 5 A).
 - Diagrammene vises på siden (Fig 5 B). Diagrammer er beskrevet i avsnitt 7.1.1.
 - Et nedre navigeringsfelt (Fig 5 C) gjør det mulig å navigere diagrammer frem og tilbake i tid. Navigeringsfeltet beskrives i avsnitt 7.1.2.
 -  ikonet angitt i Fig 5 E gjør det mulig å dele tilgjengelige data.
- For å gjøre dette:

- Trykk på ikonet . Følgende vindu åpnes (Fig 6).

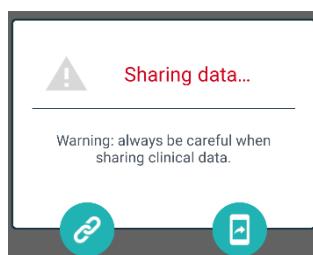


Fig 6

-knappen kopierer Digistat Mobile-koblingen til utklippstavlen, og gjør det mulig å dele den via appene tilgjengelig på den håndholdte enheten.

-knappen gjør det mulig å dele skjermbilde fra gjeldende side.



«Del»-funksjonen kan aktiveres eller ikke i henhold til konfigurasjon. Referer til systemadministratorene for de tilgjengelige konfigurasjonsalternativene.

- Klikk på **Tilbake**-knappen (Fig 5 E) for å gå tilbake til Sidelisteskjermen (Fig 4).

En melding informerer brukeren hvis ingen diagrammer er konfigurert for den aktuelle pasienten.

En melding informerer brukeren når klokkeslettet byttes fra vintertid til sommertid og omvendt.

7.1.1. Diagrammer beskrivelse

Trendene for de konfigurerte parameterne vises i diagrammer (Fig 7).

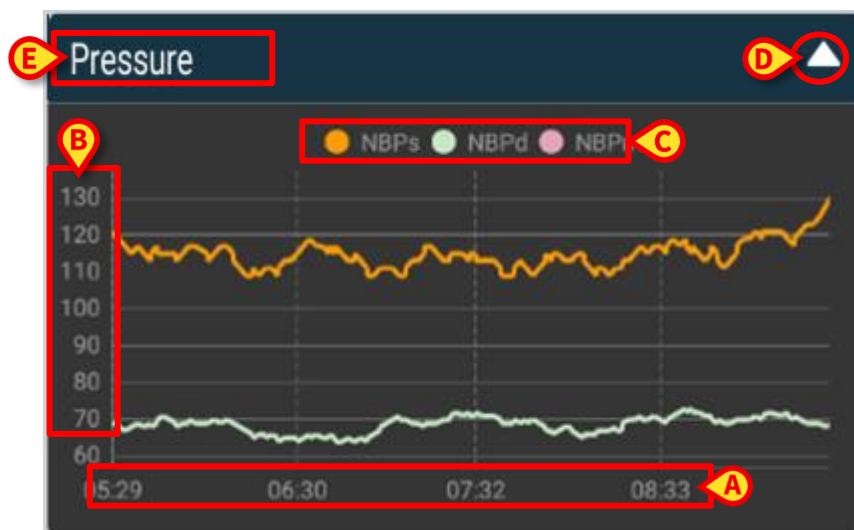


Fig 7

Diagramnavnet finnes øverst (Fig 7 E).

Den horisontale aksen (Fig 7 A) representerer tid.

Den vertikale aksen (Fig 7 B) indikerer de viste parameterens verdi. To verdiskalaer kan brukes: en til venstre; en til høyre.

Navnene på de representerte parameterne vises over diagrammet (Fig 7 C). Fargen på skriften tilsvarer fargen som er brukt i diagrammet for å tegne opp parameterens trend.

- Klikk på diagrammet for en dynamisk visning av verdiene som tilhører den angitte posisjonen. Følgende popup-vindu åpnes (Fig 8):

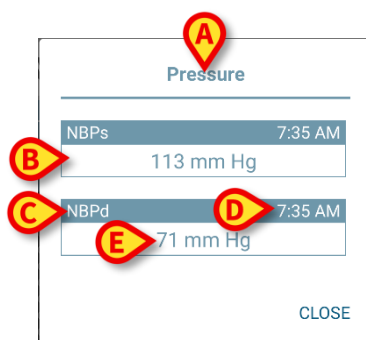


Fig 8

Navnet på popup-vinduet (Fig 8 **A**) er det samme som diagrammet.

En boks vises for hver parameter (Fig 8 **B**) som rapporterer parameternavnet (Fig 8 **C**), tidsstempet for målingen (Fig 8 **D**) og parameterverdien (Fig 8 **E**). Måleenheten for hver parameter vises ved siden av parameterverdien.

- Trykk på **Lukk**-knappen for å lukke popup-vinduet.
- Klikk på diagrammet og dra det til venstre eller høyre for å tegne et vertikalt markørfelt (Fig 9 **A**).

Verdiene som samles inn samtidig utheves i de andre diagrammene på siden.

Et varslingsvindu nederst (Fig 9 **B**) viser de nærmeste verdiene som tilsvarer valgt tid i henhold til et konfigurert område.

- Trykk på **Lukk**-knappen (Fig 9 **C**) for å lukke varslingsvinduet.
- Klikk på **Info**-knappen (Fig 9 **D**) for å åpne popup-vinduet med detaljert parameterinformasjon (Fig 8).

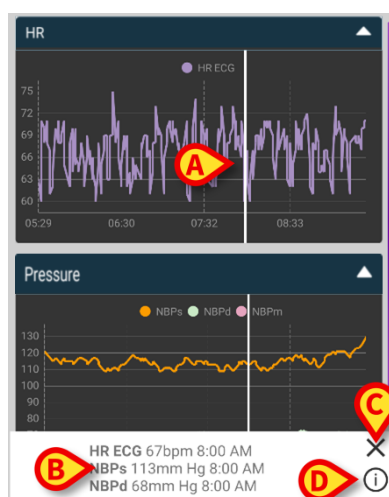


Fig 9

- Trykk på opp-pilen (Fig 7 **D**) for å skjule diagrammet.



Se dokumentet *CFG NOR On Line Validation* for å tilpasse skrifttype og farger på diagrammene i *On Line Mobile*-modulen.

Alternativt tema

For On Line Mobile-diagrammer kan et annet tema (hvit bakgrunn) velges under konfigurasjonen (se Fig 10 nedenfor). Hvis du vil aktivere dette alternativet, kontakt systemadministratorene.

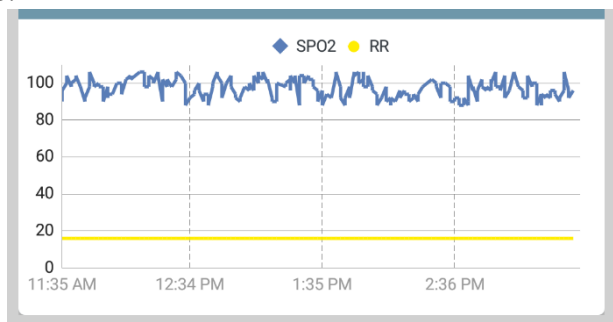


Fig 10

7.1.2. Kommandolinjen

Kommandolinjen i On Line Mobile (Fig 11) har verktøy som gjør det mulig å navigere diagrammene.

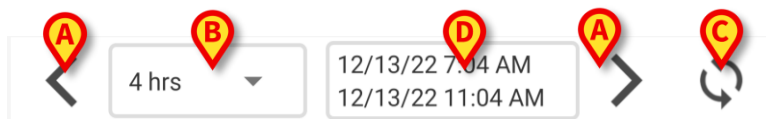


Fig 11

- Bruk pilknappene (Fig 11 **A**) for å bla gjennom innholdet på skjermen til venstre og høyre.
- Velg intervallmenyen (Fig 11 **B**) for tidsperioden som skal vises. Intervallmenyen vises nedenfor:

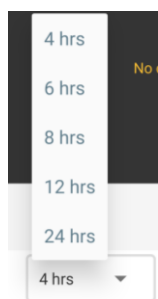


Fig 12

- Klikk på **Oppdater nå**-knappen (Fig 11 **C**) for å laste inn skjerminnholdet på nytt.

Tidsintervallboksen (Fig 11 **D**) angir tidsintervallen som vises i diagrammet.

7.2. Rutenett

En "Grid"-side (Fig 13) viser i rutenett de tilgjengelige dataene for den valgte pasienten.

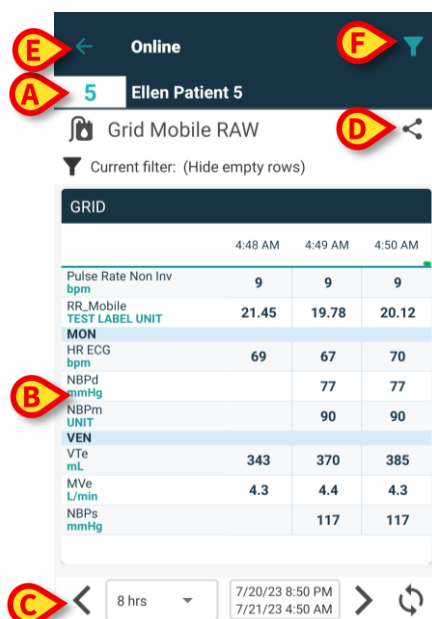


Fig 13

- Sengenummer og pasientnavn vises øverst (Fig 13 A).
- Rutene vises i sideteksten (Fig 13 B - Gitter er beskrevet i avsnitt 7.1.1).
- En bunnnavigasjonslinje (Fig 13 C) gjør det mulig å navigere rutenettene frem og tilbake i tid. Navigasjonslinjen er beskrevet i avsnitt 7.1.2.
-  ikonet angitt i Fig 13 E gjør det mulig å dele tilgjengelige data.

For å gjøre dette:

- Trykk på ikonet . Følgende vindu åpnes (Fig 14).

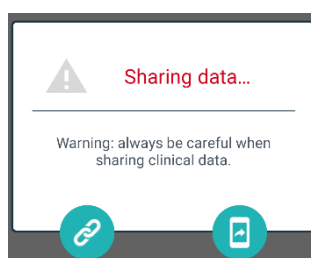


Fig 14

-knappen kopierer Digistat Mobile-koblingen til utklippstavlen, og gjør det mulig å dele den via appene tilgjengelig på den håndholdte enheten.

-knappen gjør det mulig å dele skjermbilde fra gjeldende side.



«Del»-funksjonen kan aktiveres eller ikke i henhold til konfigurasjon. Referer til systemadministratorene for de tilgjengelige konfigurasjonsalternativene.

- Trykk på  ikon (Fig 13 F) for å filtrere innholdet på skjermen. Se avsnitt 7.3.2 for filterbeskrivelsen.

- Klikk på **Tilbake**-knappen (Fig 13 E) for å gå tilbake til Sidelisteskjermen (Fig 4).

En melding informerer brukeren hvis det ikke er konfigurert tavler for den valgte pasienten.
En melding informerer brukeren når klokkeslettet byttes fra vintertid til sommertid og omvendt.

7.2.1. Rutenettbeskrivelse

Verdiene til de konfigurerte parameterne vises i rutenett (Fig 15).

Current filter: (Hide empty rows)

A GRID

	4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTe mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPs mmHg		117	117

Fig 15

Rutenettnavnet er øverst (Fig 15 A). Den første kolonnen viser navnet på parameterne (Fig 16 A) og, på samme rad, den tilsvarende måleenheten (Fig 16 B).

4:48 AM

Pulse Rate Non Inv bpm	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45
MON	
HR ECG bpm	69
NBPd mmHg	

A
B

Fig 16

Følgende kolonner tilsvarer anskaffelsen av et sett med parametere. Anskaffeshastigheten er vanligvis ett minutt (konfigurerbar). Datoen og klokkeslettet da settet med data innhentes vises øverst i kolonnen (Fig 17 A). Derfor inneholder hver kolonne verdiene til alle parameterne som er innhentet på et bestemt tidspunkt.

C Current filter: (Hide empty rows)

GRID			
	A 4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
B HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTc mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPc mmHg		117	117

Fig 17

Verdiene til en parameter kan leses på den tilsvarende raden. Derfor viser hver rad parameterendringene i tid. I Fig 17 **B**, for eksempel, er HR-EKG-verdiene omringet.

Under konfigurasjonen kan parametere grupperes for å lette lesingen. Navnene på grupper kan leses på rader med forskjellig farge (Fig 18 **A** - i eksemplet her vist er MON for Monitor, VEN er for Ventilator).

A	MON			
	HR ECG bpm	69	67	70
	NBPd mmHg		77	77
	NBPm UNIT		90	90
A	VEN			
	VTc mL	343	370	385
	MVe L/min	4.3	4.4	4.3
	NBPc mmHg		117	117

Fig 18

Hvis et filter er aktivt, plasseres teksten ved siden av  ikonet indikerer gjeldende filter (Fig 17 **C**).

7.2.2. Kommandolinjen

Navigasjonslinjen nederst (Fig 19) inneholder verktøy som gjør det mulig å navigere i rutenettene.

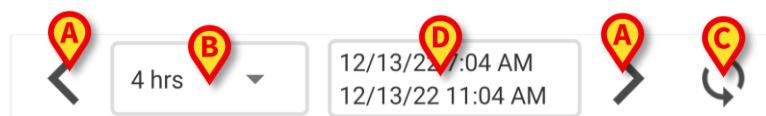


Fig 19

- Bruk pilknappene (Fig 19 **A**) for å bla gjennom innholdet på skjermen til venstre og høyre.

- Velg intervallmenyen (Fig 19 **B**) for tidsperioden som skal vises. Intervallmenyen vises nedenfor:

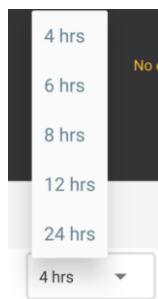


Fig 20

- Klikk på **Oppdater nå**-knappen (Fig 11 **C**) for å laste inn skjerminnholdet på nytt.

Tidsrom-boksen (Fig 19 **D**) indikerer tidsintervallet som vises på rutenettet.

7.3. Mikrobiologi

Mikrobiologidata vises på en dedikert sidetype. Fig 21 viser et eksempel.

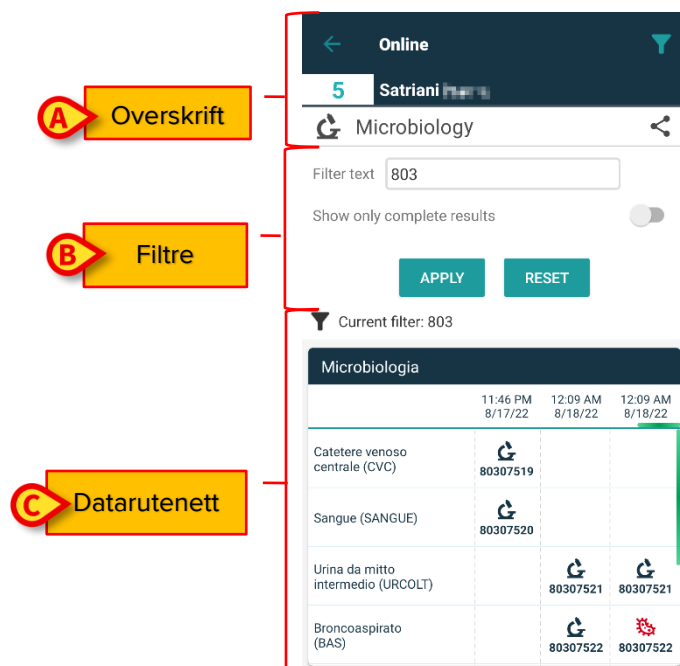


Fig 21

Siden er delt inn i tre områder:

- Overskrift, beskrevet i avsnitt 7.3.1.
- Filtre, beskrevet i avsnitt 7.3.2. Bruk -ikonet for å vise filterområdet (Fig 22 **D**). Bruk **Tilbakestill**-knappen for å skjule det (Fig 24 **D**).
- Datarutenett, beskrevet i avsnitt 7.3.3.

7.3.1. Overskrift

Fig 22 viser overskriftsområdet.

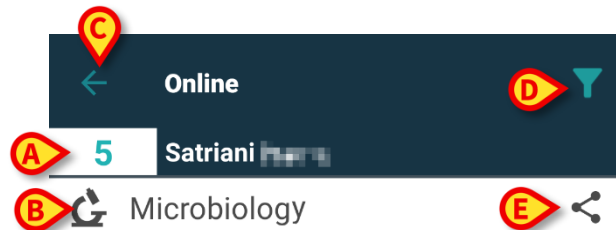


Fig 22

Sengenummer og pasientnavn vises øverst (Fig 22 A).

Sidenavnet er angitt i Fig 22 B.

Tilbake-knappen (Fig 22 C) gjør det mulig å gå tilbake til Sideliste-skjermen (Fig 4).

Filter-ikonet (Fig 22 D) gjør det mulig å vise filterområdet.

Del-ikonet angitt i Fig 22 E gjør det mulig å dele tilgjengelige data.

For å gjøre dette:

- Trykk på ikonet . Følgende vindu åpnes (Fig 23):

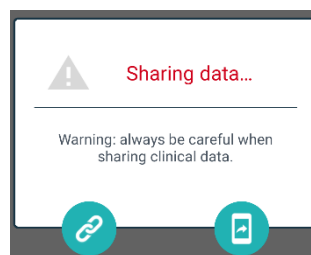


Fig 23

Link-ikonet kopierer Digistat Mobile-koblingen til utklippstavlen, og gjør det mulig å dele den via appene tilgjengelig på den håndholdte enheten.

Skjermbilde-ikonet gjør det mulig å dele skjermbilde fra gjeldende side.



«Del»-funksjonen kan aktiveres eller ikke i henhold til konfigurasjon. Referer til systemadministratorene for de tilgjengelige konfigurasjonsalternativene.

7.3.2. Filtre

Bruk Filter-ikonet for å vise filterområdet (Fig 22 D). Bruk **Tilbakestill**-knappen for å skjule det (Fig 24 D). Fig 24 viser filterområdet.

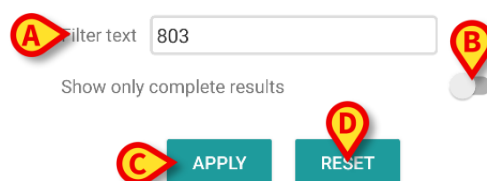


Fig 24

Et tekstfilter er tilgjengelig (Fig 24 A). Skriv her en søkestreng for å vise kun elementer med navn som inneholder en spesifikk streng («803» i figuren).

Velg «Vis kun fullstendige resultater»-bryteren for å kun vise prøver som ble flagget som fullførte i rutenettet (Fig 24 **B**).



Datarutenettet viser også resultater med delvise data som refererer til pågående prøver. Noen prøver tar tid å fullføre: for disse prøvene blir resultatet lagt til gradvis når de blir tilgjengelige. «Vis kun fullstendige resultater»-bryteren gjør det mulig å kun vise fullførte prøver i rutenettet.

Trykk på **Bruk**-knappen for å bruke filteret på dataene i rutenettet. Trykk på **Tilbakestill**-knappen for å fjerne filtre og skjule filterområdet (Fig 24 **C–D**).

7.3.3. Datarutenett

Fig 25 viser dataområdet.



Current filter: 803

	11:46 PM 8/17/22	12:09 AM 8/18/22	12:09 AM 8/18/22
Catetere venoso centrale (CVC)	 80307519		
Sangue (SANGUE)	 80307520		
Urina da mitte intermedio (URCOLT)		 80307521	 80307521
Broncoaspirato (BAS)		 80307522	 80307522

Fig 25

Mikrobiologidata vises i et rutenett. Kolonnene angir dato/klokkeslett for eksempelinnsamling. Radene refererer til ulike prøvetyper. For eksempel, cellene angitt i Fig 25 **A** refererer til tilgjengelige resultater for blodprøve innhentet kl. 11.46 den 8/17/22.

Hvis to ulike kolonner har samme dato og klokkeslett, betyr det at de refererer til ulike oppdateringer av samme prøve. Kolonnen lengst til høyre inneholder den nyeste oppdateringen.

Bruk «Vis kun fullstendige resultater»-bryteren på filterområdet for å kun vise prøver som ble fullførte i rutenettet (Fig 24 **B**).



-ikonet refererer til resultater som ikke inneholder bakterier. -ikonet refererer til resultater som inneholder bakterier. Nummeret plassert under ikonet er den spesifikke prøve-ID-en.

Indikasjonen «Gjeldende filter» (Fig 25 **B**) forteller at resultatene som vises er filtrerte (som betyr at kun deler av de tilgjengelige resultatene vises).

- Trykk på et ikon for å åpne et vindu som inneholder detaljerte resultater (Fig 26).

Sangue da vena periferica - 9:00 PM
10/9/22 (id:49117402)

EMOCOLTURA Aerobi

Exam id 491174
Observation Date 9:00 PM

Results

Text EMOCOLTURA
Aerobi-EMOCOLTURA
Aerobi-EMO

Value Positivo

Status C

Abnormal N

Code 1@937@1@937@1@EMO@

Microrganismi identificati

Exam id 491174
Observation Date 9:00 PM

Results

Text Microrganismi identificati-Micro
organism identified-EMO (1)

Value

Status

Fig 26

7.4. Laboratorio

Laboratoriumsdata vises på en dedikert sidetype. Fig 27 viser et eksempel.

A Overskrift

B Filtre

C Dataruten

Online

5 Occupied bed

Laboratory

Filter text

APPLY RESET

HISTORY LIST

EMOCROMO

	3:00 PM 9/18/22	5:00 PM 9/18/22	6:00 AM 9/19/22
EMOCROMO-Eosinofili %-SI	0.1	0.9	0.1
EMOCROMO-Basofili %-SI	0.1	0.1	0

SIERO

GLUCOSIO-GLUCOSI O-SIE	386	270
74 - 100		
FOSFATASI ALCALINA (ALP)-FO...		158

Fig 27

Siden er delt inn i tre områder:

- Overskrift, beskrevet i avsnitt 7.3.1.
- Filtre, beskrevet i avsnitt 7.3.2. Bruk -ikonet for å vise filterområdet (Fig 22 D). Bruk **Tilbakestill**-knappen for å skjule det (Fig 24 D).
- Datarutenett, beskrevet i avsnitt 7.4.1.


7.4.1. Laboratorium – Datarutenett

To visningsmoduser er tilgjengelige for laboratoriumsdata (Fig 28 **A–B**):

- Historikk (venstre), beskrevet i avsnitt 7.4.1.1.
- Liste (høyre), beskrevet i avsnitt 7.4.1.2.

«Historikk»-fanen vises som standard når du går inn i sidetypen Laboratorium.

- Trykk på Historikk- eller Liste-fanen for å bytte til relatert visningsmodus.

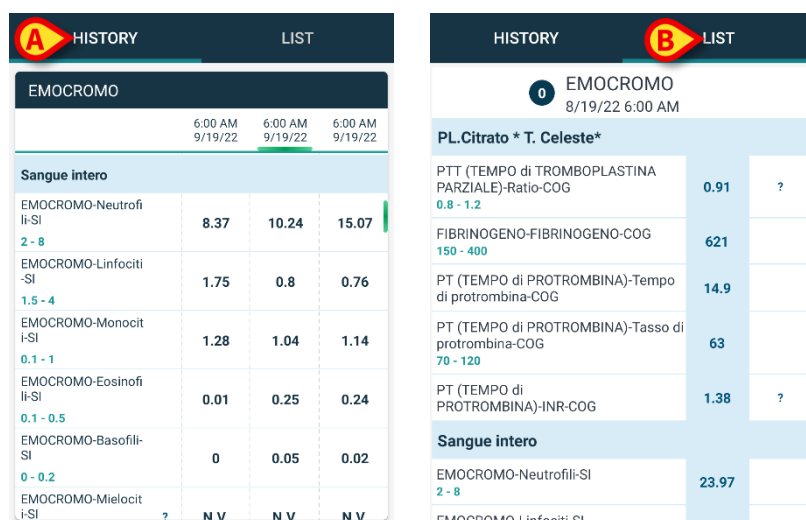

HISTORY		LIST	
EMOCROMO			
	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofi li-SI 2 - 8	8.37	10.24	15.07
EMOCROMO-Linfociti -SI 1.5 - 4	1.75	0.8	0.76
EMOCROMO-Monocit i-SI 0.1 - 1	1.28	1.04	1.14
EMOCROMO-Eosinofi li-SI 0.1 - 0.5	0.01	0.25	0.24
EMOCROMO-Basofili- SI 0 - 0.2	0	0.05	0.02
EMOCROMO-Mielocit i-SI	?	N V	N V

HISTORY		LIST	
0 EMOCROMO 8/19/22 6:00 AM			
PL.Citrato * T. Celeste*			
PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG 0.8 - 1.2	0.91	?	
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG 150 - 400	621		
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9		
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG 70 - 120	63		
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38	?	
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofil-SI 2 - 8	23.97		
EMOCROMO-Linfociti-SI			

Fig 28

7.4.1.1. Datarutenett – Historikk

Fig 29 viser «Historikk»-modus.



HISTORY		LIST	
EMOCROMO			
	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofi li-SI 2 - 8	8.37	10.24	15.07
EMOCROMO-Linfociti -SI 1.5 - 4	1.75	0.8	0.76
EMOCROMO-Monocit i-SI 0.1 - 1	1.28	1.04	1.14
EMOCROMO-Eosinofi li-SI 0.1 - 0.5	0.01	0.25	0.24
EMOCROMO-Basofili- SI 0 - 0.2	0	0.05	0.02
EMOCROMO-Mielocit i-SI	?	N V	N V

Fig 29

«Historikk»-modusen gir oversikt, i kronologisk orden, over alle de tilgjengelige resultatene for de valgte pasientene i en konfigurert tidsintervall.

Hver kolonne representerer en prøve. For eksempel, kolonnen angitt i Fig 29 **A** inneholder resultater mottatt kl 6.00 den 9/19/22.

Hver rad refererer til en prøveelement. For eksempel, radene angitt i Fig 29 **B** inneholder alle resultatene mottatt for «Emocromo-Linfociti» (Blodtelling – Lymfocytter). Under navnet på hver prøveelement, vises verdiområdet hvis informasjonen er tilgjengelig (Fig 29 **C**).

En celle er derfor verdien av et bestemt element i sammenhengen med en spesifikk prøve, angitt prøvedato og -klokkeslett. For eksempel, verdien 0,8 angitt i Fig 29 **D** er verdien av «Blodtelling – Lymfocytter» i sammenheng med resultatene mottatt kl. 6.00 den 9/19/22.

Den lyseblå raden er gruppeoverskrifter, og gir navn til en gruppe like elementer. For eksempel: «Sangue intero» (fullblod) angitt i Fig 29 **E**. Alle de hvite radene plassert under en lyseblå rad tilhører samme gruppe, og navnet vises i den lyseblå raden.



Sammensetningen av grupper kan konfigureres i Online Web-konfigureringsverktøyet. Referer til systemadministratorene for de tilgjengelige konfigurasjonsalternativene. Se dokumentet CFG ENG Online Validation for mer informasjon.

Alle mulige elementer er oppført i «Historikk»-visningen. Hvis et element ikke er relevant for prøven, vil cellen i tilhørende rad som er relatert til elementet være tom.

- Trykk på en celle for å vise mer detaljert informasjon om en verdi (se eksempel i Fig 30):

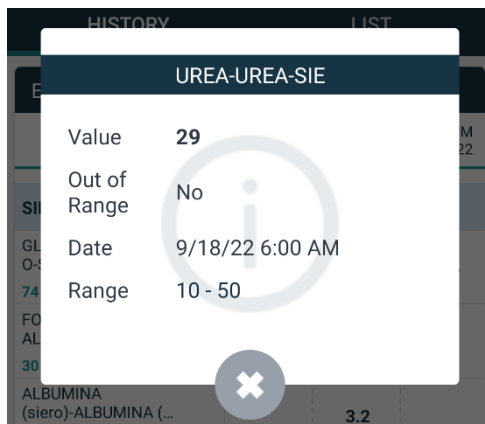


Fig 30

7.4.1.2. Datarutenett – Liste

Fig 31 viser «Liste»-modusen.

HISTORY	LIST
EMOCROMO 8/19/22 6:00 AM	
PL.Citrato * T. Celeste*	
PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG 0.8 - 1.2	0.91
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG 150 - 400	621
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG 70 - 120	63
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38
Sangue intero	
EMOCROMO-Neutrofili-SI 2 - 8	23.97
EMOCROMO-I infociti-SI	

Fig 31

«Liste»-modusen viser en prøve om gangen.

Prøvens navn og tidspunkt vises øverst (Fig 31 A).

Radene i tabellen representerer prøveelementene (Fig 31 B).

Under navnet på hver prøveelement, vises verdiområdet hvis informasjonen er tilgjengelig (Fig 31 C).

Den lyseblå raden er gruppeoverskrifter, og gir navn til en gruppe like elementer. For eksempel: «Sangue intero» (fullblod) angitt i Fig 31 D. Alle de hvite radene plassert under en lyseblå rad tilhører samme gruppe, og navnet vises i den lyseblå raden.



Sammensetningen av grupper kan konfigureres i Online Web-konfigureringsverktøyet. Referer til systemadministratorene for de tilgjengelige konfigurasjonsalternativene. Se dokumentet CFG ENG Online Validation for mer informasjon.

Den lyseblå kolonnen inneholder undersøkelseelementenes resultatsverdier Fig 31 E. Hver verdi refererer til elementet plassert på samme rad.

Kolonnen angitt i Fig 31 F inneholder måleenhetene når de er tilgjengelig.

De nyeste resultatene vises som standard når siden er valgt.

- Rull «Liste»-modussiden til venstre og høyre for å vise tidligere og kommende prøver.
- Trykk på en celle for å vise mer detaljert informasjon om en verdi (se eksempel i Fig 32):

UREA-UREA-SIE	
Value	29
Out of Range	No
Date	9/18/22 6:00 AM
Range	10 - 50

Fig 32