



Control Bar Web Manual do Utilizador

Versão 2.0

10/3/2025

Índice

1. Control Bar Web.....	3
1.1 Lançamento do Control Bar Web.....	3
1.2 Login do utilizador.....	4
1.2.1 Início de Sessão Automático.....	6
1.2.2 Terminar sessão e permanecer	6
1.3 Área de Trabalho.....	7
1.3.1 Selecionar um módulo.....	8
1.4 Control Bar	8
1.5 Menu Principal.....	9
1.5.1 Alterar palavra-passe	10
1.5.2 Reporte de Problemas do Utilizador	11
1.6 Submódulos adicionais.....	12
1.6.1 Configurador CDSS	12
1.6.2 Identity	13

1. Control Bar Web



Para informações sobre o ambiente do Produto, precauções, avisos e uso pretendido, consulte *USR POR Digistat Care* e/ou *USR POR Digistat Docs* (dependendo dos módulos instalados - para o *Digistat Suite UE*) ou *USR ENG Digistat Suite NA* (para *Digistat Suite AN*). O conhecimento e compreensão do documento apropriado são obrigatórios para um uso correto e seguro do *Control Bar Web*, descrito neste documento.

1.1 Lançamento do Control Bar Web

Para iniciar o Control Bar Web:

- Digite o endereço específico na barra de endereços do navegador.

A seguinte página abre-se:


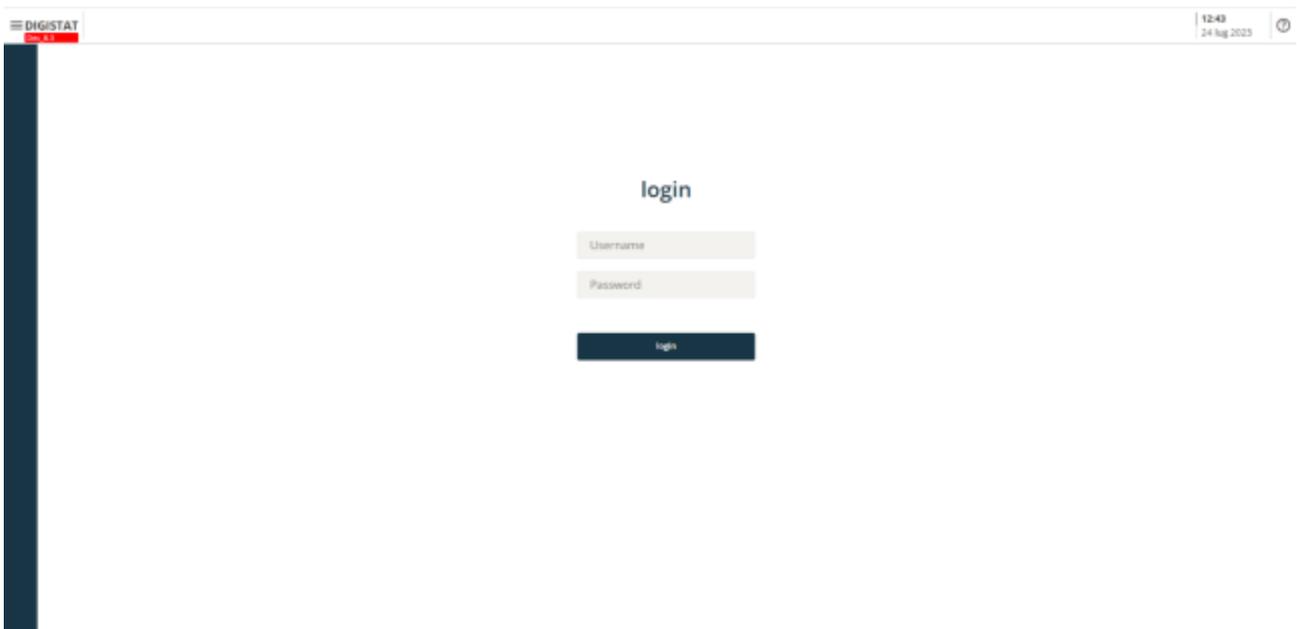


Fig 1

1.2 Login do utilizador

O login do utilizador é necessário para ativar as funcionalidades do sistema.

login

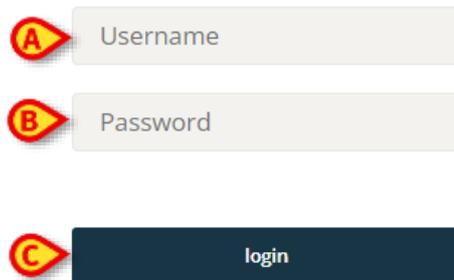

The image shows a login form with three elements: a text input field labeled 'Username' with a red callout 'A', a text input field labeled 'Password' with a red callout 'B', and a dark blue button labeled 'login' with a red callout 'C'.

Fig 2

Para iniciar sessão:

- Introduza o seu nome de utilizador no campo “Nome de Utilizador” (Fig 2 **A**).
- Introduza a sua palavra-passe no campo “Password” (Fig 2 **B**).
- Clique no botão de login (Fig 2 **C**).

O utilizador está assim logado.



O nome de utilizador e a palavra-passe são emitidos pelo administrador do sistema. Se não tiver um nome de utilizador e uma palavra-passe, não está autorizado a utilizar o Produto.

Após aceder ao sistema, um acrónimo correspondente ao utilizador registado é exibido no botão **Utilizador** na Control Bar (o acrónimo é ADMIN em Fig 3 **A**).



Fig 3

O utilizador cujas credenciais são exibidas no botão de Utilizador é responsável por todas as ações realizadas no Produto.



Nota: Algumas exceções são possíveis dependendo da configuração da sua instalação (p. ex. funcionalidades de Início de Sessão Automático ou “Terminar sessão e permanecer” – parágrafos 1.2.1 e 1.2.2).

É fortemente recomendado terminar a sessão antes de deixar a estação de trabalho do Produto para evitar o uso indevido do sistema.



É possível configurar o Produto para permitir o login através de um sistema externo (single sign on). Nesses casos, um botão dedicado é exibido no ecrã de login.

Para terminar a sessão, clique no botão **Utilizador** durante a sessão de trabalho. O seguinte menu abre (Fig 4).



Fig 4

- Clique em **LOGOUT** (Fig 4 **A**).

É necessária a confirmação do utilizador. Após a confirmação, o utilizador é desconectado. Para iniciar sessão, clique novamente no botão **Utilizador**. O ecrã mostrado em Fig 2 será exibido novamente.

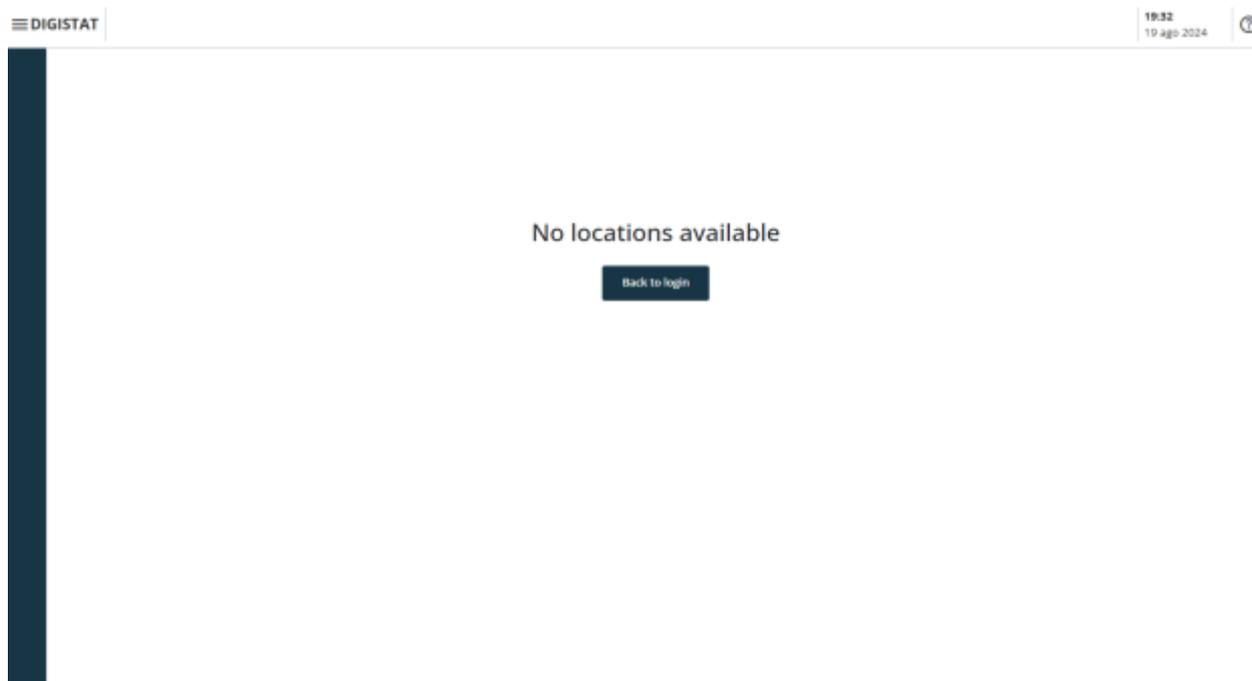


Fig 5

Se o utilizador não tiver um departamento previamente associado (consulte o manual *CGF ENG Digistat Suite MDR* para a configuração da associação utilizador-departamento), não é possível iniciar sessão no módulo. Neste caso, a mensagem “Sem departamento disponível” é exibida (Fig 5). Além disso, é apresentado um botão **Back to Login** para regressar à página de login e tentar novamente iniciar sessão com um novo utilizador, ou com o mesmo utilizador após a associação utilizador-departamento.



Um "Departamento" é uma entidade de configuração do Digistat que corresponde a uma área específica da estrutura de saúde. Pode ser, por exemplo, um departamento, uma enfermaria, um bloco operatório, etc., dependendo dos requisitos da estrutura de saúde. Consulte os administradores do sistema para mais informações.

1.2.1 Início de Sessão Automático

É possível configurar o Digistat Web para permitir o Início de Sessão Automático do utilizador. Isso significa que, quando o Digistat Web é iniciado, um utilizador configurado já está com sessão iniciada. Quando este é o caso, algumas funcionalidades configuradas estão imediatamente disponíveis, antes de realizar qualquer procedimento de início de sessão. Para ativar o Início de Sessão Automático, é necessário configurar a opção de sistema "AutoLoginUsername". Consulte o documento DSO ENG System Options para mais informações.

Quando o Início de Sessão Automático está ativo, ainda é possível que um utilizador inicie sessão com as suas credenciais pessoais. Para fazer isso.

- Clique no botão **de Utilizador** (Fig 6 A).



Fig 6

O seguinte menu será aberto (Fig 7).

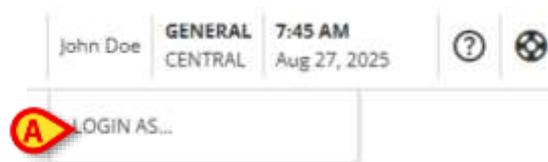


Fig 7

- Clique em **INICIAR SESSÃO COMO...** (Fig 7 A).

O ecrã de Início de Sessão será exibido (Fig 2). Inicie sessão conforme descrito no parágrafo 1.2



Quando a opção de sistema "AutoLoginUsername" é configurada, a funcionalidade "Terminar sessão do utilizador atual" (descrita no parágrafo 1.2.2) é desativada.



As funcionalidades "Início de Sessão Automático" e "Terminar Sessão e Permanecer" estão disponíveis apenas quando a aplicação está a ser executada dentro do "Digistat Web Browser". Consulte o manual de instalação do Digistat Suite para mais informações (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Terminar sessão e permanecer

Esta funcionalidade permite ao utilizador terminar a sessão enquanto permanece com sessão iniciada em um nome de utilizador especificado durante a configuração. Isso significa que, após o utilizador terminar a sessão, um utilizador convencional permanece com sessão iniciada. Para ativar esta funcionalidade, é necessário configurar a opção de sistema "LogoutAndRemainUsername". Consulte o documento opções de sistema DSO ENG para

mais informações. Quando esta funcionalidade estiver disponível, a opção **Terminar Sessão do Utilizador Atual** está disponível no menu "Utilizador" (Fig 9 A).

Para "terminar sessão e permanecer"

- Clique no botão **de Utilizador** (Fig 8 A).



Fig 8

O seguinte menu será aberto (Fig 9).



Fig 9

- Clique em **LOGOUT CURRENT USER** (TERMINAR SESSÃO DO UTILIZADOR ATUAL - Fig 9 A).

A credencial do utilizador atual desaparecerá do botão do **Utilizador**, enquanto as credenciais do utilizador convencional configurado serão exibidas.

1.3 Área de Trabalho

Após o login do utilizador, os ícones correspondentes aos módulos disponíveis do Digistat Web são exibidos na barra lateral (Fig 10 A). A área de trabalho (Fig 10 B) exibe os ecrãs e as funcionalidades do módulo selecionado na barra lateral.



Fig 10

A Control Bar (Fig 10 C) é descrita nas secções 1.4 e subsequentes.
O módulo atualmente selecionado está destacado.

1.3.1 Selecionar um módulo

Para selecionar um módulo:

- Clique no ícone correspondente na barra lateral.

O ícone será destacado e as funcionalidades do módulo serão exibidas na Área de Trabalho.

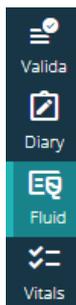


Fig 11

1.4 Control Bar

A Control Bar que aparece na parte superior do ecrã é comum a todos os módulos. As suas principais características estão listadas abaixo:



Fig 12

- O botão **Menu** (Fig 12 A) abre o menu principal do Control Bar Web. Consulte a secção 1.5.
- O botão **do Paciente** (Fig 12 B). Se nenhum paciente estiver selecionado, este botão pode ser clicado para iniciar o procedimento de seleção de paciente. Após a seleção do paciente, o nome e os dados principais do paciente são exibidos. Para os pacientes internados, o número da cama e o nome do departamento também são exibidos. Se funcionalidades adicionais específicas da Control Bar Web estiverem disponíveis para o paciente selecionado, o botão do paciente pode ser clicado para exibir um menu suspenso que permite aceder a essas funcionalidades (ver secção 1.6 para mais informações). Se um ícone de cadeado -  - for exibido ao lado do nome do paciente, significa que alguns dados/funcionalidades do paciente estão bloqueados para esse paciente.



O procedimento de seleção de pacientes é geralmente realizado no módulo Digistat Patient Explorer Web. Consulte o manual do utilizador do Patient Explorer Web (documento USR PT Patient Explorer Web) para obter instruções sobre funcionalidades de gestão de pacientes. Outros módulos podem ser configurados

para a seleção de pacientes em vez do Patient Explorer Web. Se for esse o caso, consulte a documentação específica para obter instruções.

- A área indicada em Fig 12 **C** pode ser usada para sinalizar que há notificações para o utilizador.
- O botão de utilizador fornece acesso às funcionalidades de iniciar sessão/terminar sessão e alterar a palavra-passe (Fig 12 **D**).
- Indicação de data - hora (Fig 12 **E**).
- Utilize o botão de **Ajuda** (Fig 12 **F**) para aceder à ajuda online.
- Clique no 🛠 ícone (Fig 12 **G**) para criar um relatório de problema a ser enviado à Assistência Técnica para suporte. Consulte a secção 1.5.2.

1.5 Menu Principal

O botão **Menu** (Fig 12 **A**) abre o seguinte menu (Fig 13).

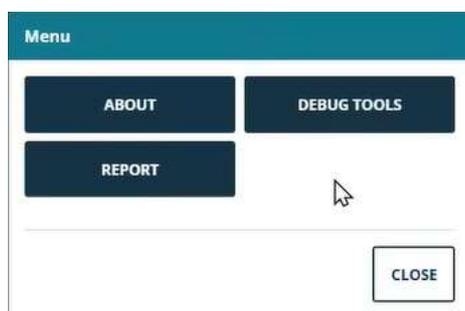


Fig 13

O botão **About** exibe uma janela contendo informações sobre a Versão do Digistat Suite instalada e as licenças relacionadas (consulte a documentação específica para mais informações).

A rotulagem real do produto é a Caixa de informação (About box) exibida nas estações de trabalho dos clientes, dispositivos móveis e módulos web onde a Digistat Suite está instalada.

O botão **Debug Tools** está reservado para administradores do sistema.

O botão **Report** (Relatórios) abre uma janela que lista os relatórios disponíveis (Fig 14). O botão de **Relatórios** está presente tanto com um paciente selecionado como sem um paciente selecionado. Se um paciente for selecionado, os relatórios disponíveis são aqueles relacionados com a unidade hospitalar do paciente (etiquetados como "Paciente"). Se nenhum paciente for selecionado, os relatórios disponíveis são aqueles relacionados com a unidade hospitalar do utilizador com sessão iniciada (rotulados como "Genérico").



Cada utilizador é associado durante a configuração a uma ou mais unidades hospitalares.

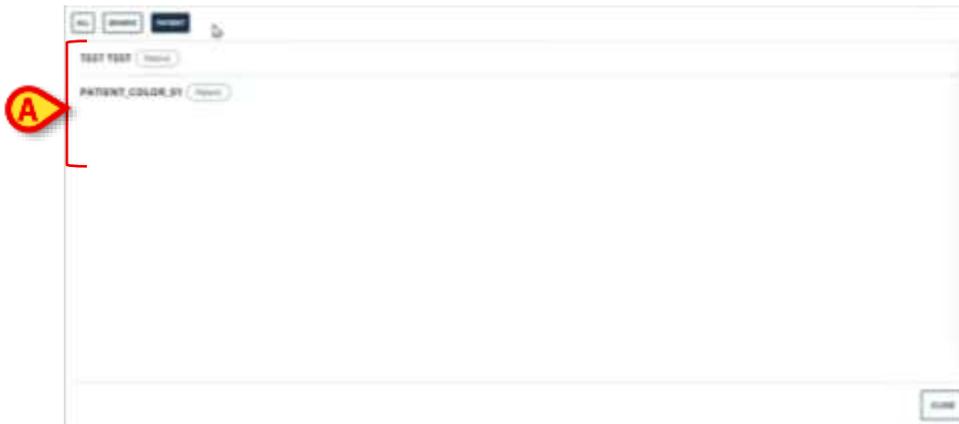


Fig 14

Cada linha na janela refere-se a um relatório de impressão.

- Clique numa linha para exibir uma pré-visualização de impressão.

Cada relatório pode ser rotulado como "Relatório do paciente" ou "Relatório genérico" (Fig 15 A).

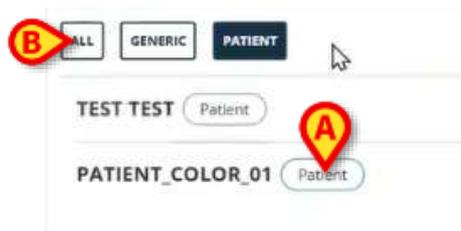


Fig 15

Os botões indicados em Fig 15 B permitem filtrar os relatórios exibidos na janela (apenas "Relatórios Genéricos", apenas "Relatórios de Pacientes" ou todos os relatórios disponíveis).

1.5.1 Alterar palavra-passe

Para alterar a palavra-passe do Utilizador

- Clique no botão **Utilizador** na Control Bar (Fig 16 A).

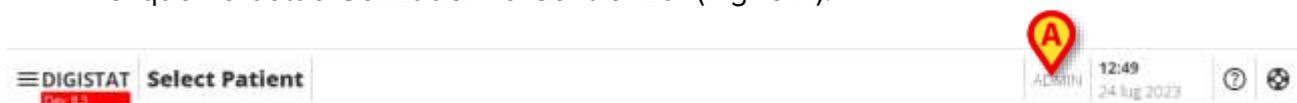


Fig 16

- O seguinte menu abre (Fig 17).

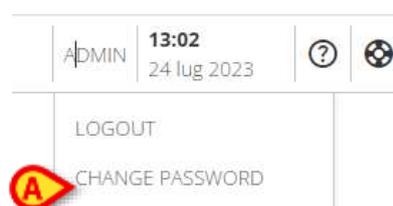


Fig 17

- Clique em **Alterar Palavra-passe** (Fig 17 **A**). O seguinte ecrã abre (Fig 18):

CHANGE PASSWORD

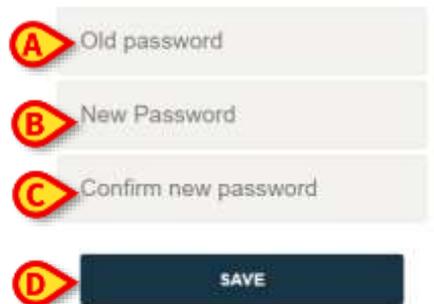


Fig 18

- Digite a palavra-passe atual no campo “OLD password” (Fig 18 **A**).
- Digite a nova palavra-passe no campo “New password” (Fig 18 **B**).
- Digite novamente a nova palavra-passe no campo “Confirm new password” (Fig 18 **C**).
- Clique em **Save** (Fig 18 **D**).

1.5.2 Reporte de Problemas do Utilizador

Se presente, o  ícone na Control Bar (Fig 19 **A**) permite criar um relatório de "problema" e, se necessário, receber suporte técnico.



Fig 19



A presença do ícone depende da System Option EnableUserIssueReporting. Consulte os administradores do sistema para mais informações.

Para fazer isso:

- Clique no  ícone (Fig 19 **A**). A seguinte janela abre-se (Fig 20).



Fig 20

- Insira uma descrição do problema no campo “Descrição” (Fig 20 **A**).
- Clique em **Send** (Fig 20 **B**).

Uma confirmação é apresentada, incluindo um número de identificação do problema.

1.6 Submódulos adicionais

Os submódulos descritos nesta secção podem estar presentes ou não, dependendo da configuração do Produto na Organismoo de Saúde. Cada submódulo pode ser aberto clicando num item específico do menu num menu suspenso que é exibido ao lado do botão do paciente. Eles estão relacionados com o paciente, ou seja, estão disponíveis apenas se um paciente já estiver selecionado.

1.6.1 Configurador CDSS

O submódulo Configurador CDSS pode ser ativado por configuração como secção adicional do Control Bar Web. Para abrir o submódulo do configurador CDSS:

- Selecione o paciente relevante.



Consulte o manual do utilizador do Patient Explorer Web para o procedimento de seleção de pacientes (documento *USR PT Patient Explorer Web*).

Após a seleção do paciente, se módulos adicionais da Control Bar estiverem disponíveis, o



ícone é exibido no botão do paciente (Fig 21 **A**).



Fig 21

- Clique no  ícone .

Uma janela suspensa é exibida, listando os submódulos adicionais disponíveis (Fig 22).

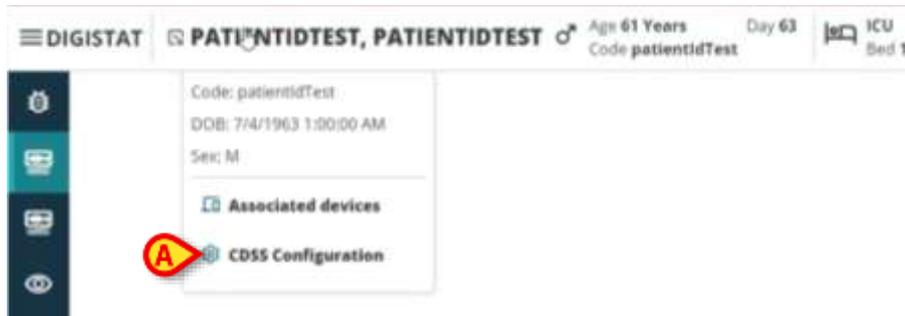


Fig 22

- Clique em “CDSS Configuration” (Fig 22 **A**).

A janela seguinte é exibida, listando as regras associadas ao paciente atualmente selecionado (Fig 23).



Fig 23

Consulte o manual do utilizador do Configurador CDSS para a descrição completa e as instruções de utilização deste submódulo (documento USR ENG CDSS Web).

1.6.2 Identity

O submódulo Identity pode ser ativado por configuração como uma secção adicional do Control Bar Web. Para abrir o submódulo Identity:

- Selecione o paciente relevante.



Consulte o manual do utilizador do Patient Explorer Web para o procedimento de seleção de pacientes (documento: USR PT Patient Explorer Web).

Após a seleção do paciente, se módulos adicionais da Control Bar estiverem disponíveis, o



ícone é exibido no botão do paciente (Fig 24 **A**).



Fig 24

- Clique no  ícone .

Uma janela suspensa é exibida, listando as secções adicionais disponíveis (Fig 25).

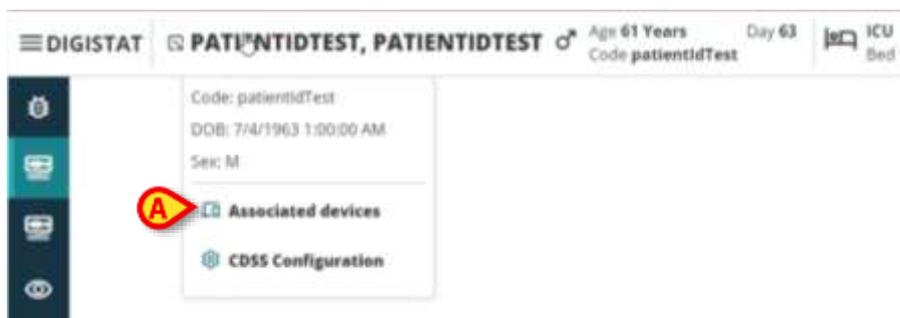


Fig 25

- Clique em “Associated devices” (Fig 25 **A**).

A seguinte janela é exibida, listando os dispositivos associados ao paciente atualmente selecionado (Fig 26).

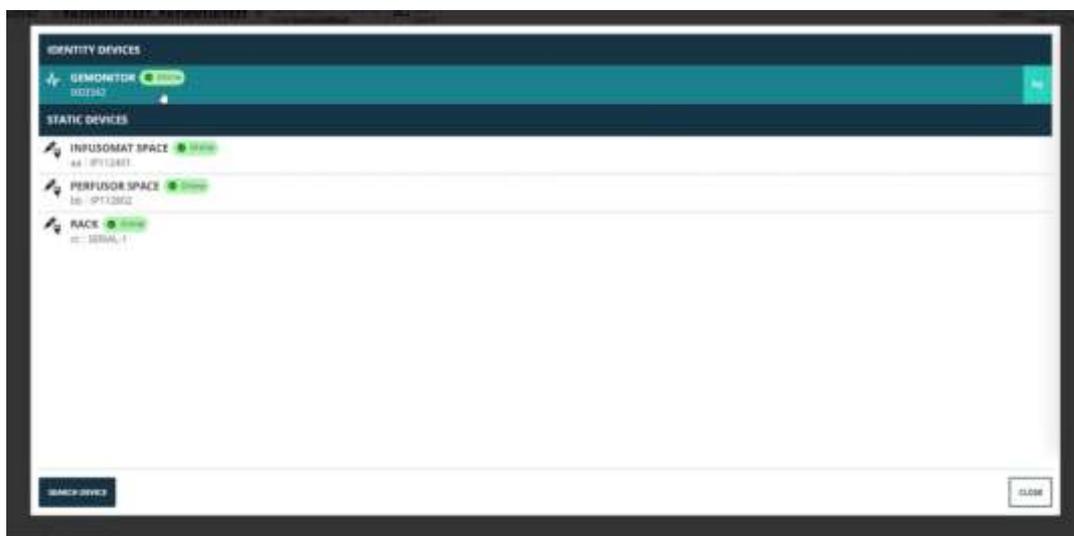


Fig 26

Consulte o manual do utilizador do Identity para a descrição completa e as instruções de uso deste submódulo (documento USR ENG Identity Web).