



Voice Notes Mobile

Användarmanual

Revision 1.0

27/05/2019

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italien

Tfn (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Innehåll

1. Att använda manualen	3
1.1 Syfte	3
1.2 Använda tecken och terminologi	3
1.3 Symboler.....	4
2. Voice Notes.....	5
2.1 Introduktion.....	5
2.2 Uppstart av program	5
2.2.1 Användaråtkomst.....	6
2.2.2 Meddelanden	7
2.3 Patientlista	8
2.3.1 Rubrik för patientlista	8
2.3.2 Lista över bäddar	9
2.4 Lista över röstmeddelanden.....	9
2.4.1 Lyssna av röstmeddelanden	11
2.4.2 Radera ett röstmeddelande	12
2.4.3 Spela in ett röstmeddelande.....	13

1. Att använda manualen



Denna Användarmanual ska användas i kombination med Produktanvändarmanualen och andra modulspecifika manualer som anges i Avsnitt 1

1.1 Syfte

Arbetet med att ta fram denna manual syftar till att erbjuda all nödvändig information för att säkerställa en säker och korrekt användning av Produkt. Vidare har detta dokument till syfte att beskriva varje enskild del av systemet. Dokumentet är även en referensguide till användaren som vill veta hur ett specifikt moment ska utföras och en guide för korrekt användning av systemet. Detta för att undvika felaktig och potentiellt farlig användning.

1.2 Använda tecken och terminologi

Användningen av Produktet kräver grundläggande kunskap om de vanligaste IT-termerna och -begreppen. På samma sätt är förståelsen av denna manual föremål för sådan kunskap.

Tänk på att Produkt endast får användas av professionellt kvalificerad och korrekt utbildad personal.

När online-versionen konsulteras i motsats till pappersversionen, fungerar korsreferenserna i dokumentet som hypertextuella länkar. Detta betyder att varje gång du stöter på referensen till en figur (till exempel Fig. 9) eller ett avsnitt (till exempel avsnitt 4.4) kan du klicka på referensen så att du direkt kommer till den specifika figuren eller det specifika avsnittet.

Varje gång det hänvisas till en knapp är referensen skriven i **fetstil**. Till exempel i uttryck som:

- Klicka på knappen **Uppdatera**.

är knappen **Uppdatera** en knapp som visas på den beskrivna sidan. Om möjligt är den tydligt indikerad i en figur (med korsreferens såsom "Se Fig. 10 **A**").

Tecknet ➤ indikerar en handling som användaren måste utföra för att kunna utföra ett visst moment.

Tecknet ● indikerar de olika elementen i en lista.

1.3 Symboler

Följande symboler används i denna manual.

Användbar information



Symbolen visas tillsammans med tilläggsinformationen gällande egenskaperna hos och användningen av Produkt. Det kan handla om förklarande exempel, alternativa moment eller extra information som kan vara användbar för att bättre förstå produkten.

Viktigt!



Symbolen lyfter fram information i syfte att förebygga felaktig användning av programvaran eller uppmärksamma kritiska procedurer som kan orsaka risker. Följaktligen är det nödvändigt att vara mycket uppmärksam varje gång som symbolen visas.

Följande symboler används i informationsfältet Produkt:



Tillverkarens namn och adress



Observera, se bifogad dokumentation

2. Voice Notes

2.1 Introduktion

Med modulen **Voice Notes** går det att spela in röstmeddelanden som är förknippade med patienterna med valbara ämnen och konfigurerbart utgångsdatum för meddelanden.

2.2 Uppstart av program

För att starta **Voice Notes**-modulen:

- Klicka på motsvarande rad på den handhållna enhetens skärmbild (Fig 1).



Fig 1

Skärmbilden "Voice Notes" visas i Fig 2.



Fig 2

Denna skärmbild listar alla patienter som finns i den handhållna enhetens domän.

2.2.1 Användaråtkomst

För att kunna använda [Voice Notes](#) måste en behörig användare vara inloggad. Om ingen användare är inloggad är raden på huvudskärmbilden i [Mobile Launcher](#) snarlik den som visas i Fig 3.

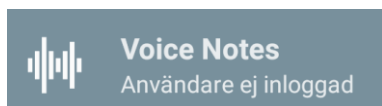


Fig 3

Det går inte att använda [Voice Notes](#) om samma användare samtidigt är inloggad på en annan enhet. Om detta sker, loggas användaren automatiskt ut från enheten som användaren tidigare loggade in på. I detta fall visas ett pop-up-fönster som meddelar om fränkopplingen såsom visas i Fig 4.

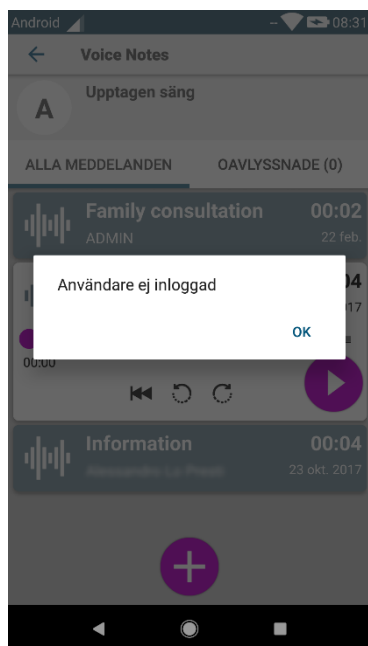


Fig 4

2.2.2 Meddelanden

När programmet startas upp eller när det finns ett nytt meddelande visar systemet ett meddelande. Klicka på meddelandet för att öppna patientskärbilden med meddelandelistan (Fig 5).

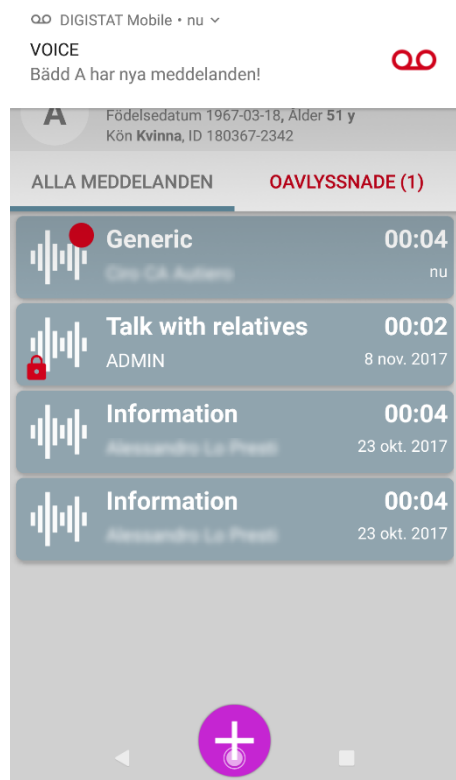


Fig 5

2.3 Patientlista

Skärmbilden med patientlistan **Voice Notes** (Fig 6) visar listan över bäddar som är konfigurerade på den handhållna enheten (nämligen enhetens domän). Domänen för en specifik handhållen enhet definieras av konfigurationen.



Fig 6

Om det inte finns någon patient på en av de konfigurerade bäddarna visas inte bädden. Skärmbilden med patientlistan består av en rubrik (Fig 6 **A**) och patientlistan (Fig 6 **B**).

2.3.1 Rubrik för patientlista

Fig 7 visar rubriken på skärmbilden med patientlistan.

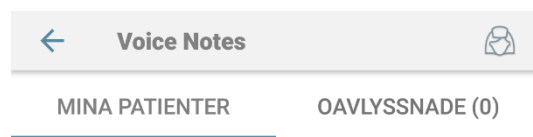


Fig 7

Tryck på vänsterpilen i Fig 7 **A** för att avsluta modulen och visa den handhållna enhetens skärmbild (Fig 1). Använd filtret i Fig 7 **B** för att visa alla patienter som är konfigurerade på den handhållna enhetens domän eller endast patienter för vilka det finns meddelanden som inte har lyssnats av (**Oavlyssnade**) för den aktuellt inloggade användaren.

2.3.2 Lista över bäddar

Varje bädd motsvaras av en ruta (Fig 8).



Fig 8

Följande information är tillgänglig i rutan:

- bäddnummer (Fig 8 **A**),
- antalet meddelanden som inte har lyssnats av (i förekommande fall) (Fig 8 **B**),
- namnet på patienten på den bädden (Fig 8 **C**),
- patientdata (om tillgängliga: kön, ålder, födelsedatum, patient-ID – Fig 8 **D**).

Tryck på en ruta för att komma åt listan över röstmeddelanden för motsvarande patient.

2.4 Lista över röstmeddelanden

Skärmbilden med listan över röstmeddelanden består av två områden: Ett rubrikområde (Fig 9 **A**) och listan över röstmeddelanden (Fig 9 **B**).



Fig 9

Rubrikområdet visar följande information:

- bäddnummer;
- namnet på patienten på den bädden;
- patientdata (om tillgängliga: kön, ålder, födelsedatum, patient-ID).

Röstmeddelandena visas i rutorna nedanför rubriksområdet. Varje ruta motsvarar ett röstmeddelande. Fig 10 visar några exempel.

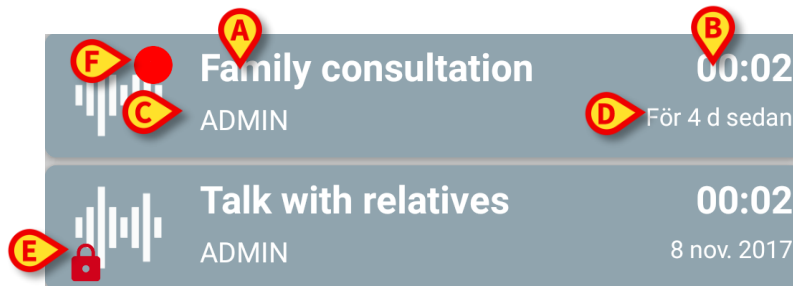


Fig 10

Röstmeddelanderutan visar följande information (Fig 10):

- **A:** meddelandets ämne,
- **B:** meddelandets utgångsdatum,
- **C:** upphovsmannen, d.v.s. användaren som har spelat in meddelandet,
- **D:** tiden för upprättande, d.v.s. när meddelandet spelades in.
- **E:** ikonen av ett hänglås (visas eventuellt) anger att meddelandet har märkts som privat. Det betyder att endast upphovsmannen kan se och lyssna på detta inlägg.
- **F:** ikonen av en röd cirkel (visas eventuellt) anger att meddelandet ännu inte har lyssnats av.

2.4.1 Lyssna av röstmeddelanden

För att lyssna på ett röstmeddelande:

- Tryck på meddelanderutan.

Rutan utvidgas för att visa ljudspelarens kontrollknappar (Fig 11 och Fig 12).

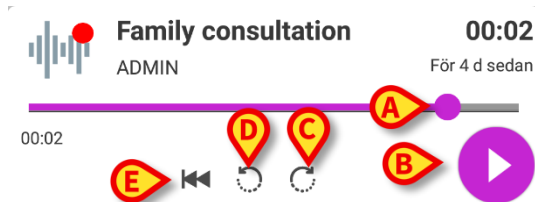


Fig 11 - olistat röstmeddelande



Fig 12 - privat meddelande, raderas av författaren

Nedan följer en beskrivning av kontrollknapparna:

- Söklinje (Fig 11 och Fig 12 **A**): Klicka på miniatyrbilden och dra till vänster eller höger för att ställa in den aktuella förloppsnivån.
- Spela upp meddelandet (Fig 11 och Fig 12 **B**).
- Spola 10 sekunder framåt (Fig 11 och Fig 12 **C**).
- Spola 10 sekunder bakåt (Fig 11 och Fig 12 **D**).
- Gå tillbaka till början (Fig 11 och Fig 12 **E**).
- Radera meddelandet (visas eventuellt –Fig 12 **F**).

Anm:

- ❖ En ikon för bekräftelse ✓ (på samma plats som symbolen – Fig 12 **F**), i förekommande fall, kan användas för att markera meddelandet som avlyssnat. Tryck på ikonen för att markera meddelandet som avlyssnat.
- ❖ Det går att spola framåt i meddelandet endast till den senaste avlyssnade positionen. Den delen av meddelandet som har lyssnats av framhävs på söklinjen med en tjockare grå linje.
- ❖ När du klickar på en meddelanderuta i den utvidgade vyn ställer systemet automatiskt in startpunkten för ljudspelarens söklinje på den senaste avlyssnade positionen.

2.4.2 Radera ett röstmeddelande

Röstmeddelandena raderas automatiskt när deras utgångsdatum passerats. Raderade meddelanden kan inte återställas. Endast upphovsmannen kan radera sina meddelanden före deras utgångsdatum genom att klicka på ikonen  i den utvidgade meddelandevyn (Fig 12). Detta moment kräver en bekräftelse (Fig 13):

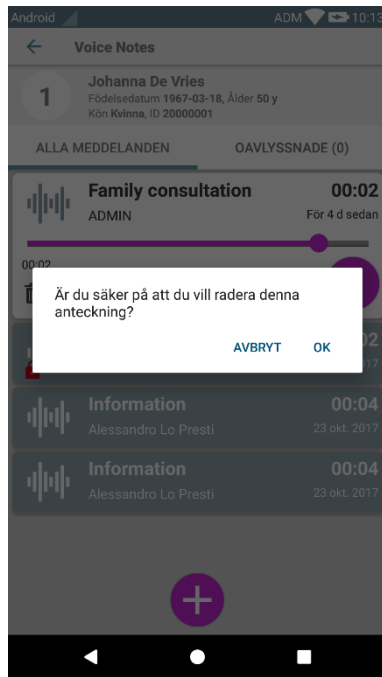


Fig 13

Om en användare i nätverket lyssnar på ett meddelande medan det raderas, visas ett varningsmeddelande.

2.4.3 Spela in ett röstmeddelande

Gör följande för att spela in ett röstmeddelande: välj patienten i skärmbilden med patientlistan (Fig 6). Följande skärmbild visas (Fig 14) med alla meddelanden som för tillfället finns för den valda patienten (i Fig 14 finns inga meddelanden).

Tryck på ikonen  nederst på sidan såsom visas i Fig 14:

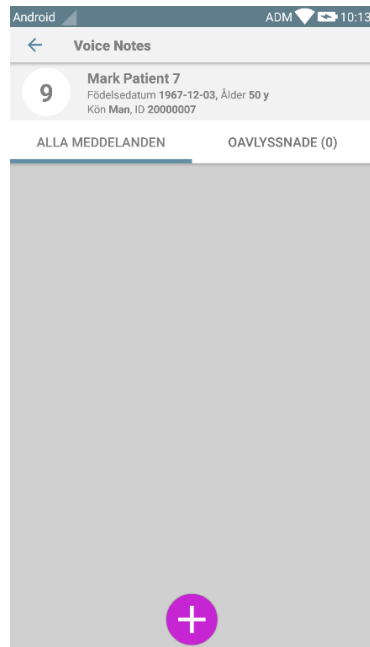


Fig 14

Skärmbilden för inspelning öppnas såsom visas i Fig 15:

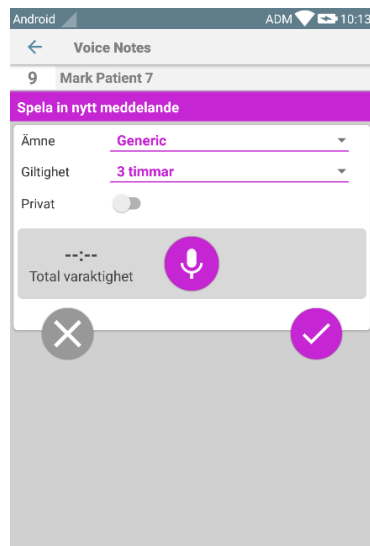


Fig 15

Innan ett meddelande spelas in går det att välja meddelandeämnet i en fördefinierad lista (Fig 16):



Fig 16

Innan ett meddelande spelas in går det även att bestämma meddelandets utgångsdatum. Meddelandena raderas automatiskt efter att utgångsdatumet har passerats (Fig 17).

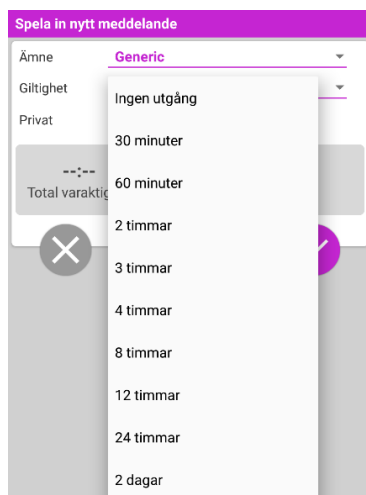


Fig 17

För att spela in ett nytt röstmeddelande:

- Håll knappen  nedtryckt såsom visas i Fig 18.

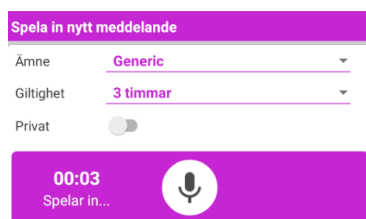



Fig 18

Knappen är vit under inspelningen. Inspelningstiden visas vid sidan av knappen. Inspelningen stoppas när knappen släpps upp (Fig 19). Max. standard inspelningstid är 5 minuter (konfigurerbart värde). Vid behov går det att fortsätta inspelningen genom att åter trycka på inspelningsknappen.




Fig 19


När inspelningen är klar går det att spara meddelandet genom att klicka på knappen  (Fig 20 A) eller avbryta momentet och radera meddelandet genom att klicka på knappen  (Fig 20 B).

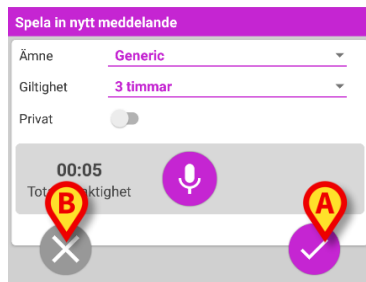**Fig 20**

Efter att meddelandet har sparats visas åter skärmbilden med meddelandelistan för den valda patienten inklusive det senaste inspelade meddelandet (Fig 21).

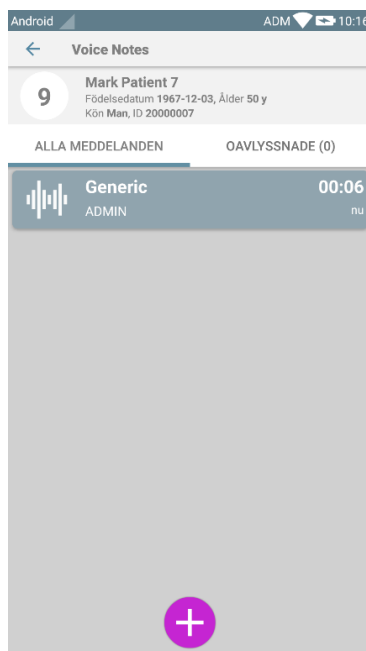**Fig 21**

När ett nytt meddelande sparas, visas ett meddelande på andra handhållna enheter som har samma bädd i domänen (Fig 22).

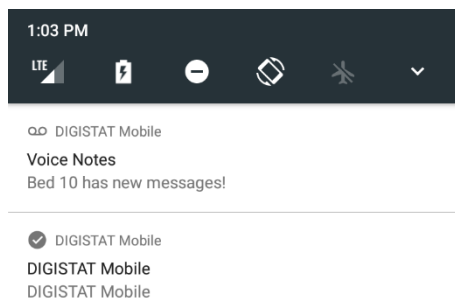**Fig 22**

Samma meddelande visas även vid uppstarten av programmet. Klicka på meddelandet för att visa skärmbilden med meddelandelistan (Fig 22).